

 Operating Room

電動式低圧吸引器

# メラサキューム 009

型式 MS-009

NERA Continuous Suction Unit



# メラサキュームの継承

胸腔・腹腔ドレナージに幅広く使いやすくなりました。




## 1台で2役

PTFEフィルター付きとフィルターなしの2種類の吸引回路があり、使用目的に応じて選択可能です。


## 3色から選べるカラーバリエーション

ピンク・グリーン・ブルーから用途に合わせた選択が可能。



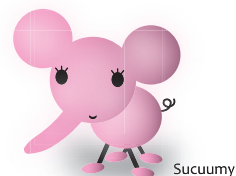

## ユーザビリティ 操作性が維持された操作パネル

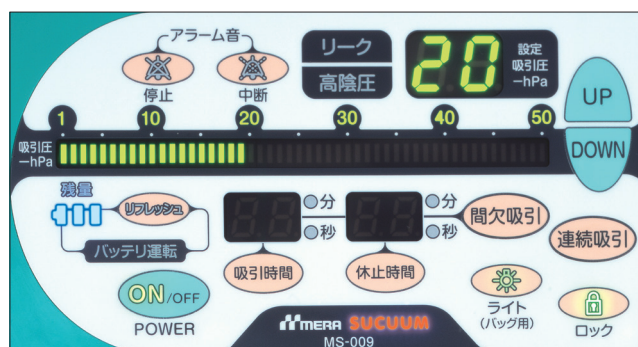


### 誤操作防止のユーザーフレンドリー設計 **NEW**

- 間欠時間の設定は59秒から1分へ連続的に切り替わる方式になり、誤設定を防止します。

### 新しくオートロック機能を採用 **NEW**

- 移動時等、目の届かない場合に不意の誤操作を防止
- ロック機能作動中に操作不可のボタンを押した場合、拒否音が鳴りロック作動中であることをお知らせ致します。

## 汚染感染対策 2種類の脱着交換式の吸引回路セットを1台で共有可能

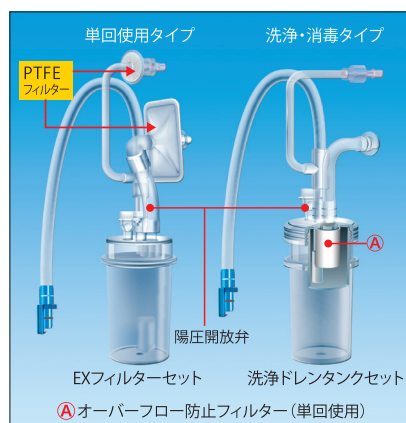


### EXフィルターセット

- PTFEフィルター（疎水性）付き吸引回路
- 洗浄、消毒が不要な単回使用タイプ

### 洗浄ドレンタンクセット **NEW**

- 脱着式で丸洗い、浸漬洗浄、消毒できる吸引回路
- 吸引ポンプへの排液流入による故障を防止するため、単回使用のオーバーフロー防止フィルターを新たにラインナップしました。

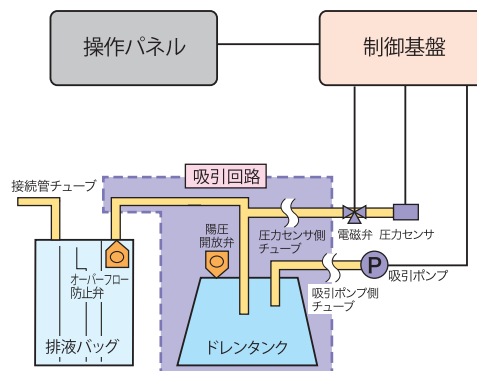


## バッテリー機能 新バッテリーとリフレッシュ機能で保守性アップ



### 約4時間の急速充電 **NEW**

- 60分以上のバッテリー運転が可能。
- 3段階のバッテリー残量表示。
- 保守はバッテリーユニットを交換するだけ。

自動バッテリーリフレッシュ機能を新しく搭載 **NEW**

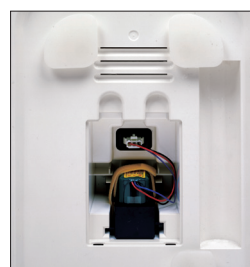

### 電動式低圧吸引器

### メラサキューム009（型式：MS-009T）

- 綺麗で視認性の良いカラー液晶タッチパネル
- 胸腔ドレナージにおけるエアリークの経過管理に役立つトレンド機能
- 機器管理に役立つ操作・警報履歴が確認可能

## ■オプション

### 吸引回路



■EXフィルターセット



■洗浄・消毒タイプ(未滅菌)



### 接続管チューブ



■メラコネクター付接続管



■メラコネクター付接続管

### 排液バッグ



■メラアクアシールD2バッグ  
(容量1000mL)



■メラアクアシール2000バッグ  
(容量2000mL・患者側2ポート)



■メラアクアシール  
逆流防止弁



■シールキャップ



■排液キャップ  
(未滅菌)



■メラDバッグ

### MSカート



■メラMSカート G



■メラMSカート ST



■メラMSカート DX

※ガートル台は含まれません。

| 仕様                                 |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 設定吸引圧・最大流量                         | −1〜−50hPa 2.0L/分以上                                       |
| 間欠吸引の時間設定(吸引、休止)                   | 1秒〜5.9秒(1秒単位)→1分〜6.0分(1分刻み)                              |
| 定格電源・バッテリー                         | A C 100V 50/60Hz・D C 12V ニッケル水素蓄電池連続運転時間:60分以上 充電時間:約4時間 |
| 電源入力                               | 60V A以下                                                  |
| 外形寸法                               | 250mm(W)×200mm(D)×480mm(H)                               |
| 重量                                 | 4.1kg                                                    |
| 電撃に対する保護の形式による分類(JIS T0601-1:2014) | 商用電源接続時 クラスⅠ機器 および内部電源機器                                 |
| E M C 適合                           | E M C 規格 JIS T0601-1-2:2012                              |
| 防滴規格                               | IPX0                                                     |
| 表示・警報作動                            | リーク警報・高陰圧警報・バッテリー残量警報システムエラー・圧力センサエラー・バッテリーエラー           |

| コード番号      | JANコード(14)     | 販売名         | 規格/型式                  | 包装(数量) | 許認可番号            |
|------------|----------------|-------------|------------------------|--------|------------------|
| 0150001400 | 04544753038669 | メラサキューム009  | メラサキューム009 MS-009Tグリーン | 1セット/箱 | 228ADBZX00080000 |
| 0150001500 | 04544753038676 |             | メラサキューム009 MS-009Tピンク  |        |                  |
| 0150001600 | 04544753038683 |             | メラサキューム009 MS-009Tブルー  |        |                  |
| 0150001700 | 04544753045872 |             | メラサキューム009 MS-009グリーン  |        |                  |
| 0150001800 | 04544753045889 |             | メラサキューム009 MS-009ピンク   |        |                  |
| 0150001900 | 04544753045896 |             | メラサキューム009 MS-009ブルー   |        |                  |
| 0150501401 | 14806019614510 |             | EXフィルターセット             | 10個/箱  |                  |
| 0150501501 | 04806019614527 |             | オーバーフロー防止フィルター         | 10個/箱  |                  |
| 0150501600 | 04806019614537 |             | 洗浄ドレンタンクセット            | 1個/箱   |                  |
| 0150100101 | 14806019600490 | メラアクアシール    | D2バッグ                  | 20個/箱  | 11B1X00016000001 |
| 0150100201 | 14806019600506 |             | 2000バッグ                | 12個/箱  |                  |
| 0158001501 | 14544753018330 |             | 逆流防止弁                  | 10個/箱  |                  |
| 0150204501 | 14806019604856 | メラコネクター付接続管 | US×P×1.5m              | 10本/箱  | 11B1X00016000002 |
| 0150204701 | 14806019604870 |             | UL×P×1.5m              |        |                  |
| 0150100301 | 14806019600513 | メラDバッグ      | 1000                   | 20個/箱  | 11B1X00016000004 |
| 0150200601 | 14806019600575 | メラコネクター付接続管 | 8×10×1.5m              | 10本/箱  | 11B1X00016000002 |
| 0150503101 | 14806019607048 | メラアクアコンフォート | シールキャップ                | 10個/箱  | 11B1X00016000226 |
| 0150502401 | 14806019605846 | 排液キャップ      | 排液キャップ(大) 白ポート・患者側     | 50個/箱  | 医療機器非該当品         |
| 0150502501 | 14806019605853 |             | 排液キャップ(小) 青ポート・器械側     |        |                  |
| 0150500400 | 04544753167734 | メラMSカート G   | ガートル台取付タイプ             | 1式/箱   | 医療機器非該当品         |
| 0150500300 | 04544753167727 | メラMSカート ST  | ガートル棒付                 |        |                  |
| 0150500200 | 04544753167710 | メラMSカート DX  | ガートル棒付(両サイド取付可能)       |        |                  |

製造販売業者

**メラ 泉工医科工業株式会社**

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

**注意**

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2019/6月/3000 ●クラス分類:Ⅱ ●不許複製 ●F-2 ●B-82 ●BO-0351-01 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)