


メラ ミルキングローラー (シリコン用 S)

MERA Milking Roller for Silicone Drain


- **直上力点型デザイン**：手のひらサイズ。チューブを指でつまむような感覚でミルキングができます。
- **スムーズローリング機能【低摩擦特殊PE製ローラー&ストッパー(ローラー間の接触防止)】**
非常に軽いローラーの転がりで楽に効果的なミルキングができます。
伸びやすく切れやすいシリコンドレーンに対して、どんなにミルキングしても安心してご使用いただけます。
- **ドレーンガイド**：ミルキング中のドレーンの偏移を防止します。
- **軽量コンパクト**：わずか36gで操作性を向上します。
- 1万回のミルキング耐性
- 10Fr(約3.2mm)以上のシリコン製ドレーンに適用が可能です。

シリコン製ドレーン専用のミルキングローラーです。
その優れた操作性と抜群のミルキング効果をお試しください。


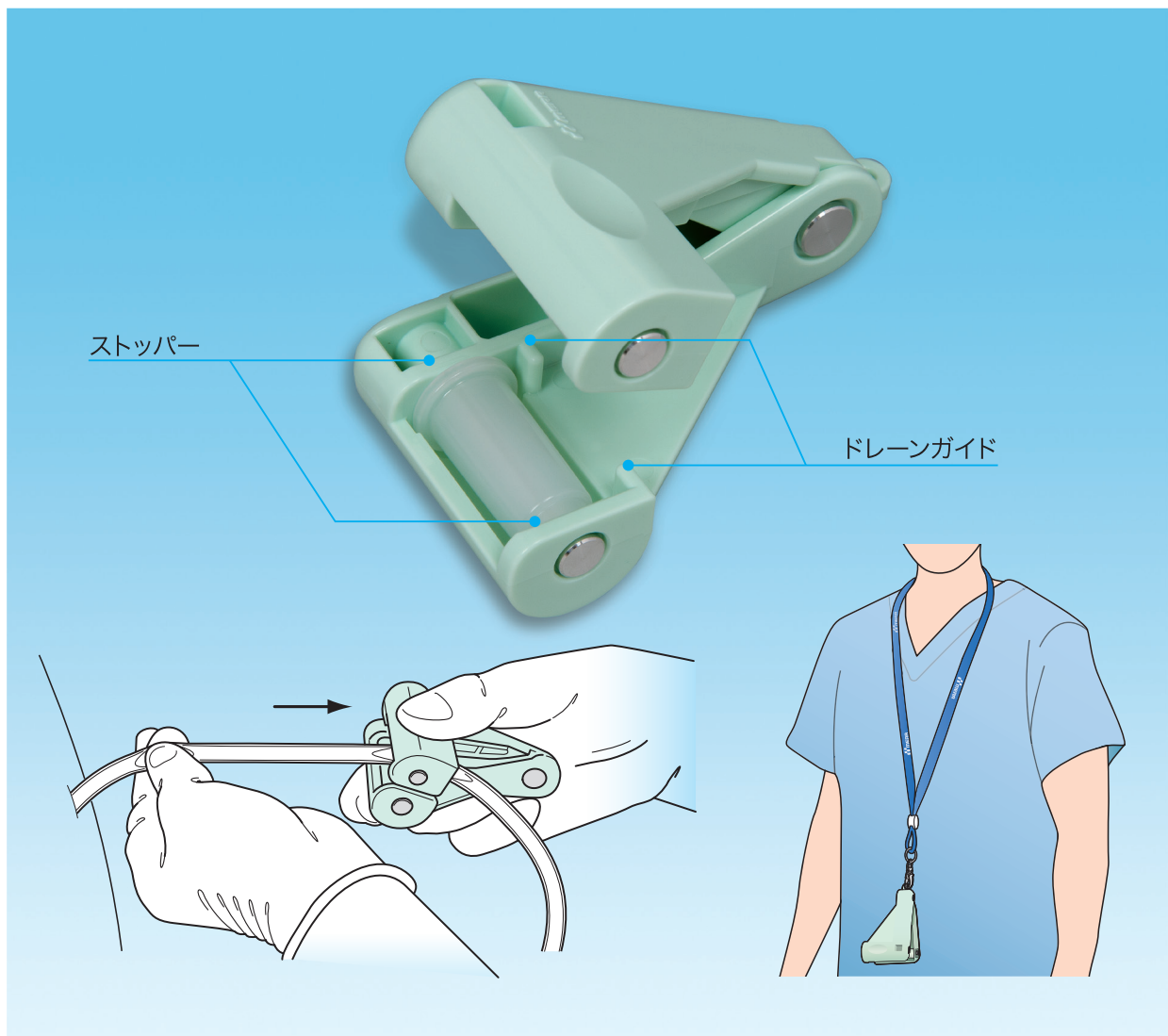


ドレーン引張強度(アルコール塗布時のシリコンドレーンの脆弱化) 社内試験データ

引張強度試験 JIS-T3215.4.2.2「体内留置排液用チューブ及びカテーテル」に基づく実験条件

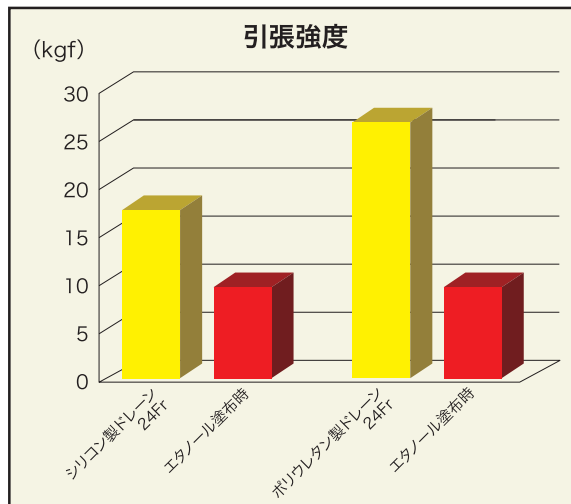

メラ ネックストラップ(使用方法)

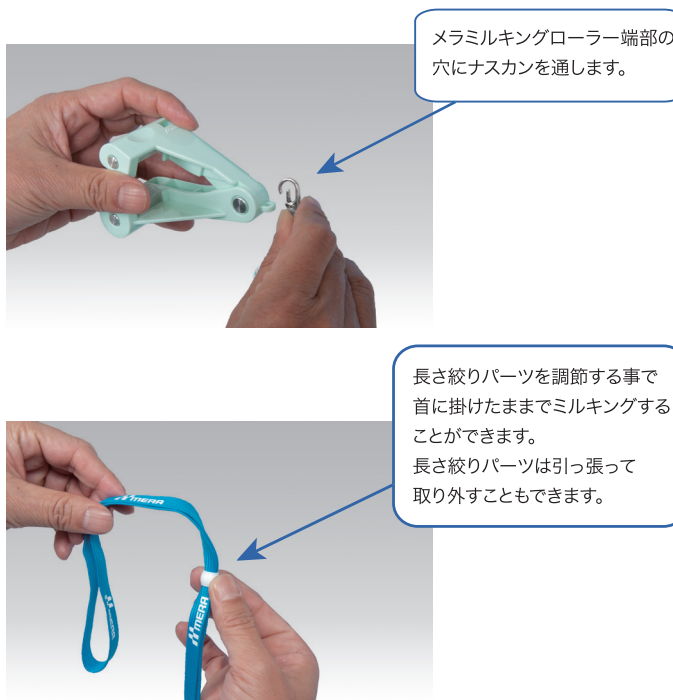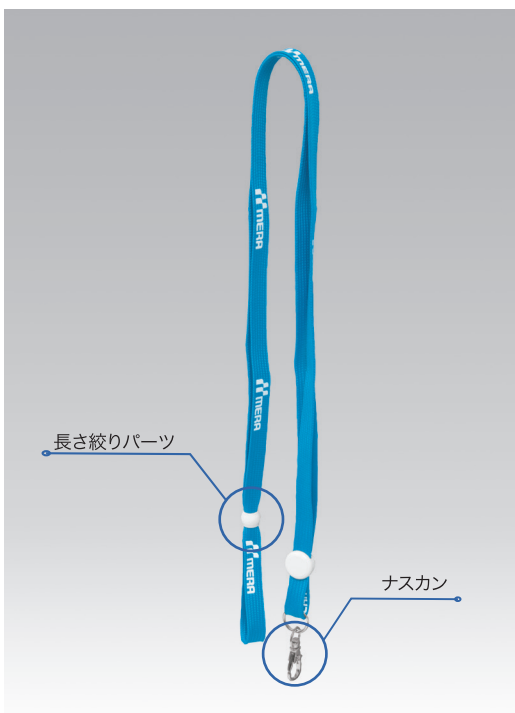

コード番号	販売名/商品名	規格/型式	包装(数量)	希望小売価格
0150810101	メラ ミルキングローラー	シリコン用S	20個/1箱	24,000
0150810000	メラ ミルキングローラー	シリコン用S(個装)	1個/1箱(ストラップ1本付)	2,000
0150809901	※メラ ネックストラップ	メラ ネックストラップ	3本/1箱	1,800

※医療機器非該当

販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2019/10月/2000 ●届出番号: 11B1X00016000231 ●不許複製 ●B-48 ●F-1 ●BO-0213-02

www.mera.co.jp/