

メラプレッシャーモニタ HPM-2

Pressure Monitor HPM-2

フレキシブルな圧力モニタで、安全管理を。




メラプレッシャーモニタ HPM-2

■特長

- 大画面カラー表示で、数値及び警報状態等を分りやすく表示しています。
- 回路内圧などの2chの圧力測定が可能であり、陽圧／陰圧どちらでも測定表示可能です。
- 観血式、空圧式どちらでも測定可能です。
- デジタル表示に加え、バーグラフにてアナログ表示もしています。
- 上限／下限警報を搭載し、設定値以上に達すると警報発生します。また、停止信号使用時は、接続した外部機器の制御が行えます。

■標準画面

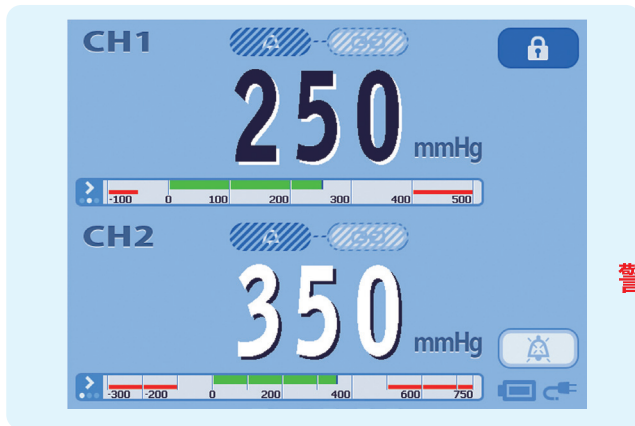

■警報時画面



■仕様

電撃に対する保護の型式		クラスⅠ機器及び内部電源
電撃に対する保護の程度による装着部の分類		CF形装着部（観血式圧力センサコネクタ）
電源		AC100V 50/60Hz
電源入力		100VA以下
バッテリー		DC12V 単3形アルカリ乾電池8本 20分以上
圧力測定範囲	空圧式	-300～750mmHg（±2.0% f.s.以内）
	観血式	-300～999mmHg（入力に対しては5μV/V/mmHgにて0.5%f.s.以内）※センサの精度は含まない
安全機能		警報設定（上限警報、下限警報） 停止信号コネクタへの接続機器の制御
重量		1.5kg（ホルダ除く）
外径寸法		160(W)×108(D)×130(H)（本体のみ、突起物は除く）

■全体図



■構成

■付属品

- ホルダー
- 単3形アルカリ乾電池8本
- 停止信号ケーブル

■オプション

- 外部出力ケーブル

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先：本社商品企画：TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点：札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●2016/1月/3000 ●不許複製 ●医療用具承認番号：22700BZX00296000 ●S-1 ●D-35 ●BH-0272-01

www.mera.co.jp