


NSHへパリン化カニューレ

# 経皮的挿入用カニューレ PCKC


Percutaneous Cardiopulmonary Support Cannulae

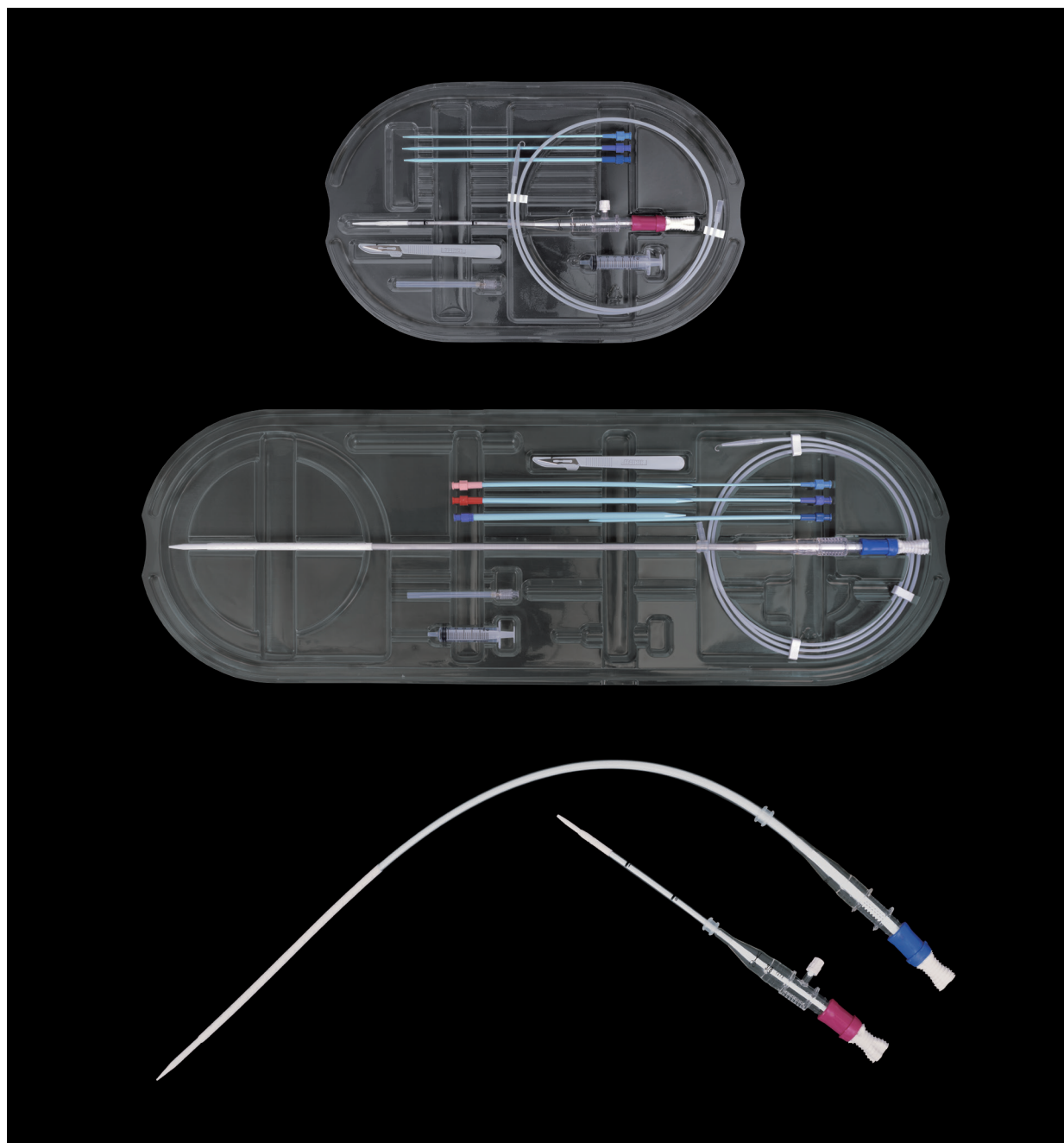


# 挿入しやすく、安定した流量が得られるヘパリンコーティング 経皮的挿入用カニューレ PCKCシリーズ

## 特長1 ワントレイ方式

全ての構成品が一目で確認でき、取出しが容易です。

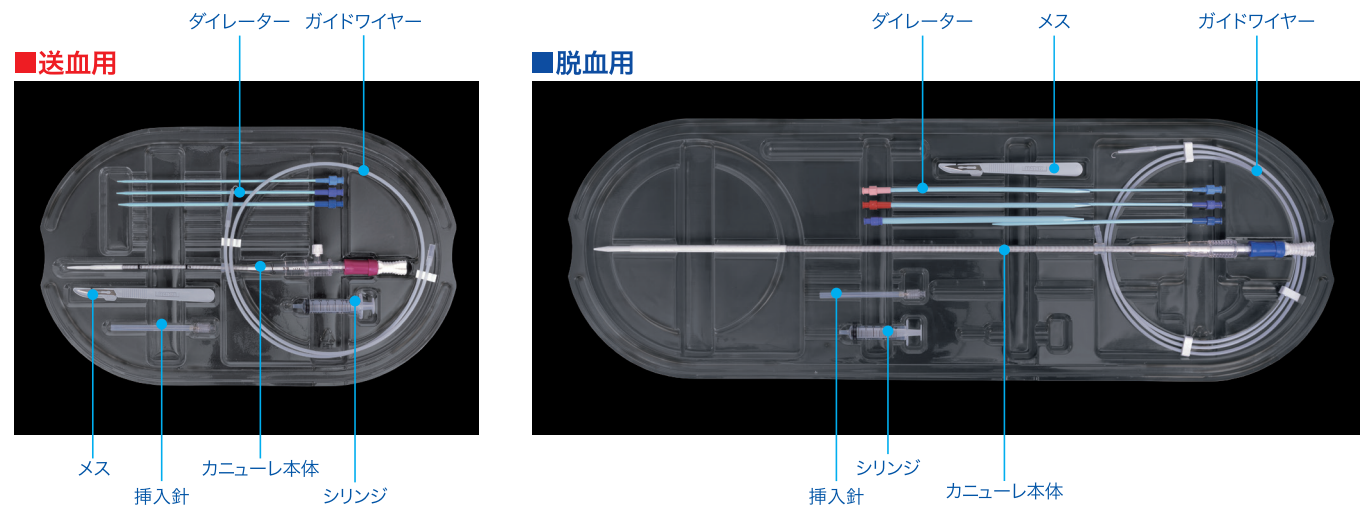


## 特長2 スムーズに挿入が行える機構

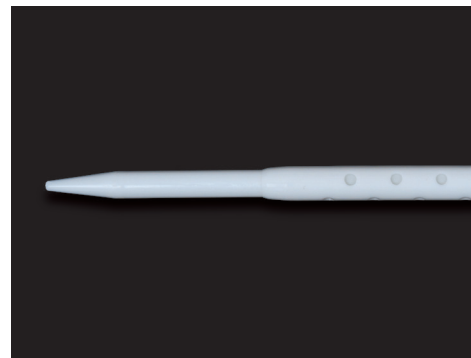


カニューレ先端は滑らかなテーパ状になっており、ダイレーターとの段差を極小化しています。血管内壁を損傷しにくく、スムーズな挿入が可能です。  
また、先端チップにはX線不透過チップを使用していますので、X線を用いての位置確認を行うこともできます。

## 特長3 フレキシブルなシンウォールシャフト

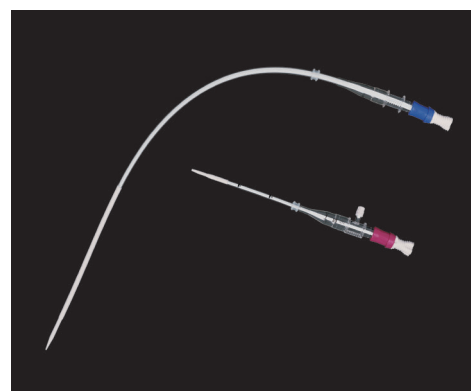


カニューレ本体はシンウォールシャフトかつ適度な剛性(コシ)を持たせた構造になっています。蛇行血管への挿入の際も追従性が高く、安定した流量が得られます。

## 特長4 ダイレーターロック機構

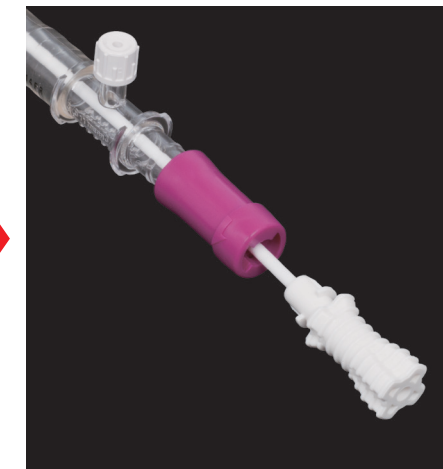



カニューレ挿入時に、ダイレーターが押し戻されてずれないようにするため、コネクターキャップにダイレーターをロックできる機構になっています。  
写真のように、ダイレーターハブを左へ回すことによって簡単にロックを解除できます。

## 特長5 血液漏れ防止キャップ

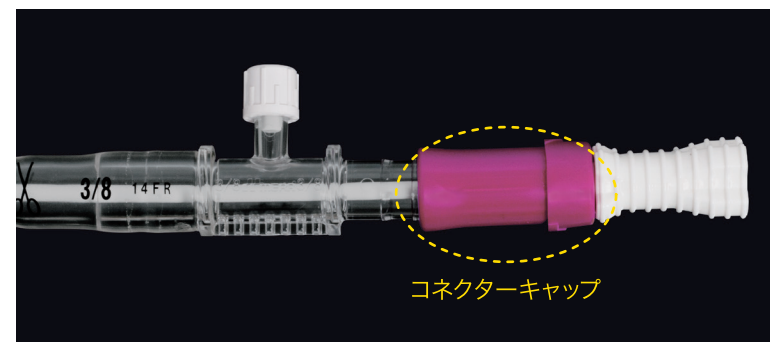

コネクターキャップ内に血液漏れ防止リングを内蔵しています。ダイレーターを抜く際の出血を最小限に抑えることができます。

## 特長6 回路とカニューレの接続が簡単

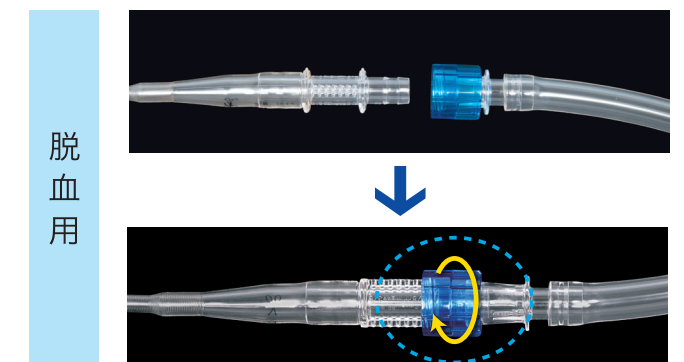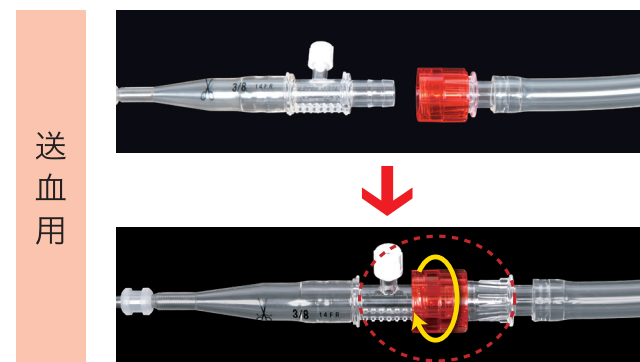

メラ PCPS回路 SOLASなど、ロックコネクタ付の回路とチューブを切断せずに簡単に接続が可能です。

## 製品仕様

### ■経皮的挿入用カニューレ 送血用

| 製品仕様 | 商品コード      | JANコード         | 型式        | 外径           | 有効長   | 接続コネクタ |
|------|------------|----------------|-----------|--------------|-------|--------|
|      | 02502209H0 | 04806019616692 | PCKC-A-14 | 14Fr (4.7mm) | 150mm | 3/8"   |
|      | 02502210H0 | 04806019616708 | PCKC-A-16 | 16Fr (5.3mm) |       |        |
|      | 02502211H0 | 04806019616715 | PCKC-A-18 | 18Fr (6.0mm) |       |        |
|      | 02502212H0 | 04806019616722 | PCKC-A-20 | 20Fr (6.7mm) |       |        |



| 付属品 | 型式        | ダイレクター |      |      |      |      | ガイドワイヤー                      | 挿入針       | メス | シリンジ      |
|-----|-----------|--------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|----|-----------|
|     |           | 8Fr    | 10Fr | 12Fr | 14Fr | 16Fr |                              |           |    |           |
|     | PCKC-A-14 | ●      | ●    | ●    |      |      | 0.035 インチ<br>100cm(J型)<br>1本 | 18G<br>1本 | 1個 | 5ml<br>1本 |
|     | PCKC-A-16 | ●      | ●    | ●    | ●    |      |                              |           |    |           |
|     | PCKC-A-18 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    |                              |           |    |           |
|     | PCKC-A-20 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    |                              |           |    |           |

### ■経皮的挿入用カニューレ 脱血用

| 製品仕様 | 商品コード      | JANコード         | 型式        | 外径           | 有効長   | 接続コネクタ |
|------|------------|----------------|-----------|--------------|-------|--------|
|      | 02502213H0 | 04806019616739 | PCKC-V-18 | 18Fr (6.0mm) | 520mm | 3/8"   |
|      | 02502214H0 | 04806019616746 | PCKC-V-20 | 20Fr (6.7mm) |       |        |
|      | 02502215H0 | 04806019616753 | PCKC-V-22 | 22Fr (7.3mm) |       |        |
|      | 02502216H0 | 04806019616760 | PCKC-V-24 | 24Fr (8.0mm) |       |        |

| 付属品 | 型式        | ダイレクター |      |      |      |      |      | ガイドワイヤー                      | 挿入針       | メス | シリンジ      |
|-----|-----------|--------|------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|----|-----------|
|     |           | 8Fr    | 10Fr | 12Fr | 14Fr | 16Fr | 20Fr |                              |           |    |           |
|     | PCKC-V-18 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    |      | 0.035 インチ<br>180cm(J型)<br>1本 | 18G<br>1本 | 1個 | 5ml<br>1本 |
|     | PCKC-V-20 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    |      |                              |           |    |           |
|     | PCKC-V-22 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                              |           |    |           |
|     | PCKC-V-24 | ●      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |                              |           |    |           |

## フローチャート

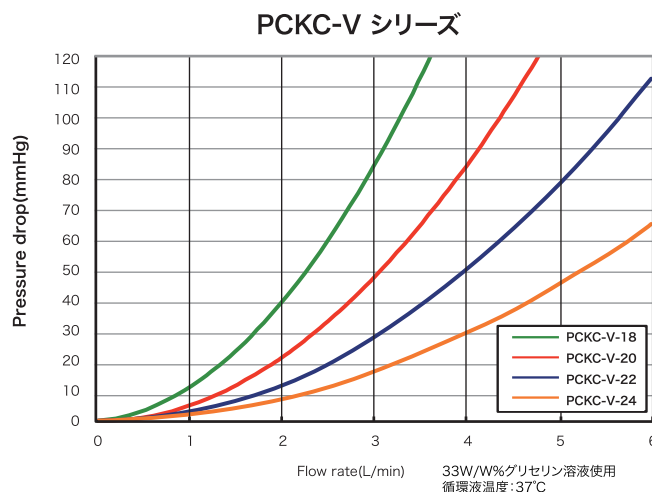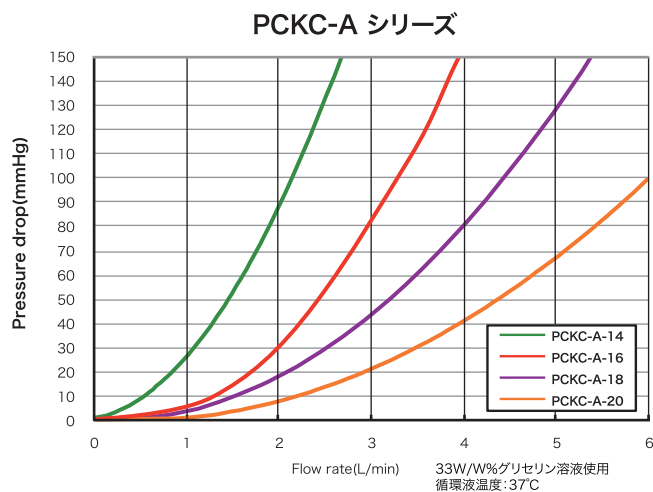

■保険償還機能分類:体外循環用カニューレ(1) 成人用 ④ 経皮的挿入用カニューレ 一般型(生体適合性有)

■販売名: NSHヘパリン化カニューレ

製造販売業者

**MEIRA** 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

**注意**

実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●承認番号: 21100BZZ00019000 ●2020/10月/3000 ●不許複製 ●S-2 ●D-113 ●BH-0329-03

[www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)