

メラ麻醉器用呼吸回路 (F回路)


Anesthesia Breathing Circuit

四半世紀にわたって使われている、我が国初の2重管構造の麻醉器用呼吸回路です。



メラ麻醉器用呼吸回路 (F回路)

構造

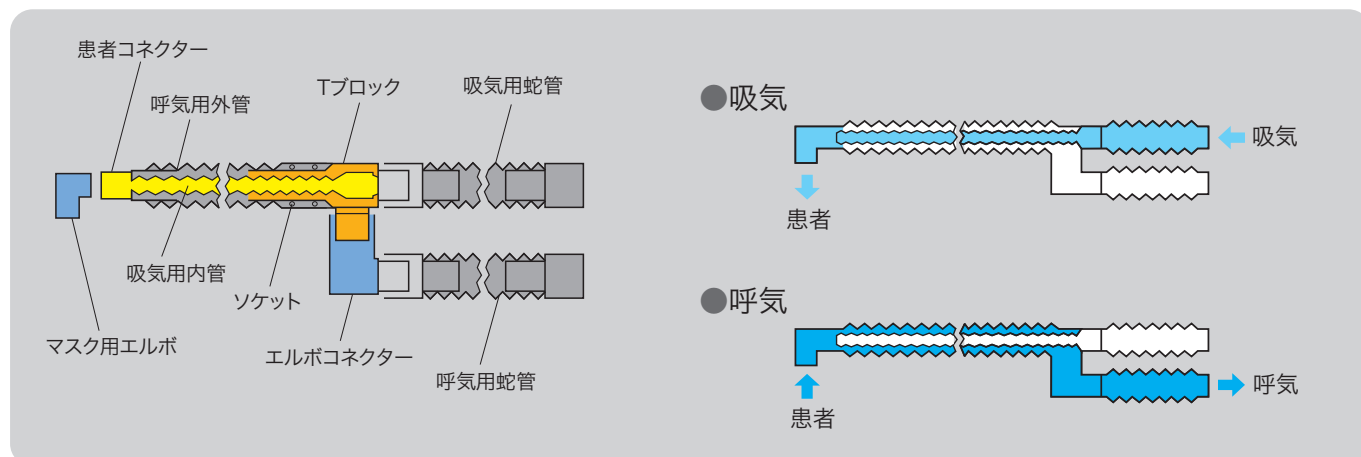


特徴

- 麻酔器用の呼吸回路です。
- 頭頸部、口腔内手術や特殊な体位の手術において、広い視野を得る事が出来ます。
- 循環式、再呼吸式、非再呼吸式などの呼吸回路に使用する事が出来ます。
- 死腔が小さく、新生児から大人まで幅広く使用する事が出来ます。
- 低流量麻酔下でも使用する事が出来ます。
- ラテックスは使用していません。
- 患者コネクタ (I.D15mm側) は、スィベルしますので回路のねじれをとることが出来ます。
- マスク用エルボ (I.D15mm側) のスィベルは指先でつまむことで、ロックさせることが可能です。(GSコネクタ)



世界初、GSコネクタ(ギアードスィベルコネクタ)採用

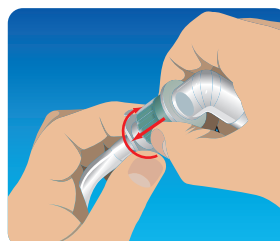

【取り付け時】

15mmオスコネクタに差し込み、回転部をロックして、押しながら回してください。

【取り外し時】

回転部をロックして、回しながら引き抜いてください。

※単体販売として「エルボコネクタ(ギアードスィベル)」をご用意しています。

販売名	型式	商品コード	JANコード	包装
メラブリージングコネクタ	エルボコネクタ(ギアードスィベル)	0020104301	04806019609434	10個/箱(1個/1袋)

認証番号:226ADBZX00055000 ※本品は未滅菌品です。

型式

型式	2重蛇管の長さ(mm)	商品コード	JANコード
※F180	1800	0020008100	04806019604330
※F150	1500	0020008200	04806019604347
F120	1200	0020008300	04806019604354
F 90	900	0020008400	04806019604361

※受注生産対応品 包装:1個/1密閉袋/1包装箱

関連商品

- F呼吸回路ホルダー(オプション)と併用する事により、ペイン回路と同等の機能での使用が可能です。



■ F呼吸回路ホルダー(コード:0020101100)
■ 承認番号:20600BZZ00989000

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

製造業者 MERASENKO CORPORATION (国名:フィリピン)

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画):TEL.03-3812-3252 FAX.03-3812-4613)

■ 営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
一般的名称:単回使用麻酔用呼吸回路 37704000 管理医療機器 ● 2015/2月/1000 ● 不許複製
● 承認番号:22100BZX00058000 ● S-4 ● A-10 ● BA-0012-03 www.mera.co.jp/