

「二重ロック」安全機構付

メラ ソフィット(気管切開チューブ)

Tracheostomy Tube MERA SOFIT

- ソフィットに新しい機能が加わりました。(メラソフィットのラインアップに追加しました)
- 二重管のリスク『内カニューレの不用意な脱落』を低減します。

二重ロック=ツイストロック+スライドロック



「二重ロック」安全機構付 メラ ソフィット(気管切開チューブ)

●型式にDouble Lock(二重ロック)を意味する『DL-』を付与しました。


■ソフィット(二重ロック)の特長

- ①「内カニューレ脱落のリスクを低減」
人工呼吸回路を接続して使用する場合、スライドロックを施錠することで、内カニューレの不用意な脱落のリスクを低減することができます。
- ②「簡単なスライドロック機構」
- ③「ツイストロックだけでも使用可能」

ツイストロック 操作①



スライドロック 操作②

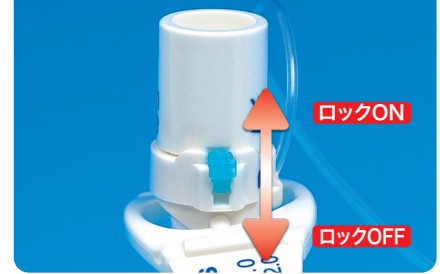

DL-C (2重管、カフ付)



標準セット



DL-CF (2重管、カフ・窓付)



標準セット



DL-CS (2重管、カフ・吸引付)



標準セット



DL-CFS (2重管、カフ・窓・吸引付)



標準セット



DL-F (2重管、カフなし・窓付)



標準セット



DL-NC (2重管、カフ・窓なし)



標準セット



製品の型式	気管切開チューブ		気管切開チューブの長さ(※2)
	内径(※1)	外径	
DL-5C・DL-5CF・DL-5CS・DL-5CFS・DL-5F・DL-5NC	5.0	8.6	55
DL-6C・DL-6CF・DL-6CS・DL-6CFS・DL-6F・DL-6NC	6.0	9.7	64
DL-7C・DL-7CF・DL-7CS・DL-7CFS・DL-7F・DL-7NC	7.0	10.8	70
DL-8C・DL-8CF・DL-8CS・DL-8CFS・DL-8F・DL-8NC	8.0	12.0	75
DL-9C・DL-9CF・DL-9CS・DL-9CFS・DL-9F・DL-9NC	9.0	13.2	78

(※1)内カニューレの内径 (※2)ネックプレートから外カニューレの先端までのカニューレ中央の長さ

(mm)

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先:本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

製造業者 MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承下さい。
●2015/11月/3000 ●認証番号:21600BZY00063000 ●不許複製 ●A-42 ●S-4 ●BA-0066-06
●管理医療機器 ●一般の名称:単回使用気管切開チューブ www.mera.co.jp/