

Boehringer VAVD Controller **MODEL3930**



Boehringer VAVD Controller MODEL3930

1999年に最初のVAVD(陰圧吸引補助脱血)専用コントローラを製造した米国Boehringer社の最新モデル3930は、Boehringer社が長年の経験を活かして設計し、製造した操作性のよいVAVDコントローラです。

製品名	商品コード	医療機器承認番号	JANコード
VAVDコントローラ MODEL3930	0208005300	22900BZX00051000	4544753137003


販売名: VAVDコントローラ MODEL3930

- 握りやすい大型の圧力調節ノブを採用。
- 貯血槽側の圧に加えて、吸引源の圧も確認することができます。
- REG/OFF切替バルブで設定吸引と大気解放に切替できます。
- 過度な陰圧や陽圧を解放する安全弁が組み込まれています。
- 人工肺から排出された麻酔ガスを換気します。^{*}

^{*} VAVDコントローラで人工肺から排出される余剰麻酔ガスを吸引すると、施設の吸引配管に流れる構造になっているため、余剰麻酔ガスを吸引する際は、必ず施設の吸引設備基準を確認して使用の可否を決めてください。

製品仕様

圧力調節範囲	-15 ~ -60mmHg
設置	直径1.5インチ(約38mm)以下のポールに取り付けられます。
重量	3.4ポンド(約1.5kg)
サイズ	高さ10.25インチ(約260mm) 幅7.5インチ(約190mm) 奥行き8.5インチ(約220mm)
圧力解放弁 陰圧	-95mmHg以下で作動
圧力解放弁 陽圧	陽圧で作動

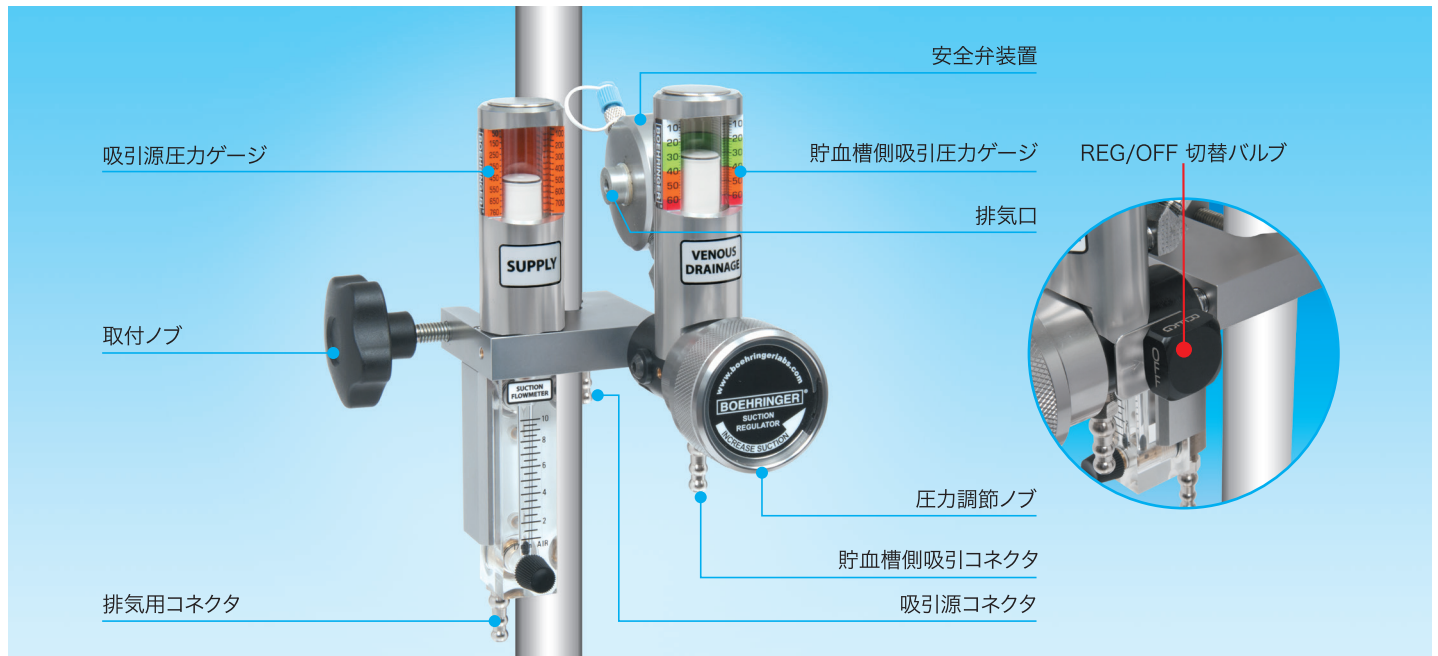

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

製造業者: Bohringer Laboratories, LLC

ベーリンガー ラボラトリーズ エルエルシー アメリカ合衆国



実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2020/2/500 ● 不許複製 ● S-1 ● D-112 ● BH-0330-03 www.mera.co.jp