

コラートBP センサーバルーンカテーテル P2 ショート


販売名:コラートBP センサーバルーン P2

CORART BP Sensor Balloon P2 Short



コラートBP センサーバルーン P2 ショート

仕 様		
販 売 名	コラートBP センサーバルーン P2	
製 品 名	コラートBP センサーバルーン P2 7Fr ショート	
商 品 コ ー ド	0212021500	0212021600
バ ル ー ン 容 量	28mL	36mL
カ テ ー テ ル サ イ ズ	7Fr	
ル ー メ ン	ダブル	
カ テ ー テ ル 材 質	医療用ポリウレタン	
バ ル ー ン 膜 外 径	16mm	
バ ル ー ン 膜 全 長	170mm	210mm
駆 動 チ ュ ー ブ 長	230mm	190mm
バ ル ー ン 膜 材 質	医療用ポリウレタン	
ガイドワイヤー(バルーン用)	0.021inch 150cm J型	
ガイドワイヤー(シース用)	0.035inch 45cm J型	
シ ー ス 径	7Fr	
シ ー ス 長	11cm	
ダ イ レ ー タ ー 径	7Fr	
保険請求名		
分 野 名	バルーンパンピング用バルーンカテーテル	
機 能 区 分	一般用センサー内蔵型	
承 認 番 号	21400BZZ00104000	

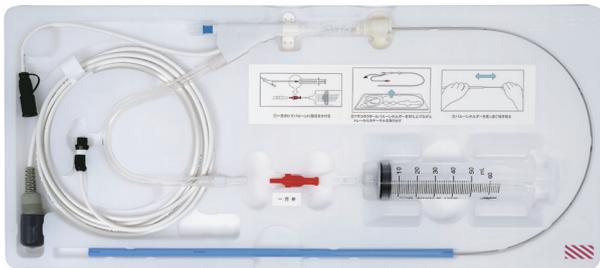

●バルーントレー



●イントロデューサーキット

分割式センサーケーブル採用



分割式にすることにより、ケーブルの重みや嵩張りによる挿入手技時の操作性の低下を軽減しました。

ゼオン製7Frシースを同梱

穿刺抵抗が低く、キレの良いシースを採用しており滑らかな血管挿入が期待できます。

日本人向けのバルーン長

バルーン長を日本人の体格に合わせて短くしました。
腎動脈の虚血、腹部石灰化病変への接触可能性を低減させます。

製造販売業者

MEMERA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先 本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
●2018/4月/2000 ●不許複製 ●医療用具承認番号:21400BZZ00104000 ●GR-2 ●D-14 ●BH-0243-02