


 Cardiovascular Surgery

体外循環用カニューレ フレックスメイト

# ステルスフロー<sup>®</sup> カニューレ

Stealth Flow<sup>®</sup> Aortic Cannulae

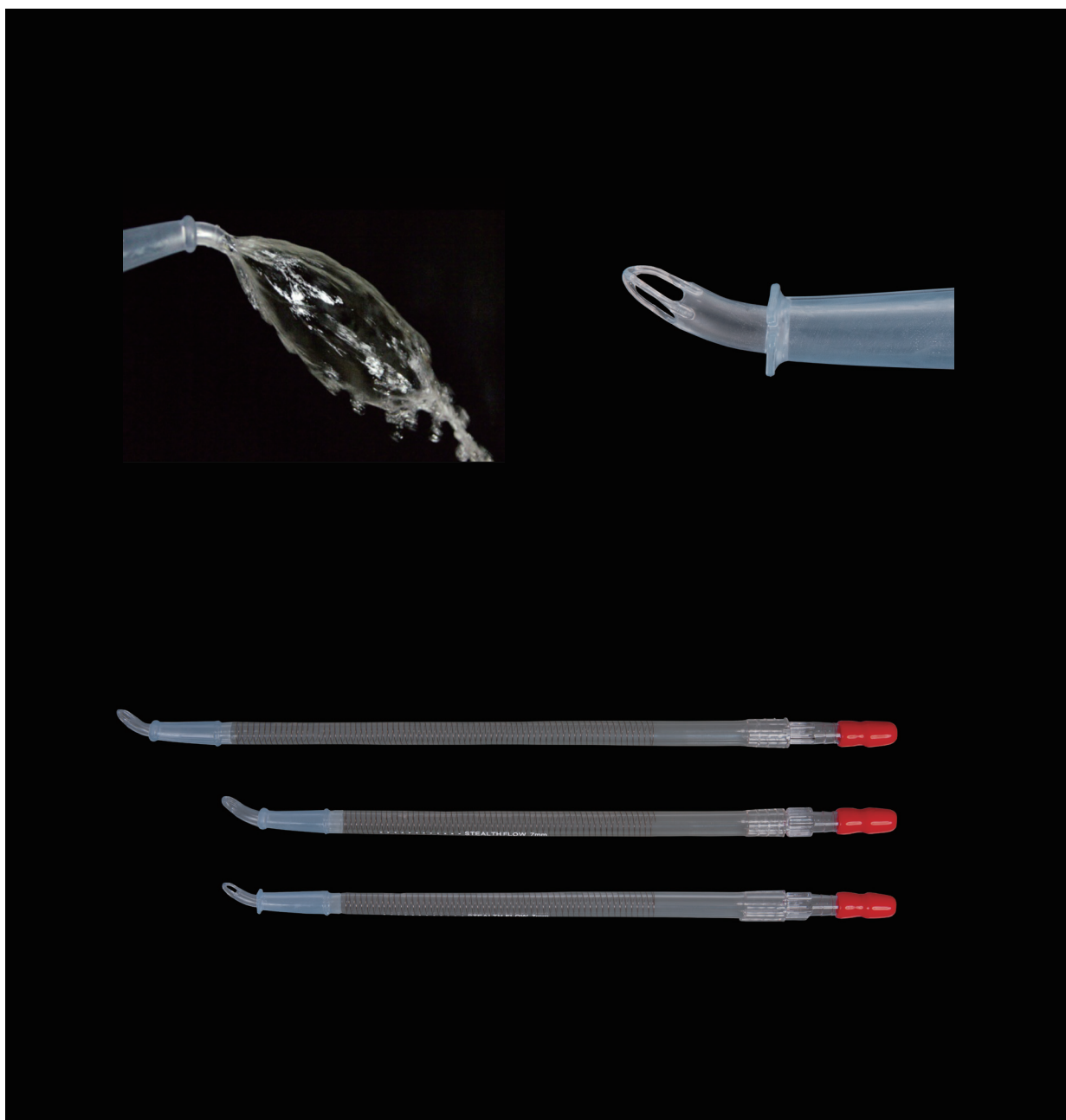

# ステルスフロー®カニューレ

## ■特殊な先端チップ形状


- 特殊な先端チップ形状によりジェット流を抑え、分散し噴流する低侵襲な送血が行えます。
- テーパー形状を採用することにより、大動脈への挿入を容易にしました。
- カニューレに付属しているキャップにはVENT機能があり、血液を漏らすことなくエア抜きができます。



噴流状態




先端チップ

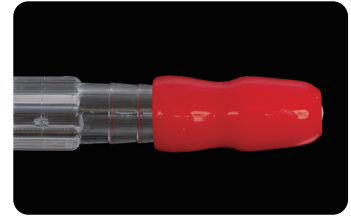

VENTキャップ

## ■新たにショートタイプ、フランジタイプを追加

従来のスーチャーバンプ付タイプに加え、全長の短いスーチャーバンプ付ショートタイプとスーチャーフランジ付ショートタイプを追加しました。これにより、様々な手技に対応が行えます。

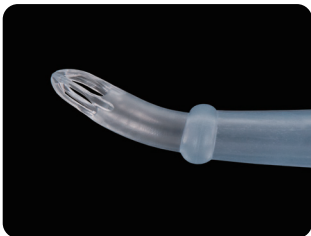

スーチャーバンプ




スーチャーフランジ




## ■柔軟で圧力損失を抑えるシンウォールシャフト

ワイヤーで補強されたシャフトは柔軟で挿入部位へのテンションを最小限に抑えるよう設計されています。また、シンウォールシャフトにより、高流量時に圧力損失を抑え、安定した送血が行えます。シャフトには送血方向(先端チップの向き)が大動脈挿入後も判別できるよう、独自のマーカーが付いています。

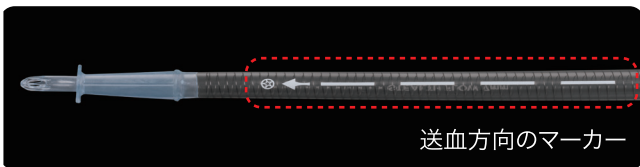

送血方向のマーカー

## ■フローチャート

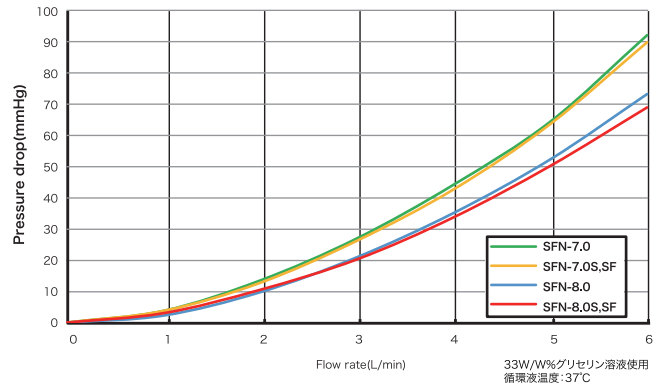

## ■製品仕様

商品コード	JANコード	品番	チップ	チップ外径	全長	接続コネクター
0250205700	04806019615176	SFN-7.0	スーチャーバンプ付	7.0mm	440mm	3/8インチ
0250205800	04806019615183	SFN-8.0	スーチャーバンプ付	8.0mm	440mm	3/8インチ
0250226800	04806019617804	SFN-7.0S	スーチャーバンプ付	7.0mm	375mm	3/8インチ
0250226900	04806019617811	SFN-8.0S	スーチャーバンプ付	8.0mm	375mm	3/8インチ
0250227000	04806019617828	SFN-7.0SF	スーチャーフランジ付	7.0mm	375mm	3/8インチ
0250227100	04806019617835	SFN-8.0SF	スーチャーフランジ付	8.0mm	375mm	3/8インチ

■保険償還機能分類: 体外循環用カニューレ(1)成人用①送脱血カニューレ イ シングル強化

■販売名: 体外循環用カニューレ フレックスメイト

# MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

■注意: 実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。 ■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 ● 2020/2月/3000 ● 不許複製 ● S-1 ● D-143 ● BH-0427-01 ● 承認番号: 20300BZZ00510000 [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)