

 Cardiovascular Surgery

メラ リザーバ HCR-2F

Cardiotomy Reservoir

●小型でシンプルなデザインを追及したベストセラー製品の進化型




メラ リザーバ HCR-2F

- 設置の自由度を高めるため、回転式リザーバヘッドを採用しました。
- 視認性を高めるため、リザーバ側面の3ヶ所にメモリラベルを貼付しました。
- 孔径が均一で安定したろ過能力を持つ、スクリーンフィルタを搭載しました。



■回転式リザーバヘッド(360°回転)

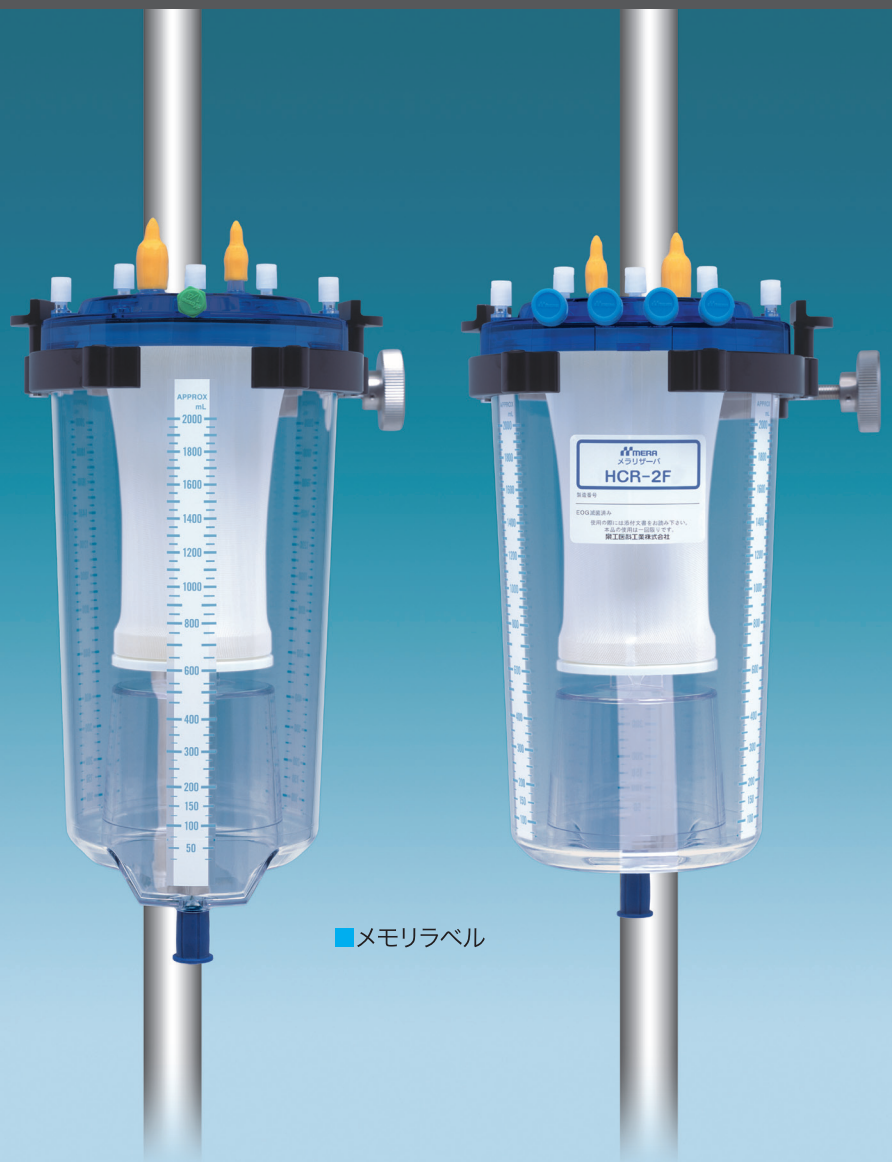

■メモリラベル

仕様

最大血液量	2000mL
最高血液流量	5L/min
貯血槽	ポリカーボネート
吸引フィルタ	スクリーンフィルタ(孔径40 μ m:ポリエチレンテレフタレート)
除泡網	ポリウレタン
ポート	吸引血入口ポート:6.4mm(1/4")と9.5mm(3/8")兼用×4 薬液注入ポート :ルアーポート(スクリーンフィルタ内)×3 :ルアーポート(スクリーンフィルタ外)×2 急速充填ポート :6.4mm(1/4")×1 :9.5mm(3/8")×1 血液出口ポート :9.5mm(3/8")×1 ガスベントポート :6.4mm(1/4")×1
備考	ヘッド部回転可能
商品コード	0230200200

専用ホルダー



■メラリザーバ2Lホルダー[商品コード:0230300100]

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・函館・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●2013/3月/2000 ●不許複製 ●医療用具承認番号:20200BZZ00929000 ●S-3 ●D-26 ●BH-0086-03

www.mera.co.jp