

 Anesthesia

ソフィットフレックス (一重管)

Tracheostomy Tube SOFIT FLEX





吸引ライン埋込み



気管後壁側吸引

ネックプレートマーカ

(サイズ7, 7.5, 8, 8.5, 9に着色)

(黄) (青) (紫) (緑) (橙)



15mmコネクタの拡大図

■吸引付の特長

- 硬質コネクタはチューブとの接続を容易にします。
- カニューレの壁に内蔵させた吸引ラインは、気管切開孔への刺激を低減します。
- 内蔵の吸引ラインは安定した吸引性能を発揮します。
- 吸引ラインの開口部は仰臥位での吸引に適した位置に設けました。(カニューレ湾曲の外側)
- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の側面に配置されています。



F-CS (カフ・吸引付)

- 吸引穴は萎んだカフで閉塞されない設計になっています。
- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の側面に配置されています。



F-CFS (カフ・窓・吸引付)


- F-CSに窓を設けたタイプです。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT(標準付属品)、メラスピーチバルブ(別売、バルブT)を接続することができます。

種類	型式	内径	外径	長さ
CS	F-6CS	6.0	9.0	55
	F-7CS	7.0	10.5	65
	F-7.5CS	7.5	11.0	71
	F-8CS	8.0	11.5	76
	F-8.5CS	8.5	12.1	81
	F-9CS	9.0	12.7	87
	F-10CS	10.0	13.9	97

種類	型式	内径	外径	長さ
CFS	F-6CFS	6.0	9.0	55
	F-7CFS	7.0	10.5	65
	F-7.5CFS	7.5	11.0	71
	F-8CFS	8.0	11.5	76
	F-8.5CFS	8.5	12.1	81
	F-9CFS	9.0	12.7	87
	F-10CFS	10.0	13.9	97

■全タイプ共通の特長

- キャップT及びメラスピーチバルブ(バルブT)は、カニューレに「窓」が開けられていないタイプに接続できない「安全設計」(誤接続防止機構)が施されています(フェイルセーフ)。
- 全体が柔らかいネックプレートを採用。可動性と皮膚への低刺激性を兼ね備え、皮膚トラブルの低減になります。
- ネックプレートのエンボス加工は、浸出液によるネックプレートのはり付きやガーゼのずれを低減できます。
- メラコルゲート内カニューレを組み合わせることができます。カニューレ内腔の開存性、メンテナンスを向上できます。(フレックス内径7~9の5サイズ)

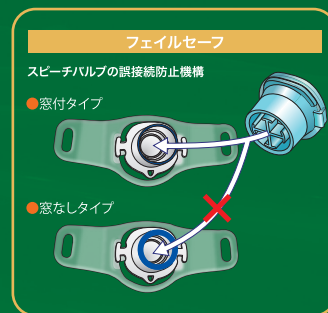

F-C (カフ付)

- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の外側についています。

種類	型式	内径	外径	長さ
C	F-6C	6.0	8.3	55
	F-7C	7.0	9.6	65
	F-7.5C	7.5	10.3	71
	F-8C	8.0	11.0	76
	F-8.5C	8.5	11.6	81
	F-9C	9.0	12.3	87
	F-10C	10.0	13.5	97



F-CF (カフ・窓付)

- F-Cに窓を設けたタイプです。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT(標準付属品)、メラスピーチバルブ(別売、バルブT)を接続することができます。

種類	型式	内径	外径	長さ
CF	F-6CF	6.0	8.3	55
	F-7CF	7.0	9.6	65
	F-7.5CF	7.5	10.3	71
	F-8CF	8.0	11.0	76
	F-8.5CF	8.5	11.6	81
	F-9CF	9.0	12.3	87
	F-10CF	10.0	13.5	97



F-F (カフなし・窓付)

- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の外側についています。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT(標準付属品)、メラスピーチバルブ(別売、バルブT)を接続することができます。

種類	型式	内径	外径	長さ
F	F-6F	6.0	8.3	55
	F-7F	7.0	9.6	65
	F-7.5F	7.5	10.3	71
	F-8F	8.0	11.0	76
	F-8.5F	8.5	11.6	81
	F-9F	9.0	12.3	87
	F-10F	10.0	13.5	97



F-NC (カフ・窓なし)

- F-Fの窓なしタイプです。

種類	型式	内径	外径	長さ
NC	F-6NC	6.0	8.3	55
	F-7NC	7.0	9.6	65
	F-7.5NC	7.5	10.3	71
	F-8NC	8.0	11.0	76
	F-8.5NC	8.5	11.6	81
	F-9NC	9.0	12.3	87
	F-10NC	10.0	13.5	97

■ 関連商品



■ メラスピーチバルブ バルブT
メラスピーチバルブ O2アダプタ

バルブTは高さを抑えた新設計です。吸気時に投与酸素を吸入することができます。

- 商品コード:バルブT /0043201401
- 商品コード:O2アダプタ/0043202101
- 認証番号:224ADBZX00101000



■ 気管切開患者用人工鼻
ソフィットVENT SV-S SV-L SV-LO2 SV-LO2U

SV-Sは高さを低く抑え、新生児から小児向けの専用設計です。

- 商品コード: SV-L /0025606101
- 商品コード: SV-LO2 /0025606201
- 商品コード: SV-LO2U/0025606201
- 商品コード: SV-S /0025606601
- 認証番号:221AABZX00197000



■ メラチューブホルダ (気管切開チューブ用)

新生児から成人まで対応できる3サイズをご用意しました。


- 商品コード:メラチューブホルダ S /0043103401
- 商品コード:メラチューブホルダ M /0043103501
- 商品コード:メラチューブホルダ L /0043103601
- クラス分類:医療用雑品



■ ソフィットカフィンフレータ
VS60HVP, VS60VP, VS100HV, VS100V

カフ内の空気の圧力管理が行えます。

- 商品コード: VS60HVP(フック付) /0043110500
- 商品コード: VS60VP(フック無) /0043110600
- 商品コード: VS100HV(フック付) /0043110300
- 商品コード: VS100V (フック無) /0043110400
- 届出番号:13B1X00078052001

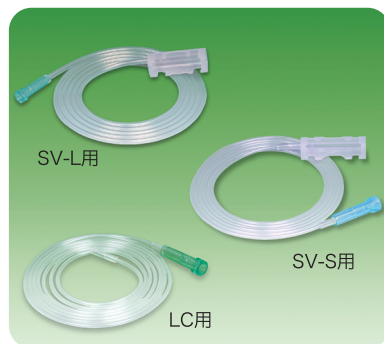

■ メラ酸素供給チューブ

ソフィットVENT専用の酸素供給アタッチメントです。

- 商品コード:VFチューブLC付きアタッチメント (SV-L) /0025632101
- 商品コード:VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S) /0025632501
- 商品コード:VFチューブLC /0025631101
- 認証番号:224ADBZX00097000



■ メラコルゲート内カニューレ

商品コード	型 式	色
0043009601	メラコルゲート内カニューレ 5.5 (7 用)	黄
0043009701	メラコルゲート内カニューレ 6 (7.5 用)	青
0043009801	メラコルゲート内カニューレ 6.5 (8 用)	紫
0043009901	メラコルゲート内カニューレ 7 (8.5 用)	緑
0043010001	メラコルゲート内カニューレ 7.5 (9 用)	橙

- 認証番号:227ADBZX00204000

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先: 本社商品企画 TEL03-3812-3254 FAX03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

注意 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2021/8/500 ●認証番号:222AABZX00087000 ●不許複製 ●A-28 ●F-1 ●BA-0112-08 www.mera.co.jp/

■ コード番号一覧

商品コード	型 式	JAN コード
0043033000	F-6C	04806019605061
0043033100	F-7C	04806019605078
0043033200	F-7.5C	04806019605085
0043033300	F-8C	04806019605092
0043033400	F-8.5C	04806019605108
0043033500	F-9C	04806019605115
0043033600	F-10C	04806019605122
0043033700	F-6CF	04806019605139
0043033800	F-7CF	04806019605146
0043033900	F-7.5CF	04806019605153
0043034000	F-8CF	04806019605160
0043034100	F-8.5CF	04806019605177
0043034200	F-9CF	04806019605184
0043034300	F-10CF	04806019605191
0043034400	F-6CS	04806019605207
0043034500	F-7CS	04806019605214
0043034600	F-7.5CS	04806019605221
0043034700	F-8CS	04806019605238
0043034800	F-8.5CS	04806019605245
0043034900	F-9CS	04806019605252
0043035000	F-10CS	04806019605269
0043035100	F-6CFS	04806019605276
0043035200	F-7CFS	04806019605283
0043035300	F-7.5CFS	04806019605290
0043035400	F-8CFS	04806019605306
0043035500	F-8.5CFS	04806019605313
0043035600	F-9CFS	04806019605320
0043035700	F-10CFS	04806019605337
0043035800	F-6F	04806019605344
0043035900	F-7F	04806019605351
0043036000	F-7.5F	04806019605368
0043036100	F-8F	04806019605375
0043036200	F-8.5F	04806019605382
0043036300	F-9F	04806019605399
0043036400	F-10F	04806019605405
0043036500	F-6NC	04806019605412
0043036600	F-7NC	04806019605429
0043036700	F-7.5NC	04806019605436
0043036800	F-8NC	04806019605443
0043036900	F-8.5NC	04806019605450
0043037000	F-9NC	04806019605467
0043037100	F-10NC	04806019605474



■ ソフィットフレックスショートタイプFS

カニューレの長さを短くしたショートタイプです。チューブの長さを短くして、気管切開孔からの浮き上がりを抑える工夫をしました。(6、7、7.5、8、8.5、9、10の7サイズ) カフ・吸引ライン付です。

- 認証番号:222AABZX00087000

製造業者

MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン