

メラスピーチバルブ (バルブT・O2アダプタ)

MERA Speech Valve

バルブT


カニューレに窓 (Fenestration) がついている気管切開チューブのみに接続ができる誤接続防止安全機構。(メラソフィットクリア、ソフィットフレックス、ソフィットラブ用)

スピーチバルブを使用時に酸素が投与できるO2アダプタを用意しました。



■特長

- ①バルブTは高さを抑えた設計です。
- ②吸気時に投与酸素を吸入することができます。
- ③O2アダプタは360°回転可能。
- ④O2アダプタはバルブLと共用です。

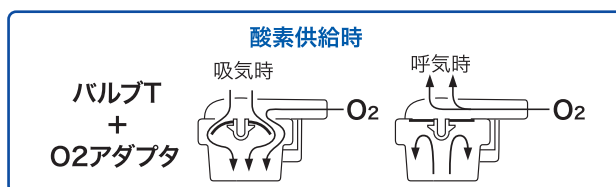

■バルブT+O2アダプタの吸気酸素濃度

(社内データ)

酸素流量 (L/min)	1	2	3	4	5	7	10
酸素濃度 (%)	25	27	30	33	36	41	45

●一回換気量: 500mL ●呼吸回数: 15回/min

※酸素を流すチューブはVFチューブLCを御使用下さい。

商品コード	販売名	型式	包装	EOG滅菌	JANコード
0043201401	メラスピーチバルブ	バルブT	5個/箱	済	14806019607239
0043202101	メラスピーチバルブ	O2アダプタ	5個/箱	済	14806019607253
0025631101	メラ酸素供給チューブ	VFチューブLC	5個/箱	未滅菌	14806019607086

メラスピーチバルブ(バルブL・O2アダプタ)


バルブL

メラソフィット専用スピーチバルブ(誤接続防止安全機構対応品)。
スピーチバルブ使用時に酸素が投与できます(O2アダプタ組合わせ使用時)。



■特長

- ①バルブLは高さを抑えた設計です。(現行製品比25%ダウン)
- ②吸気時に投与酸素を吸入することができます。
- ③O2アダプタは360°回転可能。
- ④O2アダプタはバルブTと共用です。

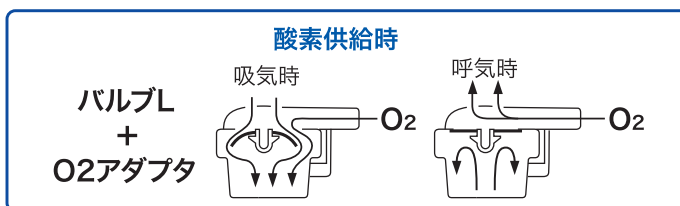

■バルブL+O2アダプタの吸気酸素濃度

(社内データ)

酸素流量(L/min)	1	2	3	4	5	7	10
酸素濃度(%)	25	27	30	33	36	41	45

●一回換気量:500mL ●呼吸回数:15回/min

※酸素を流すチューブはVFチューブLCを御使用下さい。

商品コード	販売名	型式	包装	EOG滅菌	JANコード
0043200301	メラスピーチバルブ	バルブL	5個/箱	済	14806019607215
0043202101	メラスピーチバルブ	O2アダプタ	5個/箱	済	14806019607253
0025631101	メラ酸素供給チューブ	VFチューブLC	5個/箱	未滅菌	14806019607086

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

- 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用ください。
- 本製品は Disposable 製品です。再使用しないでください。
- 本製品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用してください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

- 2016/9月/2000 ●認証番号:224ADBZX00101000/メラ酸素供給チューブ:224ADBZX00097000 ●不許複製
- A-40 ●GR-1 ●BA-0156-02 www.mera.co.jp/