

# ソフィットラブ (1重管:ラブP、ラブN)

Tracheostomy Tube MERA SOFIT LOVE



# Sofit LOVE

気管切開チューブ ソフィットラブ（新生児・小児用）

カフ付き、窓付きのバリエーションを  
充実しました。患者様の成長に合った  
タイプをお選びください。



## 豊富なバリエーション 全55タイプ

- 最小サイズ：内径2.5mm
- 最大サイズ：内径6.5mm

|      |          | 型式      | サイズ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|------|----------|---------|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 新生児用 | カフ・窓なし   | ラブN     |     | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   |   |     |
|      | 窓付       | ラブNF    |     | ※   | ○ | ○   | ○ | ※   | ※ | ※   |   |     |
| 小児用  | カフ・窓なし   | ラブP     |     | ※   | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   |
|      | 窓付       | ラブPF    |     |     | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   |
|      | カフ付      | ラブPC    |     |     |   |     | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   |
|      | カフ・吸引付   | ラブPC-S  |     |     |   |     | ○ | ○   | ○ | ○   | ○ | ○   |
|      | カフ・窓付    | ラブPCF   |     |     |   |     | ※ | ※   | ○ | ○   | ○ | ○   |
|      | カフ・窓・吸引付 | ラブPCF-S |     |     |   |     | ※ | ※   | ○ | ○   | ○ | ○   |

## わかりやすい型式表示

**P**：小児用  
(Pediatric)

**C**：カフ  
(Cuff)

**N**：新生児用  
(Neonate)

**F**：窓  
(Fenestration)

**S**：吸引  
(Suction)

※受注生産対応品

## ■ソフトなネックプレート

- 新生児用：ラブNシリーズ
- 小児用：ラブPシリーズ

※患者の皮膚に優しくフィット。  
固定用テープ通し穴は大きくし、強度を  
高めました




## ■小児専用の柔軟なカフ

カフ「C」付き  
4～6.5mm  
6サイズ  
24タイプ



## ■気管吸引カテテルの飛び出し 軽減を考慮した設計 (3穴)

窓「F」付き  
3～6.5mm  
8サイズ  
27タイプ

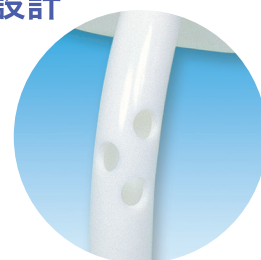


## ■窓付きタイプはスピーチバルブ (バルブT)接続可 (誤接続防止機構)

スピーチバルブを接続し、声を出すトレーニングができます。O2アダプタは発声中に酸素を供給することができます。  
窓がないものにはバルブの装着ができない安全設計 (FAIL SAFE) が施されています。




※15mmコネクタ上縁部は説明のため着色(黄色)しています。

●窓付タイプ

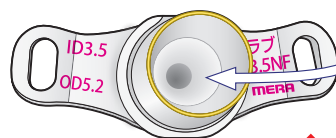


バルブT

●窓なしタイプ

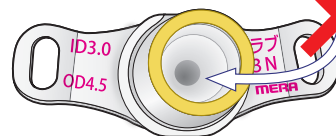


## ■新設計 15mm コネクタ


15mmコネクタの内腔を大きくしました。  
ノーマンエルボコネクタ接続時の閉塞リスクの軽減。  
継ぎ目のないコネクタ外周により、人工鼻等の接続が  
容易になりました。

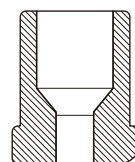

例：ラブ5P

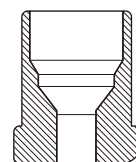


例：ラブ5PF

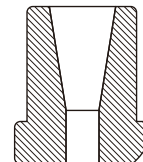

例：5P(従来品)

## ■スタイレット(標準付属品)

- 色付きスタイレットで抜き忘れ注意喚起
- 挿入性と、カニューレ内腔の閉塞軽減の両立を  
考慮した先端部形状。(独自の非対称十字形状)

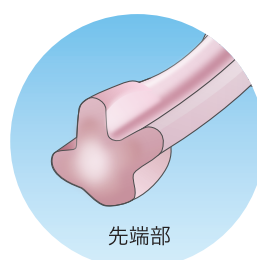

先端部



## ラブN ●カフ・窓なし

大きく、強度が高いテープ通し穴形状。  
カニューレサイズは2.5mmから用意しました。


| 型式     | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|--------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ2.5N | 2.5      | 3.9      | 28         | —     |
| ラブ3N   | 3.0      | 4.5      | 30         | —     |
| ラブ3.5N | 3.5      | 5.2      | 32         | —     |
| ラブ4N   | 4.0      | 5.9      | 34         | —     |
| ラブ4.5N | 4.5      | 6.5      | 38         | —     |
| ラブ5N   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5N | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |



## ラブNF ●カフなし・窓付

カニューレに発声のための窓が開いています。  
窓は気管吸引カテーテルが飛び出しにくい多孔型形状です。  
スピーチバルブ(バルブT)の装着ができる15mmのコネクタ採用。

| 型式      | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|---------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ2.5NF | 2.5      | 3.9      | 28         | ※     |
| ラブ3NF   | 3.0      | 4.5      | 30         | —     |
| ラブ3.5NF | 3.5      | 5.2      | 32         | —     |
| ラブ4NF   | 4.0      | 5.9      | 34         | —     |
| ラブ4.5NF | 4.5      | 6.5      | 38         | ※     |
| ラブ5NF   | 5.0      | 7.1      | 44         | ※     |
| ラブ5.5NF | 5.5      | 7.7      | 46         | ※     |

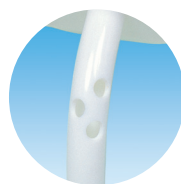

## ラブP ●カフ・窓なし

大きく、強度が高いテープ通し穴形状。  
カニューレサイズは2.5mmから用意しました。

| 型式     | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|--------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ2.5P | 2.5      | 3.9      | 28         | ※     |
| ラブ3P   | 3.0      | 4.5      | 39         | —     |
| ラブ3.5P | 3.5      | 5.2      | 40         | —     |
| ラブ4P   | 4.0      | 5.9      | 41         | —     |
| ラブ4.5P | 4.5      | 6.5      | 42         | —     |
| ラブ5P   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5P | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6P   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5P | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ラブPF ●カフなし・窓付

カニューレに発声のための窓が開いています。  
窓は気管吸引カテーテルが飛び出しにくい多孔型形状です。  
スピーチバルブ(バルブT)の装着ができる15mmのコネクタ採用。

| 型式      | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|---------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ3PF   | 3.0      | 4.5      | 39         | —     |
| ラブ3.5PF | 3.5      | 5.2      | 40         | —     |
| ラブ4PF   | 4.0      | 5.9      | 41         | —     |
| ラブ4.5PF | 4.5      | 6.5      | 42         | —     |
| ラブ5PF   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5PF | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6PF   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5PF | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ラブPC ●カフ付

小児専用設計のカフを採用。  
カニューレサイズは4～6.5mmを用意しました。

| 型式      | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|---------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ4PC   | 4.0      | 5.9      | 41         | —     |
| ラブ4.5PC | 4.5      | 6.5      | 42         | —     |
| ラブ5PC   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5PC | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6PC   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5PC | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ラブPC-S ●カフ・吸引付

カフ上部の吸引ライン付き

| 型式        | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|-----------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ4PC-S   | 4.0      | 5.9      | 41         | —     |
| ラブ4.5PC-S | 4.5      | 6.5      | 42         | —     |
| ラブ5PC-S   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5PC-S | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6PC-S   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5PC-S | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ラブPCF ●カフ・窓付

カフと発声用の窓が付いています。  
スピーチバルブ(バルブT)の装着ができる15mmのコネクタ採用。

| 型式       | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|----------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ4PCF   | 4.0      | 5.9      | 41         | ※     |
| ラブ4.5PCF | 4.5      | 6.5      | 42         | ※     |
| ラブ5PCF   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5PCF | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6PCF   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5PCF | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ラブPCF-S ●カフ・窓・吸引付

カフ上部吸引ラインが付いた窓付きカニューレ。  
スピーチバルブ(バルブT)の装着ができる15mmのコネクタ採用。

| 型式         | カニューレの内径 | カニューレの外径 | カニューレ中心の長さ | 受注生産品 |
|------------|----------|----------|------------|-------|
| ラブ4PCF-S   | 4.0      | 5.9      | 41         | ※     |
| ラブ4.5PCF-S | 4.5      | 6.5      | 42         | ※     |
| ラブ5PCF-S   | 5.0      | 7.1      | 44         | —     |
| ラブ5.5PCF-S | 5.5      | 7.7      | 46         | —     |
| ラブ6PCF-S   | 6.0      | 8.3      | 52         | —     |
| ラブ6.5PCF-S | 6.5      | 9.0      | 58         | —     |



## ■カスタムスタイレット



特注製作品の受注時に選択的に付属することができます。

仕様を変更したカニューレ（長さ変更、角度変更）で標準スタイレットでは合わない時にご使用できます。

カニューレ挿入時に最適な形状にスタイレットを曲げることで安全な気管挿入が可能になります。



スタイレット先端の突出量はストッパーの位置で調整できます。

標準仕様の角度（カーブ）は110°前後で挿入はスムーズに行えます。

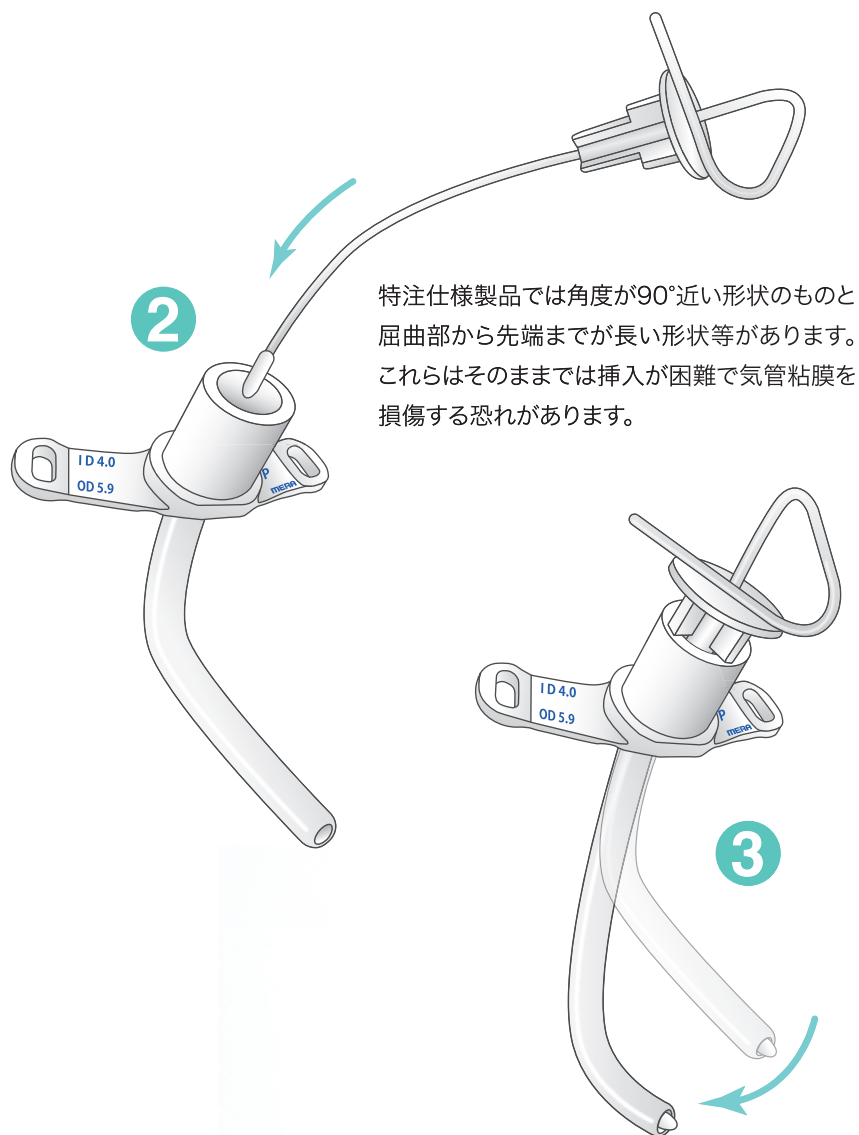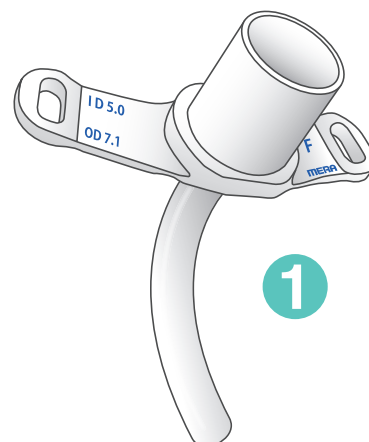

特注仕様製品では角度が90°近い形状のものと屈曲部から先端までが長い形状等があります。これらはそのままでは挿入が困難で気管粘膜を損傷する恐れがあります。

このような場合にカスタムスタイレットを使用し、カニューレ形状を挿入し易い形状に形づくることで、挿入時のリスクを軽減することができます。

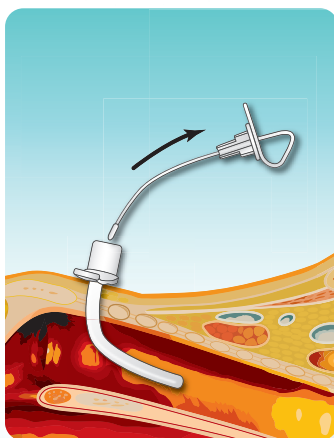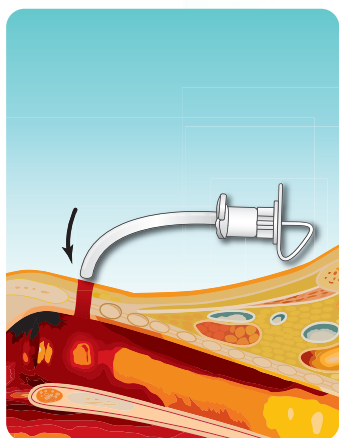

## 関連製品



■メラスピーチバルブ (バルブT、O2アダプタ)



■ソフィットベント (SV-S、SV-L、SV-LO2、SV-LO2U)



■メラ酸素供給チューブ (O2アタッチメント)

※詳細は個別カタログをご参照ください。



■ソフィットベント BabyO2



製造販売業者



埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL03-3812-3254 FAX03-3812-4613

製造業者: MERASENKO CORPORATION 国名: フィリピン

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 札幌支店    | 〒060-0031 札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階<br>TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721 |
| 東北支店    | 〒982-0014 仙台市太白区大野田4-9-6<br>TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820                       |
| 青森営業所   | 〒030-0919 青森市はまなす2-16-15<br>TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137                       |
| 盛岡連絡事務所 | 〒020-0834 岩手県盛岡市永井22地割3-130 コーポ芳本102<br>TEL.019-601-4622 FAX.019-601-4623           |
| 福島連絡事務所 | 〒960-0112 福島市南矢野目字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階<br>TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602          |
| 関東支店    | 〒331-0062 さいたま市西区土屋584-2 指扇駅前ビル1階<br>TEL.048-623-1530 FAX.048-623-1531              |
| 松本営業所   | 〒399-0007 松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号<br>TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367                  |
| 新潟連絡事務所 | 〒950-2028 新潟市西区小新南1-2-7 ウエルズ小新C号室<br>TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105              |
| 東京支店    | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル4階<br>TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332             |
| つくば営業所  | 〒305-0821 つくば春日3-5-20<br>TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175                          |
| 横浜営業所   | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F<br>TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859            |
| 中部支店    | 〒460-0022 名古屋市中区金山1-1-15<br>TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862                       |
| 静岡営業所   | 〒422-8005 静岡市駿河区池田59-1<br>TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082                         |
| 金沢営業所   | 〒920-0057 金沢市桜田町2-87<br>TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727                           |
| 関西支店    | 〒540-0005 大阪市中央区上町1-24-2<br>TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040                       |
| 中四国支店   | 〒760-0077 広島市安佐南区西原1-3-8<br>TEL.082-850-1680 FAX.082-871-2370                       |
| 岡山営業所   | 〒701-0205 岡山市南区妹尾2355-1<br>TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073                        |
| 四国連絡事務所 | 〒760-0077 高松市上福岡町816-1 マルエイビルIIビル<br>TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150              |
| 九州支店    | 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-1-14<br>TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325                     |
| 南九州営業所  | 〒890-0055 鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103<br>TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789               |

## ■商品コード一覧表

| 商品名              | コード番号      | 受注生産 |
|------------------|------------|------|
| ソフィットラブ 2.5N     | 0043046100 |      |
| ソフィットラブ 3N       | 0043046200 |      |
| ソフィットラブ 3.5N     | 0043046300 |      |
| ソフィットラブ 4N       | 0043046400 |      |
| ソフィットラブ 4.5N     | 0043046500 |      |
| ソフィットラブ 5N       | 0043046600 |      |
| ソフィットラブ 5.5N     | 0043046700 |      |
| ソフィットラブ 2.5NF    | 0043046800 | ※    |
| ソフィットラブ 3NF      | 0043046900 |      |
| ソフィットラブ 3.5NF    | 0043047000 |      |
| ソフィットラブ 4NF      | 0043047100 |      |
| ソフィットラブ 4.5NF    | 0043047200 | ※    |
| ソフィットラブ 5NF      | 0043047300 | ※    |
| ソフィットラブ 5.5NF    | 0043047400 | ※    |
| ソフィットラブ 2.5P     | 0043047500 | ※    |
| ソフィットラブ 3P       | 0043047600 |      |
| ソフィットラブ 3.5P     | 0043047700 |      |
| ソフィットラブ 4P       | 0043047800 |      |
| ソフィットラブ 4.5P     | 0043047900 |      |
| ソフィットラブ 5P       | 0043048000 |      |
| ソフィットラブ 5.5P     | 0043048100 |      |
| ソフィットラブ 6P       | 0043048200 |      |
| ソフィットラブ 6.5P     | 0043048300 |      |
| ソフィットラブ 3PF      | 0043048400 |      |
| ソフィットラブ 3.5PF    | 0043048500 |      |
| ソフィットラブ 4PF      | 0043048600 |      |
| ソフィットラブ 4.5PF    | 0043048700 |      |
| ソフィットラブ 5PF      | 0043048800 |      |
| ソフィットラブ 5.5PF    | 0043048900 |      |
| ソフィットラブ 6PF      | 0043049000 |      |
| ソフィットラブ 6.5PF    | 0043049100 |      |
| ソフィットラブ 4PC      | 0043049200 |      |
| ソフィットラブ 4.5PC    | 0043049300 |      |
| ソフィットラブ 5PC      | 0043049400 |      |
| ソフィットラブ 5.5PC    | 0043049500 |      |
| ソフィットラブ 6PC      | 0043049600 |      |
| ソフィットラブ 6.5PC    | 0043049700 |      |
| ソフィットラブ 4PC-S    | 0043049800 |      |
| ソフィットラブ 4.5PC-S  | 0043049900 |      |
| ソフィットラブ 5PC-S    | 0043050000 |      |
| ソフィットラブ 5.5PC-S  | 0043050100 |      |
| ソフィットラブ 6PC-S    | 0043050200 |      |
| ソフィットラブ 6.5PC-S  | 0043050300 |      |
| ソフィットラブ 4PCF     | 0043050400 | ※    |
| ソフィットラブ 4.5PCF   | 0043050500 | ※    |
| ソフィットラブ 5PCF     | 0043050600 |      |
| ソフィットラブ 5.5PCF   | 0043050700 |      |
| ソフィットラブ 6PCF     | 0043050800 |      |
| ソフィットラブ 6.5PCF   | 0043050900 |      |
| ソフィットラブ 4PCF-S   | 0043051000 | ※    |
| ソフィットラブ 4.5PCF-S | 0043051100 | ※    |
| ソフィットラブ 5PCF-S   | 0043051200 |      |
| ソフィットラブ 5.5PCF-S | 0043051300 |      |
| ソフィットラブ 6PCF-S   | 0043051400 |      |
| ソフィットラブ 6.5PCF-S | 0043051500 |      |

### 注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●管理医療機器 ●一般的名称: 単回使用気管切開チューブ ●認証番号: 225ADBZX00069000

●2021/6月/500 ●不許複製 ●F-1 ●A-62 ●BA-0224-03 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)