

# ソフィットフレックス

Tracheostomy Tube FLEX Short Type


(一重管) ショートタイプ



# ソフィットフレックス (一重管)ショートタイプ

## 特長

- ネックプレート直下のカニューレの長さを短くして、気管切開孔からの浮き上がりを抑える工夫をしています。
- 吸引ラインがカニューレの壁に内蔵されているので、気管切開孔への刺激を低減します。
- 吸引ラインの開口部は仰臥位での吸引に適した位置に設けています。(カニューレ湾曲の外側・気管後壁側)
- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の側面に配置しています。

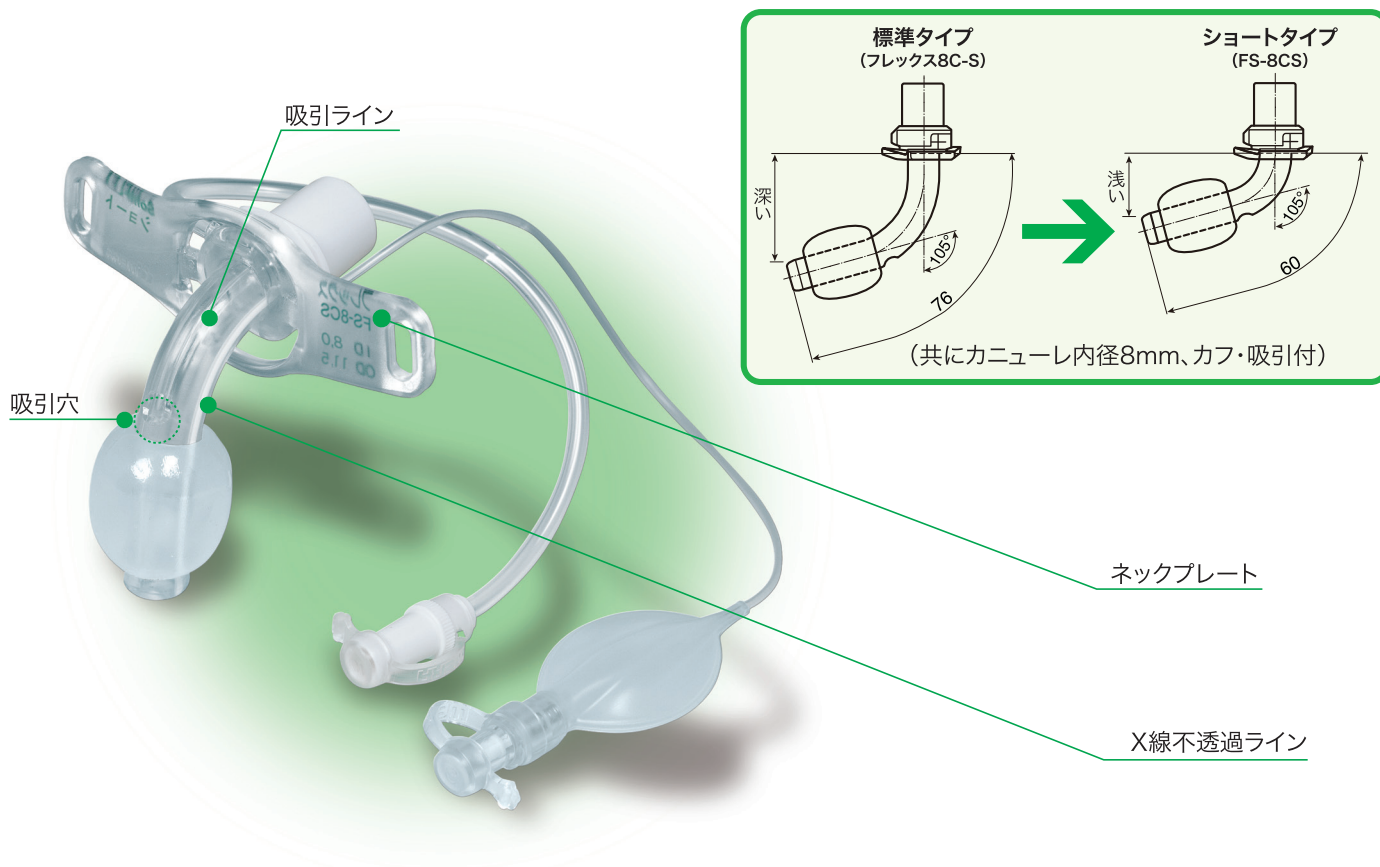

商品コード	JANコード	販売名	型式	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	標準品との差 (mm)
0043043300	04806019610027	ソフィットフレックス	FS-6CS (カフ・吸引付)	6.0	9.0	47	-8
0043043400	04806019610034	ソフィットフレックス	FS-7CS (カフ・吸引付)	7.0	10.5	53	-12
0043043500	04806019610041	ソフィットフレックス	FS-7.5CS (カフ・吸引付)	7.5	11.0	57	-14
0043043600	04806019610058	ソフィットフレックス	FS-8CS (カフ・吸引付)	8.0	11.5	60	-16
0043043700	04806019610065	ソフィットフレックス	FS-8.5CS (カフ・吸引付)	8.5	12.1	63	-18
0043043800	04806019610072	ソフィットフレックス	FS-9CS (カフ・吸引付)	9.0	12.7	66	-21
0043043900	04806019610089	ソフィットフレックス	FS-10CS (カフ・吸引付)	10.0	13.9	68	-29

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

製造業者

**MERASENKO CORPORATION** 国名:フィリピン

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

**注意**

ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

● 2016/7月/3000 ● 認証番号: 222AABZX00087000 ● クラス分類: II ● 不許複製 ● A-80 ● S-2 ● BA-0263-01

[www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)