


コラートBP センサーバルーン P2

CORART BP Sensor Balloon P2

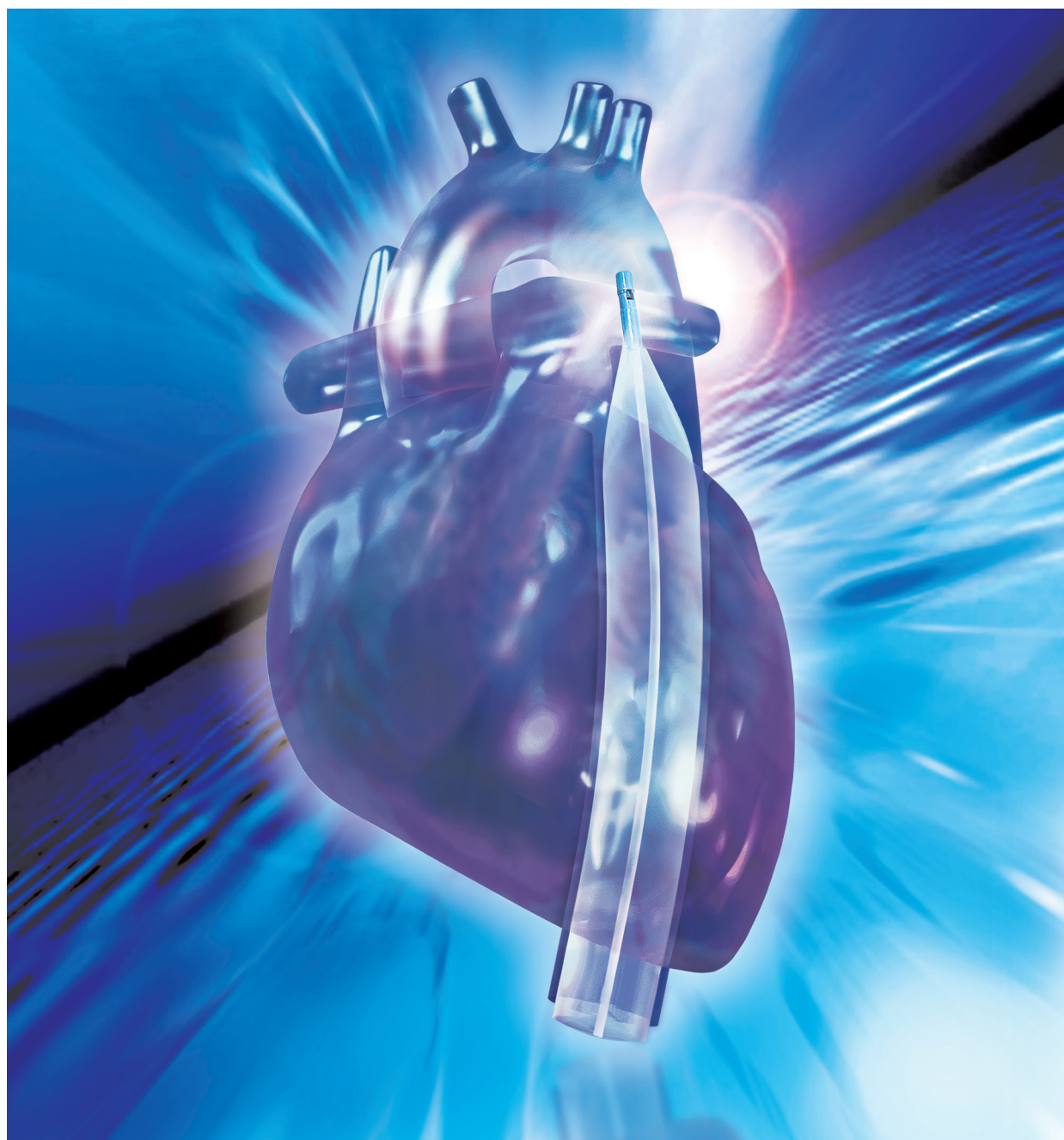


8Fr with Sensor

8Frバルーン先端に血圧センサーを内蔵。

センサー内蔵型バルーンの更なる進化！半導体血圧センサーを8Frバルーン先端に内蔵。

バルーンを体内に挿入するだけで遅れや歪みのない動脈圧波形を示します。また、IABP駆動装置 corart BPシリーズとの組み合わせで、INF・DEFのタイミングを自動調整するセンサーオート駆動が行えます。

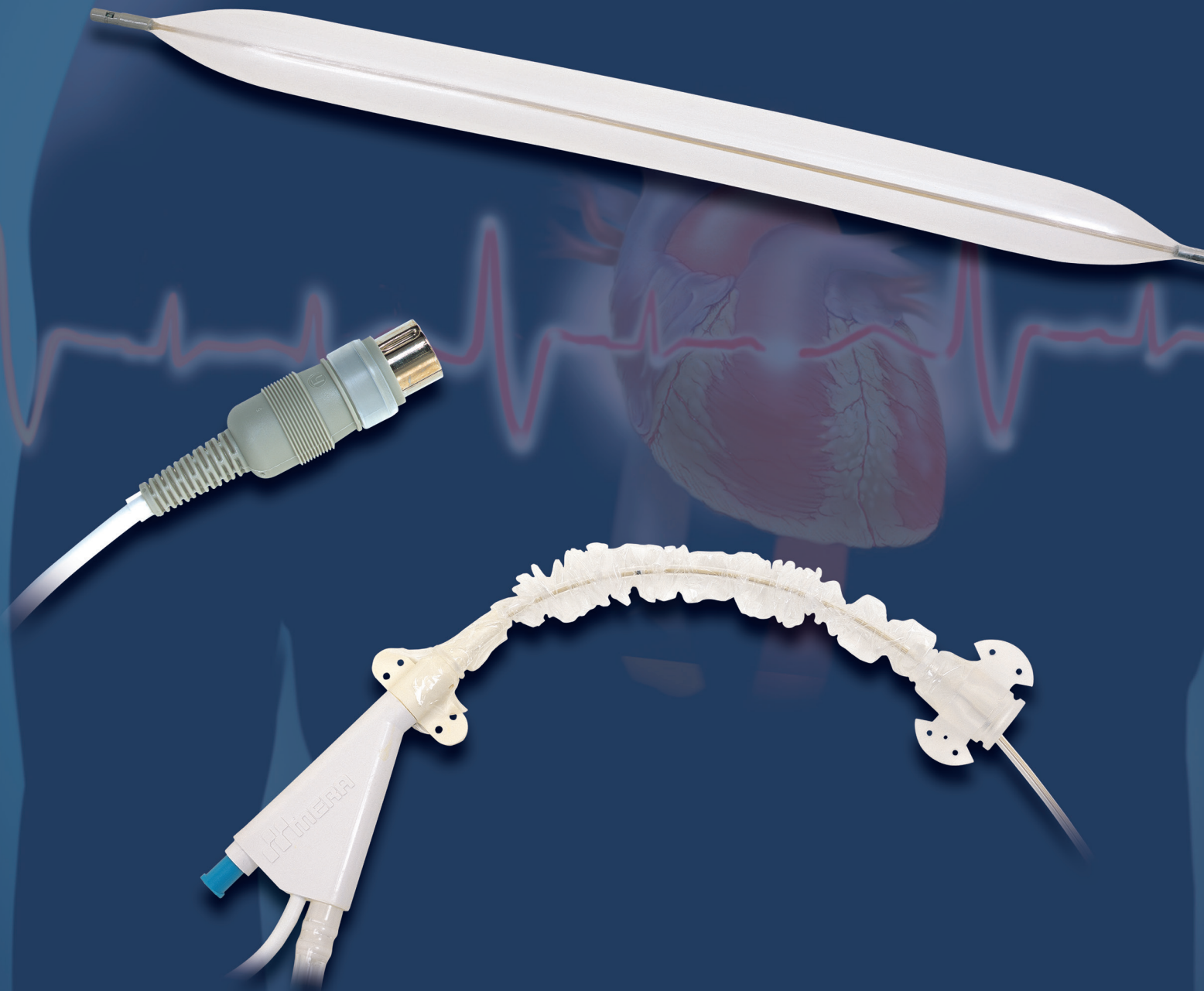


Convenient

挿入だけで動脈圧情報が入手できる


動脈圧ラインの準備や取り付けをすることなく、バルーンセンサーコネクタを装置に接続するだけで、即座に動脈圧波形が表示できます。

バルーン先端圧と測定部位による動脈圧波形の比較

1. バルーン先端圧センサー：バルーンルーメン（液体充填回路）

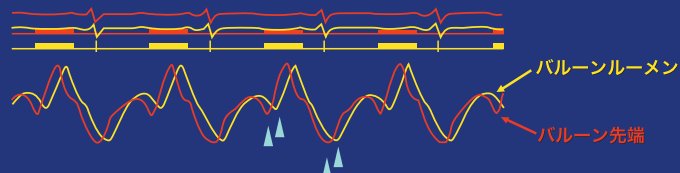

2. バルーン先端圧センサー：撓骨動脈（液体充填回路）

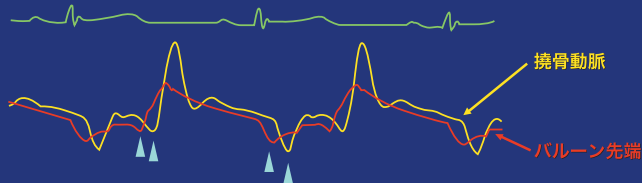

Pure Expression

振動時のノイズを軽減

通常の圧トランスデューサーでみられるような、振動によるノイズを軽減します。移動や体動、清拭時において安定したECG信号が入力できないような場合に有効です。

強いバルーン膜

優れた膜素材と独自の成形技術により磨耗に強いバルーン膜を実現しました。

カテ落ちを抑制


セントラルルーメンチューブに宇宙船や航空機にも使用されている高強度・高剛性のスーパーエンブラを採用しました。バルーン膜ラプチャーや腎血流量低下の原因となるカテ落ちを抑制します。

オートマチック駆動が可能

IABP駆動装置corart BPシリーズと組み合わせればINF・DEFのタイミングを装置が自動調整するオートマチック駆動が可能となり、IABP管理の負担を軽減できます。

血圧センサー内臓で8Fr.

バルーンの応答スピードを確保し、8Frダブルルーメンに血圧センサーを組み込みました。

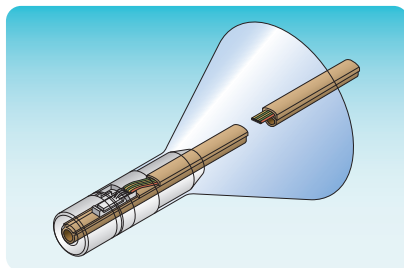

IABP駆動装置 コラート BP3

仕 様

販 売 名	コラートBP センサーバルーン P2		
製 品 名	コラートBP センサーバルーン P2		
商 品 コード	0212022000	0212022100	0212022200
バルーン容量	30mL	35mL	40mL
カテテルサイズ	8Fr		
ル ー メ ン	ダブル		
カテテル長さ	690mm		
カテテル材質	医療用ポリウレタン		
バルーン膜外径	15mm	15mm	15mm
バルーン膜全長	195mm	225mm	245mm
バルーン膜材質	医療用ポリウレタン		
ガイドワイヤー(バルーン用)	0.021inch 150cm J型 マンドレルタイプ		
ガイドワイヤー(シース用)	0.035inch 45cm J型 スプリングタイプ		
シ ー ス 径	8Fr		
シ ー ス 長	11cm		
ダ イ レ ー タ ー 径	8Fr		
保険請求名			
分 野 名	バルーンパンピング用バルーンカテテル		
機 能 区 分	一般用センサー内蔵型		
承 認 番 号	21400BZZ00104000		

製造販売業者



埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

札幌支店

〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階
TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721

東北支店

〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田4-9-6
TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820

青森営業所

〒030-0919 青森県青森市はまなす2-16-15
TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137

盛岡連絡事務所

〒020-0834 岩手県盛岡市永井22地割3-130 コーポ芳本102
TEL.019-601-4622 FAX.019-601-4623

福島連絡事務所

〒960-0112 福島県福島市南矢野日字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階
TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602

関東支店

〒344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2-10-1
TEL.048-761-0521 FAX.048-761-0527

松本営業所

〒399-0007 長野県松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号
TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367

新潟連絡事務所

〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-7 ウェルズ小新C号室
TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル4階
TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332

つくば営業所

〒305-0821 茨城県つくば市春日3-5-20
TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175

横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F
TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859

中部支店

〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-1-15
TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862

静岡営業所

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田59-1
TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082

金沢営業所

〒920-0057 石川県金沢市桜田町2-87
TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727

関西支店

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2
TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040

中四国支店

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-3-8
TEL.082-850-1680 FAX.082-871-2370

岡山営業所

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2355-1
TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073

四国連絡事務所

〒760-0078 香川県高松市今里町2-6-1
TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150

九州支店

〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町1-1-14
TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325

鹿児島営業所

〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103
TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2020/8月/1000 ●不許複製 ●承認番号:21400BZZ00104000 ●S-3 ●D-27 ●BH-0074-02

www.mera.co.jp/