


# メラバブルトラップ(NS)


## HBT-L1-B/HBT-C1-B(バブルガード)

### MERA BUBBLE TRAP FILTER

- メラバブルトラップは気泡のトラップ能力が高く低プライミングです。
- 取り扱い、セットアップが簡単で、プライミングがスムーズに行えます。
- 視認性が良いオールクリアハウジングですので、どの角度からでも状況を確認できます。

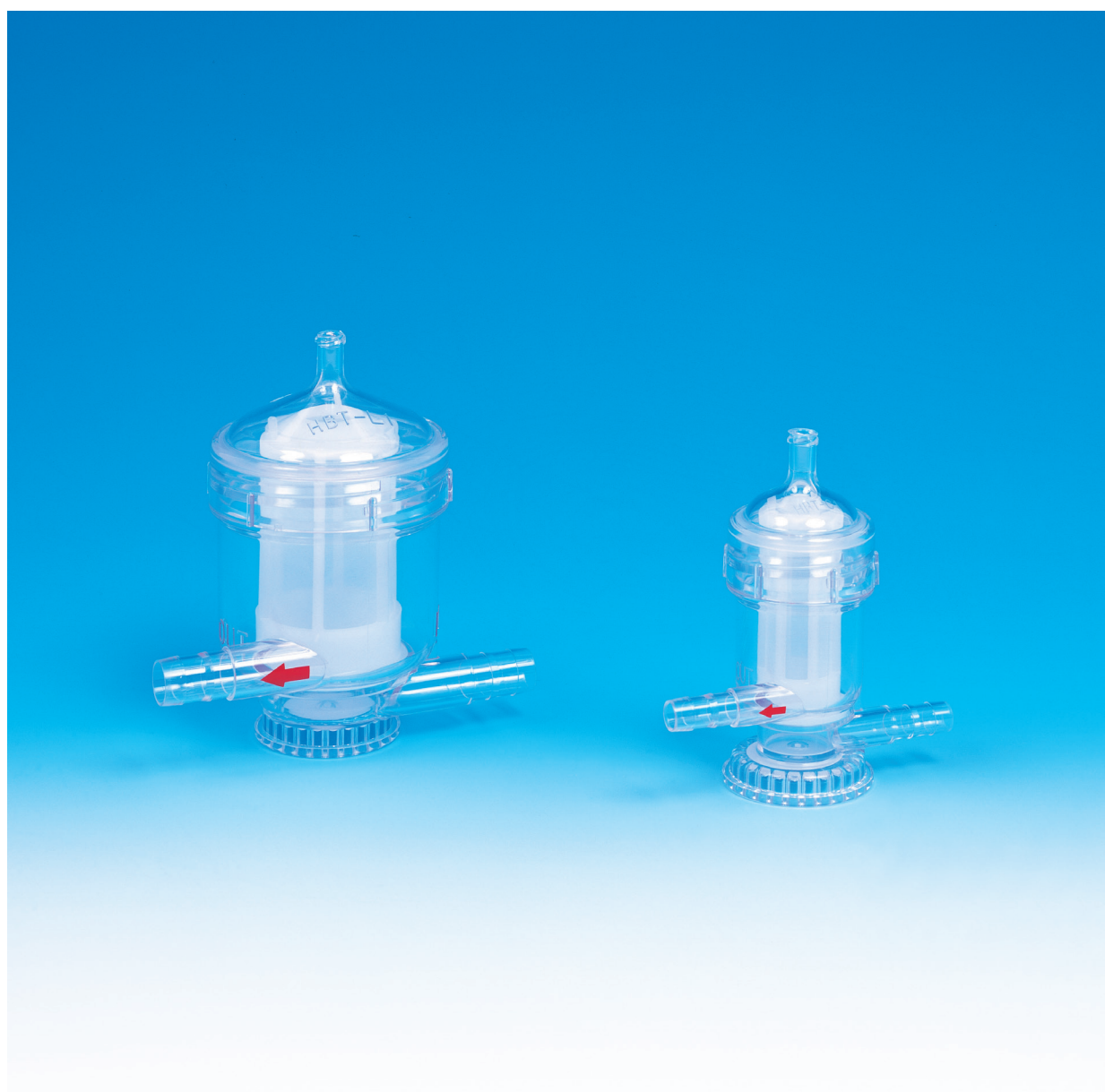


# メラバブルトラップ(NS) HBT-L1-B/HBT-C1-B(バブルガード)

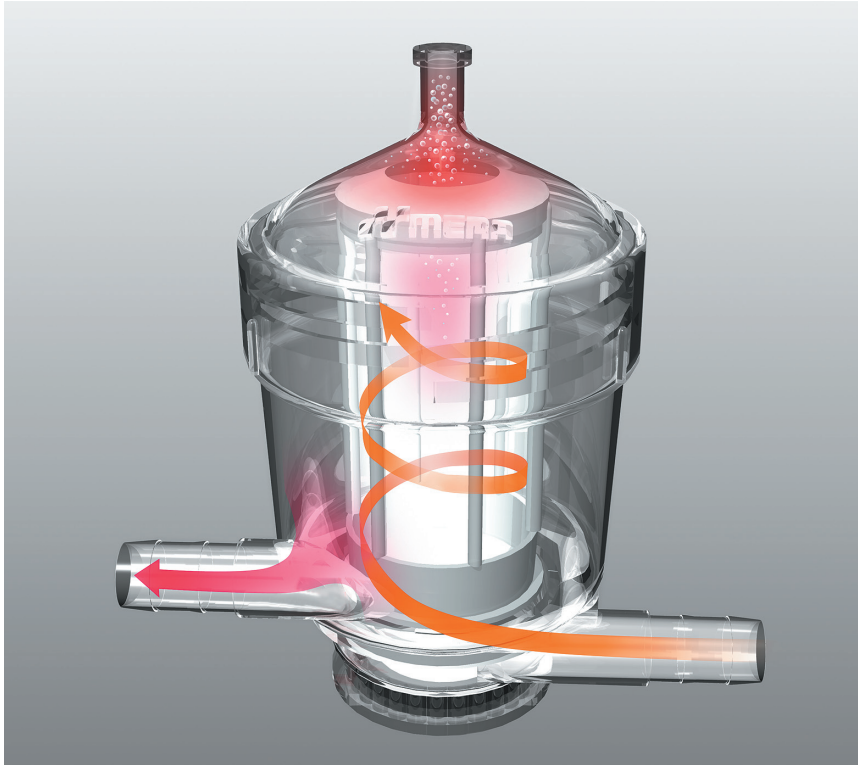

## ■特長

- 低プライミングボリュームです。
- 視認性の良いオールクリアハウジングなのでどの角度からでも状態を確認できます。
- 取り扱いが簡単でプライミングがスムーズです。
- 気泡除去能に優れたラインフィルターです。
- 入口ポートと出口ポートが横方向になっている為、縦方向のものに比べ血液回路が短くなります。


(下図参照)

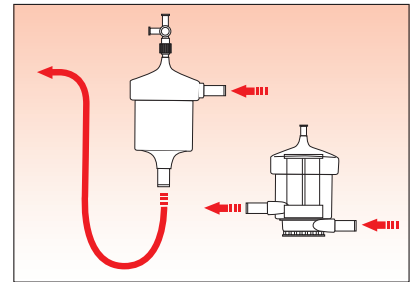

仕様	HBT-L1-B	HBT-C1-B
最大流量	7L/min	2.5L/min
プライミングボリューム	125mL	28mL
圧力損失	1.3kPa(10mmHg)(4L/minの時)	3.7kPa(28mmHg)(2L/minの時)
最大使用圧力	98kPa(735mmHg)	98kPa(735mmHg)
ハウジング材料	ポリカーボネイト	ポリカーボネイト
フィルター材料	ポリエステル	ポリエステル
外形寸法	外径60mm×高さ100mm	外径35mm×高さ83mm
入口ポート	3/8"(タケノコ形状)	1/4"(タケノコ形状)
出口ポート	3/8"(タケノコ形状)	1/4"(タケノコ形状)
ペントポート	ルアーロックメス	ルアーロックメス


## 仕様 HBT-2(ホルダー)

重量	530g
取付可能範囲	φ25mm～φ42mm

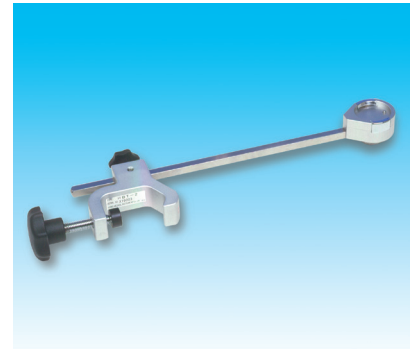

## ■ホルダー

- ワンタッチで簡単に脱着ができます。
- 軽量なので、取扱いが容易です。
- ホルダーが本体の視野を妨げない構造です。

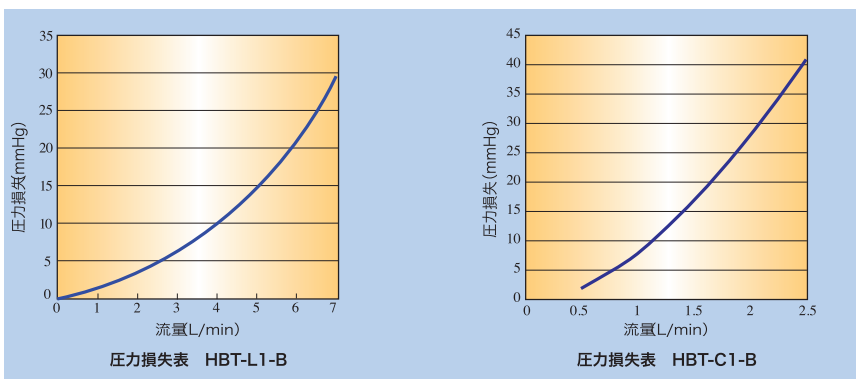

販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

**注意**

実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2018/7/500 ●承認番号: 21200BZZ00151000 ●不許複製 ●GR-1 ●D-40 [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)