


Accurate Pencil

電気メス用モノポーラペンシル



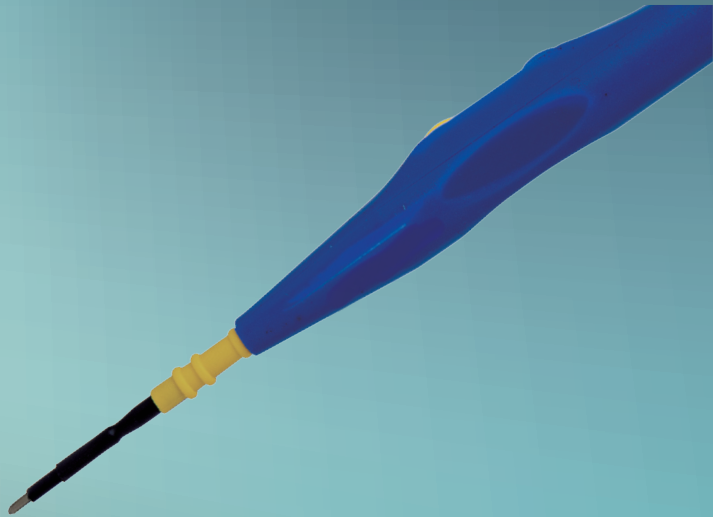

術者の手にフィットする
エルゴノミックデザイン

手元から先端までが短く
安定感のある操作性



角度を問わず軽い力で押せる
凹型楕円形状のボタン


電気メスから抜きやすい
コネクター形状



Accurate Pencil

ボタンスイッチ付アクティブハンドル

単回使用製品

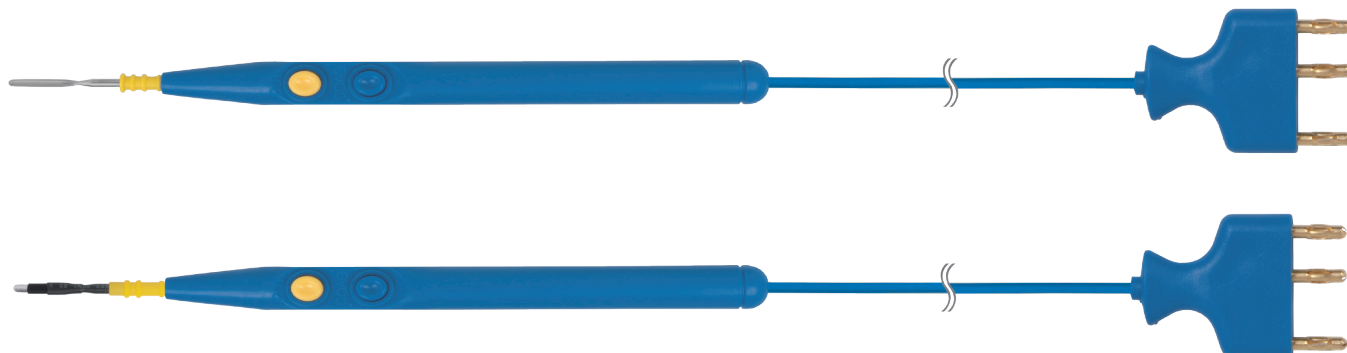


- コーティングタイプは焦げ付きの付着による切れ味の低下を抑えます。
汚れが付着した場合は濡れたガーゼなどで軽く拭き上げてください。
簡単な拭き取りで切れ味を維持できるため、術者のストレスが軽減されます。
- 深部用タイプは先端以外の電極部が絶縁被膜で覆われています。
術部周辺組織への無用な焼灼を防ぐため、深い術部での手技に有用です。
- 各種においてホルスター同梱の有無を選択できます。

商品コード	JANコード	規格/型式	コーティング	深部用	ホルスター
0120202201	4544753139595	SW12200 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm 3mケーブル			
0120202301	4544753139601	SW12200-B02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm ホルスター付 3mケーブル			○
0120203201	4544753136112	SW12200-D02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング 3mケーブル	○		
0120202601	4544753139632	SW12200-J08 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング ホルスター付 3mケーブル	○		○
0120203301	4544753136129	SW12200-J09 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 3mケーブル		○	
0120203401	4544753136136	SW12200-J11 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル		○	○
0120203501	4544753136143	SW12200-J10 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 3mケーブル	○	○	
0120203601	4544753136150	SW12200-J07 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル	○	○	○

アクティブ電極

単回使用製品

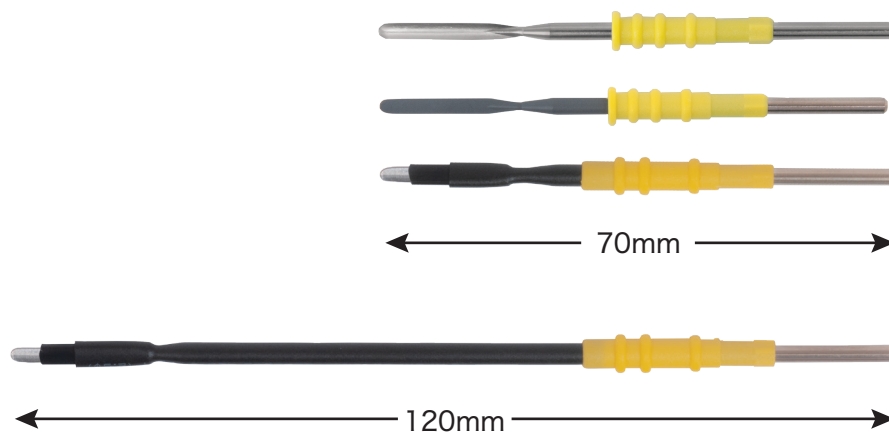

■コーティングや深部用被覆の有無のバリエーションから最適なものをご選択いただけます。

■単品のアクティブ電極では、全長120mmの長尺タイプもご用意しております。
より深い術部での手技に有用です。

商品コード	JANコード	規格/型式	コーティング	深部用	長尺
0120308501	4544753139540	SW130701256S メス先電極 平 70mm			
0120308201	4544753139519	SW130701150S メス先電極 平 70mm コーティング	○		
0120308701	4544753136167	SW130701257S メス先電極 平 4mm/70mm 深部用2層		○	
0120308801	4544753136174	SW130701152S メス先電極 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層	○	○	
0120308901	4544753136181	SW131201258S メス先電極 平 4mm/120mm 深部用2層		○	○
0120309001	4544753136198	SW131201154S メス先電極 平 4mm/120mm コーティング 深部用2層	○	○	○

ホルスター

単回使用製品



■術中の電気メス用モノポーラペンシルの収納に便利なホルスターです。

■ドレープをスロットに通すことで簡単に固定できます。



SOLID & UNIQUE

仕様

商品コード	JANコード	販売名	規格/型式		包装 (数量)	認証番号
0120202201	4544753139595	アキュレートペンシル	SW12200	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm 3mケーブル	25本/箱	302ADBZX00104000
0120202301	4544753139601		SW12200-B02	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm ホルスター付 3mケーブル		
0120203201	4544753136112		SW12200-D02	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング 3mケーブル		
0120202601	4544753139632		SW12200-J08	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング ホルスター付 3mケーブル		
0120203301	4544753136129		SW12200-J09	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 3mケーブル		
0120203401	4544753136136		SW12200-J11	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル		
0120203501	4544753136143		SW12200-J10	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 3mケーブル		
0120203601	4544753136150		SW12200-J07	ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル		
0120308501	4544753139540		SW130701256S	メス先電極 平 70mm	50本/箱	
0120308201	4544753139519		SW130701150S	メス先電極 平 70mm コーティング		
0120308701	4544753136167		SW130701257S	メス先電極 平 4mm/70mm 深部用2層		
0120308801	4544753136174		SW130701152S	メス先電極 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層		
0120308901	4544753136181		SW131201258S	メス先電極 平 4mm/120mm 深部用2層		
0120309001	4544753136198		SW131201154S	メス先電極 平 4mm/120mm コーティング 深部用2層		
0120900001	4544753139403	SW1000104A	ホルスター	50個/箱		

製造業者



SHINING WORLD HEALTH CARE CO., LTD.

製造販売業者



泉工医科工業株式会社

<https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 本社商品企画 TEL 03-4283-1005

注意 実際のお取り扱いの際には電子添文をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2025/11月/1000 ●不許複製 ●GR-1 ●B-113 ●BO-0451-04

お問い合わせ

