

Kochab

メラ吸入麻酔システム



「こんな麻酔器が欲しかった」を
形にしました！

できるだけ
小さくしてほしい

Compact

簡単に
移動
させたい

Easy



シンプルで
使いやすい

Simple

最低限の安全装置は
備わっていてほしい

Safety

コカブ

Kochabは、麻酔器としての基本的な機能は盛り込みつつ、
シンプル、コンパクトさを追求しました。
その中でも、使いやすさを考慮したデザインとなっています。

専用の架台を搭載することでより使いやすくなります。

麻酔用人工呼吸器(メラ麻酔用ベンチレータ Minoris)の有無を選択できます。




●本体+Kochab-D(引出し付架台)

Minorisを搭載しない場合、オプションのKochab-Dをご選択ください。



●本体+Kochab-S(ベンチレータ搭載用架台)

Minorisを搭載する場合、オプションのKochab-Sをご選択ください。

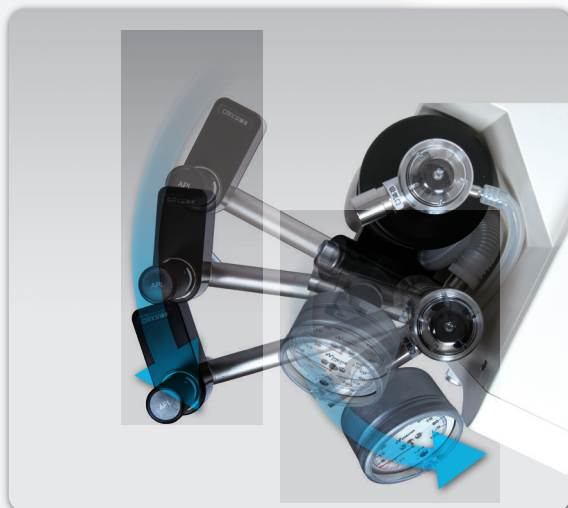

バッグアーム、気道内圧計が可動します



用手とベンチレータの回路がワンタッチに切換えできます

■ スペック

販売名		メラ吸入麻酔システム K o c h a b
寸法		本体：485(W)×370(D)×400(H)mm 本体+Kochab-D：485(W)×580(D)×1195(H)mm 本体+Kochab-S：485(W)×580(D)×1195(H)mm
質量		本体：27kg 本体+Kochab-D：58kg 本体+Kochab-S：52kg※ Kochab-P：3kg
定格供給圧		0.35 ～ 0.50 MPa (350 ～ 500kPa)
配管圧力計		表示範囲：0 ～ 1 MPa (0 ～ 1000kPa)
流量計		表示範囲：O ₂ ・N ₂ O・AIR：0 ～ 10.0 L/min
O ₂ フラッシュ流量		定格供給圧で 35 ～ 75 L/min
安全装置	O ₂ 供給圧安全装置	O ₂ 供給圧 0.18 ～ 0.25MPa (180 ～ 250kPa) でアラーム発生 かつアラーム発生以下の圧力にて N ₂ O を遮断
	流量計安全装置	O ₂ と N ₂ O 混合ガスにおいて O ₂ 濃度 25% 以上を確保
気化器取付台数		1 台 (Selectatec [®] 式)
アブゾーバ	キャニスタ容量	900mL
	呼吸回路切換	呼吸回路切換弁による用手・ベンチレータ回路の切換え
	気道内圧計	表示範囲：-20 ～ 100hPa
耐用期間		10 年

※メラ麻酔用ベンチレータMinorisの質量15kgは含まれていません。

●Selectatec[®]は、Datex-Ohmeda社の登録商標です。

■ オプション品



Kochab-P (ポール)



メラ麻酔用ベンチレータ
Minoris

承認番号:30400BZX00058000



V60 麻酔薬気化器
(セボルフラン用)

承認番号:302ALBZX00008000

■ 関連商品



ヤバシライム (CO₂吸収剤)



警報機能付ハンドヘルド
酸素濃度計マイサインO₂



コンプレッサ (JUN-AIR 87R-4PD)

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州



注意

ご使用前に必ず取扱説明書、添付文書をよくお読み
になってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●2022/4月/3000 ●承認番号:30400BZX00057000 ●不許複製 ●A-125 ●S-1 ●BA-0485-01

www.mera.co.jp/