

 Operating Room

アクティブ電極

# バイポーラピンセット

Bipolar Forceps



# 軽量、剛性に優れたチタン製バイポーラピンセット

軽量、高剛性なチタンだから可能にできたスレンダーなシャフト  
非常にデリケートなタッチを可能にしました。

手に馴染むハンドルと均整のとれたバランスは、フィーリング重視の設計で長時間の手術でもストレスを軽減します。ストレートとバイオネットタイプは窓開きハンドルにして軽量化とホールド性の向上を図っています。

通電性、熱伝導性の非常に高い銀チップを先端部に採用しています。低出力でスピーディーな凝固が可能、組織の付着を抑えます。

脳神経外科、耳鼻咽喉科、整形外科などのマイクロサージャリーに適しており、豊富なバリエーションが揃っています。

ガイドや高密度樹脂成型によって  
ピンセット先端の狂いを抑えます。

## 組織の付着防止に銀チップを採用

銀は熱伝導性、通電性に非常に優れています。熱伝導を更に高めるため分厚い銀チップを先端内側に溶着して組織の付着を抑えました。クリーニング性が格段に優れています。




銀チップ拡大図



# Bipolar Forceps (reusable)

実寸大

Nタイプ(ストレート)

先端の太さ		
F	0.1mm	
3	0.3mm	
1	1.0mm	



NF-14

商品コード:0120703100



N3-14

商品コード:0120703200



N1-14



商品コード:0120703300



# Bipolar Forceps (reusable)

実寸大

Nタイプ(ストレート)/Aタイプ(バイオネット)

先端の太さ		
3	0.3mm	
1	1.0mm	



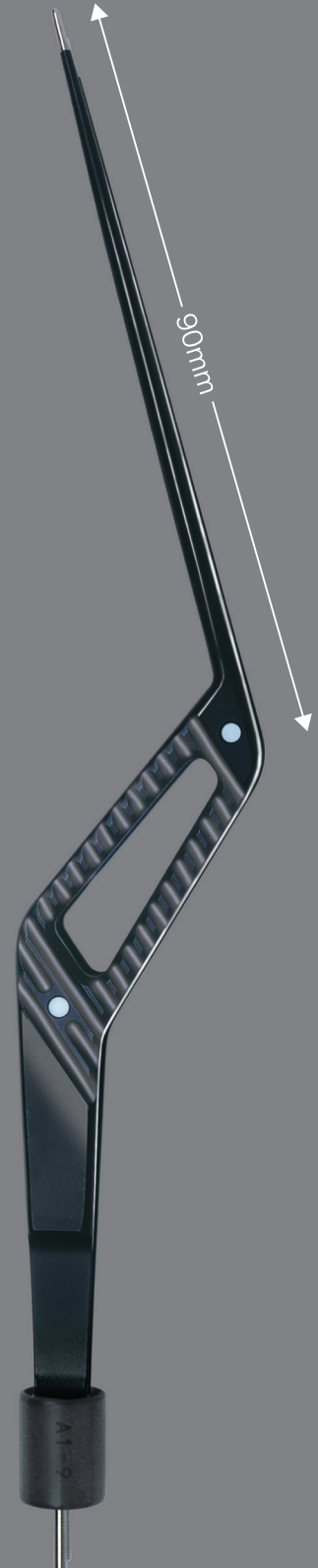
N3-18

商品コード:0120703400



N1-18

商品コード:0120703500





A1-9

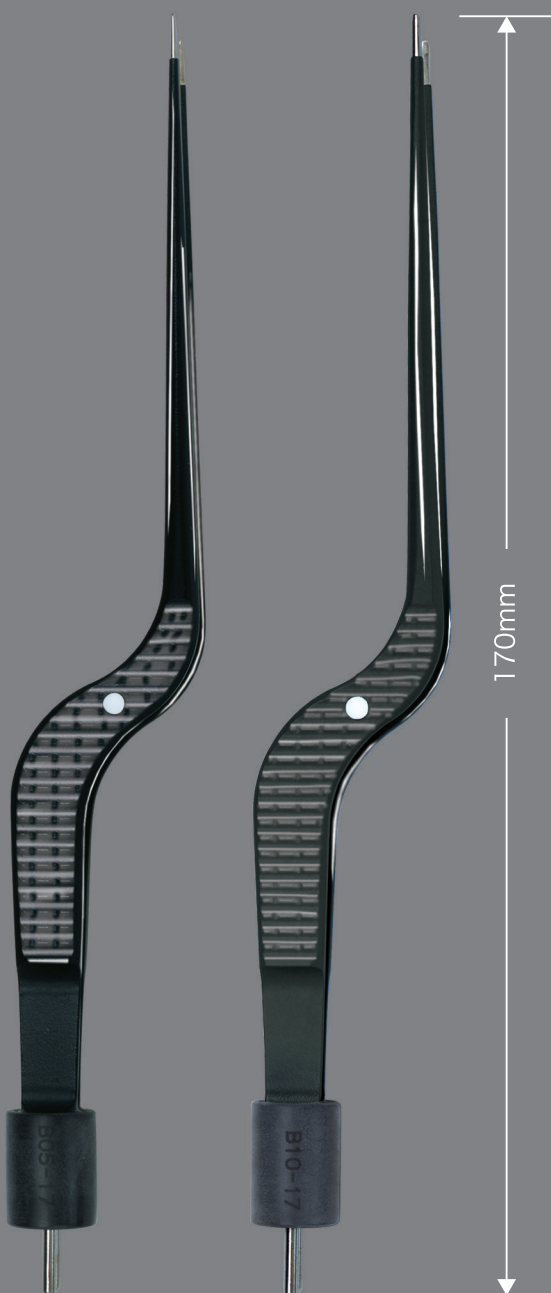
商品コード:0120703600

# Bipolar Forceps (reusable)

実寸大

Bタイプ(バイオネット)

先端の太さ		
05	0.5mm	
10	1.0mm	

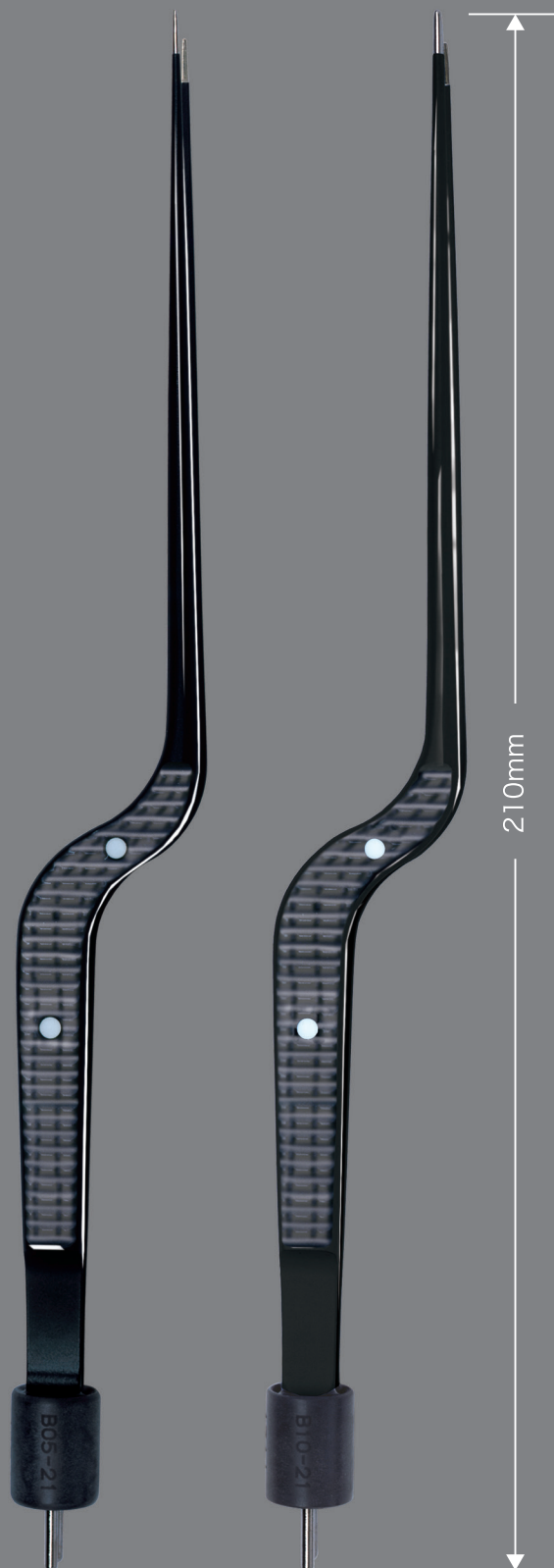


B05-17

B10-17

商品コード:0120703800

商品コード:0120703900



B05-21

B10-21

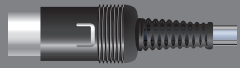
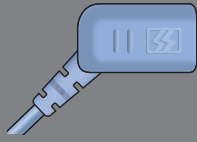


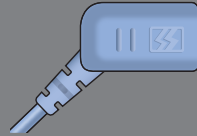

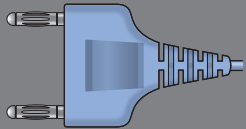
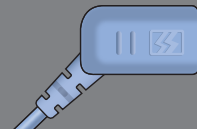

商品コード:0120704000

商品コード:0120704100

# Bipolar Accessories (reusable)

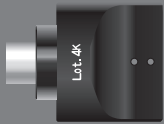

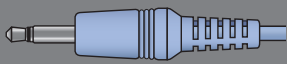

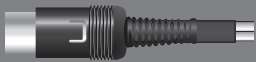
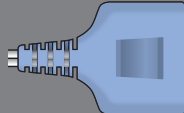
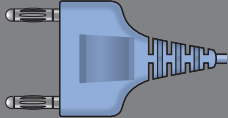
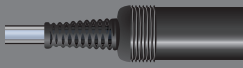

## バイポーラピンセットコード

■承認番号:21900BZX00368000 クラスII

リユースタイプ	電気手術器本体側	バイポーラ電極側	全長3m ピン型/エースクラブフラット型
DINタイプ 商品コード:0120803100			
Ø3.5mmタイプ 商品コード:0120803200			
Ø4mm固定タイプ (28.6mm幅) 商品コード:0120803400			

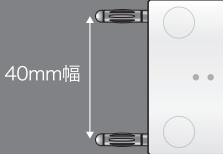

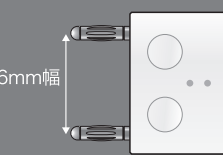

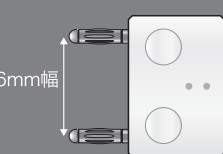

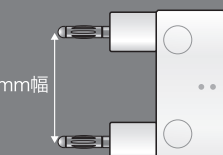
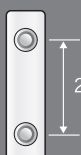
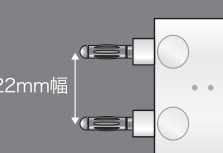

## バイポーラ変換アダプター

■承認番号:21900BZX00368000 クラスII

リユースタイプ	電気手術器本体側	バイポーラコード側	
バイポーラ コードアダプター DINオス→2股 (一体型) 商品コード:0120420000			28.6mm幅
バイポーラ コードアダプター Ø3.5mm→2又 商品コード:0120420200			⊙ 工 ⊙ 工 Ø4mm
バイポーラ コードアダプター DINオス→4mm&2.5mm 商品コード:0120420400			28.6mm幅 (Ø4mm) 10mm幅 (Ø2.5mm)
バイポーラ コードアダプター Ø4mm固定プラグ→DINメス 商品コード:0120420600			

# バイポーラジョイント

■届出番号:13B2X00035BJ0001 クラスI

リユースタイプ	電気手術器本体側	バイポーラコード側
<p>バイポーラジョイント (40mmA)</p> <p>商品コード:0120421800</p>	 <p>40mm幅</p>	 <p>28.6mm幅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体側:40mm幅</li> <li>・バイポーラコード側:28.6mm幅</li> <li>・MS-50 (S/N:U-3470以前)</li> </ul>
<p>バイポーラジョイント (29mmB)</p> <p>商品コード:0120422500</p>	 <p>28.6mm幅</p>	 <p>10mm幅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体側:28.6mm幅</li> <li>・バイポーラコード側:10mm幅</li> <li>・ミズホ社バイポーラコード用</li> </ul>
<p>バイポーラジョイント (29mmC)</p> <p>商品コード:0120422700</p>	 <p>28.6mm幅</p>	 <p>22mm幅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体側:28.6mm幅</li> <li>・バイポーラコード側:22mm幅</li> <li>・エルベ社バイポーラコード用</li> </ul>
<p>バイポーラジョイント (38mmD)</p> <p>商品コード:0120422800</p>	 <p>38mm幅</p>	 <p>28.6mm幅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体側:38mm幅</li> <li>・バイポーラコード側:28.6mm幅</li> <li>・本体:マリス凝固器用</li> </ul>
<p>バイポーラジョイント (22mmD)</p> <p>商品コード:0120423000</p>	 <p>22mm幅</p>	 <p>28.6mm幅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体側:22mm幅</li> <li>・バイポーラコード側:28.6mm幅</li> <li>・本体:エルベ社電気メス用</li> </ul>

## 仕様

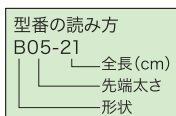
バイポーラピンセット <span style="float: right;">■承認番号:21900BZX00368000 クラスII</span>			
商品コード	GTIN-14	販売名	規格/型式
0120703100	04562147794182	アクティブ電極	バイポーラピンセット NF-14 全長:140mm (ストレート、ファイン 0.1mm)
0120703200	04562147794199	アクティブ電極	バイポーラピンセット N3-14 全長:140mm (ストレート 0.3mm)
0120703300	04562147794205	アクティブ電極	バイポーラピンセット N1-14 全長:140mm (ストレート1.0mm)
0120703400	04562147794212	アクティブ電極	バイポーラピンセット N3-18 全長:180mm (ストレート 0.3mm)
0120703500	04562147794229	アクティブ電極	バイポーラピンセット N1-18 全長:180mm (ストレート 1.0mm)
0120703600	04562147794236	アクティブ電極	バイポーラピンセット A1-9 全長:210mm (バイオネット 1.0mm)
0120703800	04562147794250	アクティブ電極	バイポーラピンセット B05-17 全長:170mm (バイオネット 0.5mm)
0120703900	04562147794267	アクティブ電極	バイポーラピンセット B10-17 全長:170mm (バイオネット 1.0mm)
0120704000	04562147794274	アクティブ電極	バイポーラピンセット B05-21 全長:210mm (バイオネット 0.5mm)
0120704100	04562147794281	アクティブ電極	バイポーラピンセット B10-21 全長:210mm (バイオネット 1.0mm)

バイポーラピンセットコード <span style="float: right;">■承認番号:21900BZX00368000 クラスII</span>			
商品コード	GTIN-14	販売名	規格/型式
0120803100	04562147790948	アクティブ電極	バイポーラピンセットコード DIN ※BM系、SAS系、MS-7000等
0120803200	04562147790955	アクティブ電極	バイポーラピンセットコード φ3.5mm ※MS-1500、1100
0120803400	04562147790979	アクティブ電極	バイポーラピンセットコード φ4mm固定プラグ ※SHAPPER系、BMα MS-50(s/n:U-3482~)

バイポーラ変換アダプター <span style="float: right;">■承認番号:21900BZX00368000 クラスII</span>			
コード番号	GTIN-14	販売名	規格/型式
0120420000	04562147790986	アクティブ電極	バイポーラコードアダプター DINオス→2股(一体型)
0120420200	04562147790740	アクティブ電極	バイポーラコードアダプター Ø3.5mm→2又
0120420400	04562147790764	アクティブ電極	バイポーラコードアダプター DINオス→4mm & 2.5mm
0120420600	04562147790788	アクティブ電極	バイポーラコードアダプター φ4mm 固定プラグ→DINメス

バイポーラジョイント <span style="float: right;">■届出番号:13B2X00035BJ0001 クラスI</span>			
コード番号	GTIN-14	販売名	規格/型式
0120421800	04562147793277	バイポーラジョイント	アダプター40mmA ※本体側 40mm→28.6mm 本体MS-50(s/n:U-3470以前)
0120422500	04562147793345	バイポーラジョイント	アダプター29mmB ※本体側 28.6mm→10mm ミズホ社バイポーラコード用
0120422700	04562147793369	バイポーラジョイント	アダプター29mmC ※本体側 28.6mm→22mm エルベ社バイポーラコード用
0120422800	04562147793376	バイポーラジョイント	アダプター38mmD ※本体側 38mm→28.6mm 本体マリス凝固器用
0120423000	04562147793390	バイポーラジョイント	アダプター22mmD ※本体側 22mm→28.6mm 本体エルベ社電気メス用

※ 接続部の形状は異なることがあります。ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。



販売業者

**MEIRA** 泉工医科工業株式会社

製造販売業者

株式会社 **セムコ** 東京都足立区梅田4-16-8

■お問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

**注意** 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/8/500 ●承認番号:21900BZX00368000 ●不許複製 ●F-3 ●B-95 ●BO-0356-03

[www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)