


## **Universal Arm**

# **OPCAB Stabilizer Attachment/Positioner Attachment Valve Exposure Attachment**


OPユニバーサルアーム

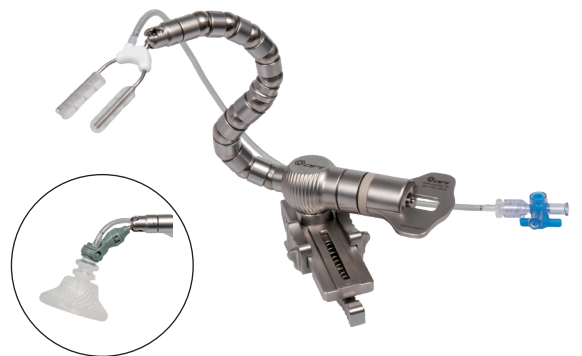

## コストパフォーマンスに優れるOPCABシステム

- 再滅菌して使用できるリユーズブルアームとディスプレイザブルOPCABアタッチメントの組み合わせはコストパフォーマンスに優れます。
- スタビライザーアタッチメントの可動域は、心臓を脱転させて吻合する際の配置性に優れる設計です。
- スタビライザーのマリアブルフットは、吸着性を高めるために心臓表面の曲面に合わせた形状にできます。

### OPCAB Stabilizer

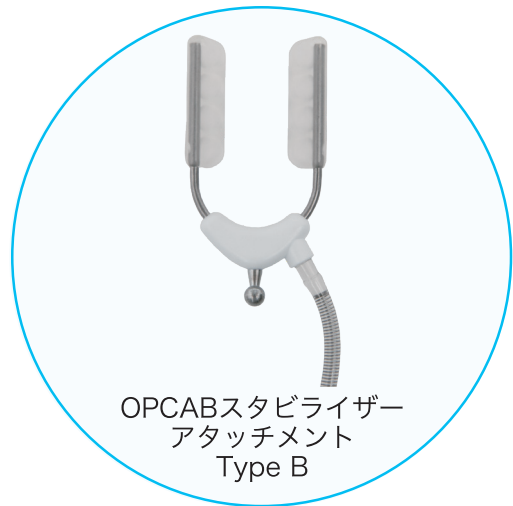

ユニバーサ



### OPCAB Positioner




# バルブリトラクターを装着することにより心臓弁の手術に使用できます。

- バルブリトラクターは大動脈弁用と僧帽弁用があり、それぞれ3サイズから選択することができます。
- ボールジョイントによる接続はアタッチメント角の自由度が高く、アタッチメントの理想的な配置に役立ちます。




## Aortic Valve

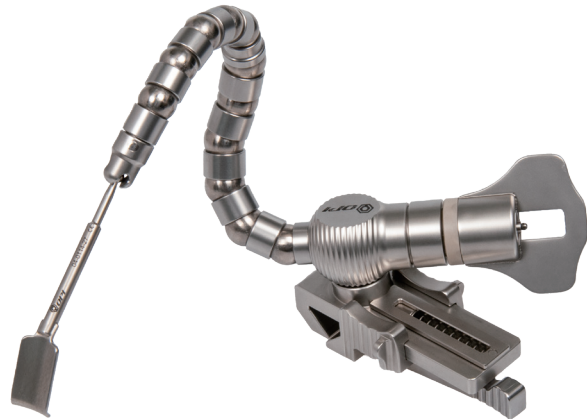

## ナルアーム



## Mitral Valve

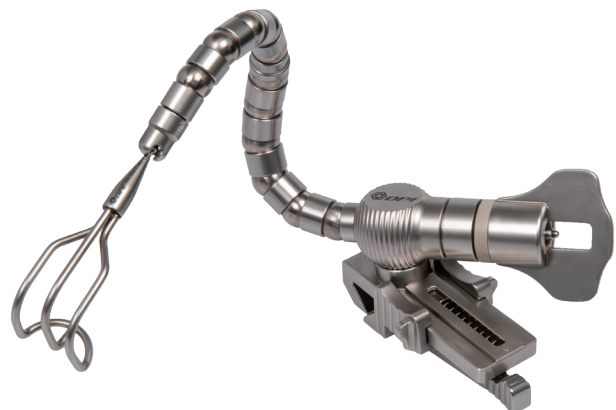

■アーム

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0461904000	4544753139779	OPIユニバーサルアーム	ユニバーサルアーム 04-1101-18	1本/袋	11B1X00016000239

■アタッチメント

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0461908500	4544753140225	OPI OPCAB プロシージャーシステム	スタビライザーアタッチメント B 010302	1個/袋	301ADBZX00082000
0461908700	4544753140249	OPI OPCAB プロシージャーシステム	OPCABポジショナーアタッチメント 010202	1個/袋	301ADBZX00082000

■バルブリトラクター

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0461904100	4544753139786	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 大動脈弁用 S 04-0110-27	1個/袋	11B1X00016000238
0461904200	4544753139793	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 大動脈弁用 M 04-0114-27	1個/袋	11B1X00016000238
0461904300	4544753139809	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 大動脈弁用 L 04-0118-27	1個/袋	11B1X00016000238
0461904400	4544753139816	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 僧帽弁用 S 03-0920-40	1個/袋	11B1X00016000238
0461904500	4544753139823	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 僧帽弁用 M 03-0927-40	1個/袋	11B1X00016000238
0461904600	4544753139830	OPIバルブリトラクター アタッチメント	バルブリトラクター 僧帽弁用 L 03-0940-70	1個/袋	11B1X00016000238

製造業者



製造販売業者



■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254

お問い合わせ



**注意**

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読み  
 になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/10月/2000 ●不許複製 ●S-1 ●D-178 ●BH-0498-01