


Accurate Pencil

電気メス用モノポーラペンシル



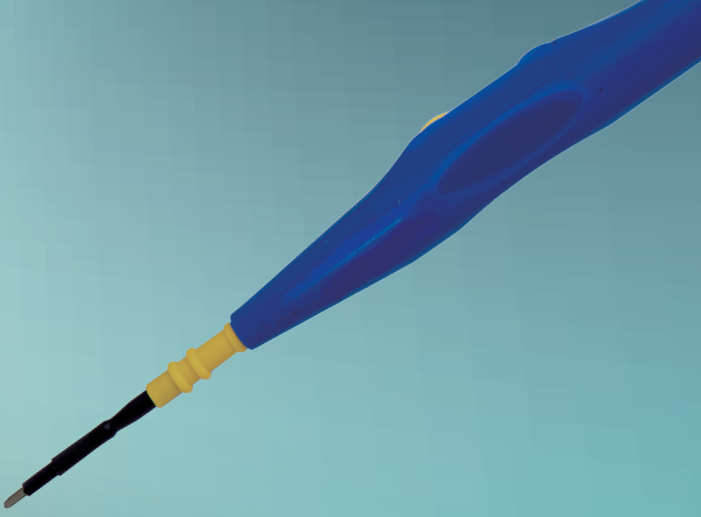

術者の手にフィットする
エルゴノミックデザイン


手元から先端までが短く
安定感のある操作性



角度を問わず軽い力で押せる
凹型楕円形状のボタン




電気メスから抜きやすい
コネクター形状

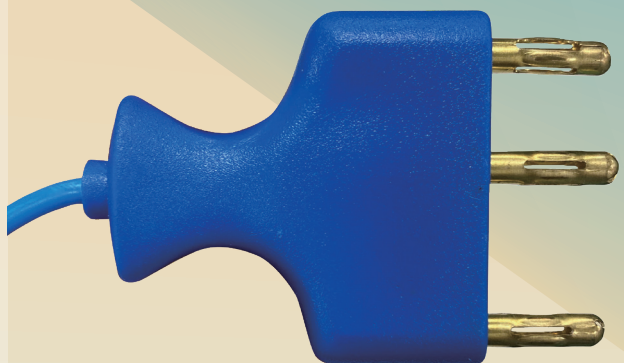

Accurate Pencil

ボタンスイッチ付アクティブハンドル

単回使用製品

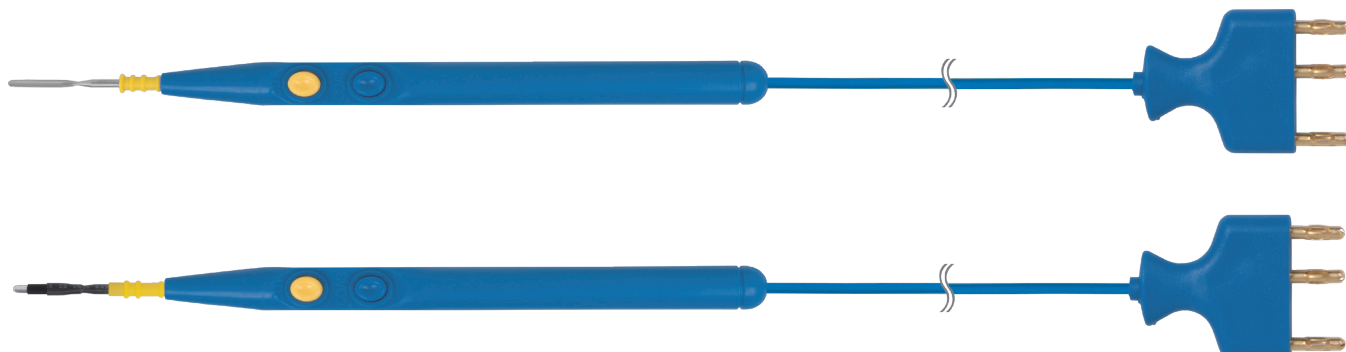


- コーティングタイプは焦げ付きの付着による切れ味の低下を抑えます。
汚れが付着した場合は濡れたガーゼなどで軽く拭き上げてください。
簡単な拭き取りで切れ味を維持できるため、術者のストレスが軽減されます。
- 深部用タイプは先端以外の電極部が絶縁被膜で覆われています。
術部周辺組織への無用な焼灼を防ぐため、深い術部での手技に有用です。
- 各種においてホルスター同梱の有無を選択できます。

| 商品コード | JANコード | 規格/型式 | コーティング | 深部用 | ホルスター |
|------------|---------------|--|--------|-----|-------|
| 0120202201 | 4544753139595 | SW12200 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm 3mケーブル | | | |
| 0120202301 | 4544753139601 | SW12200-B02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm ホルスター付 3mケーブル | | | ○ |
| 0120203201 | 4544753136112 | SW12200-D02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング 3mケーブル | ○ | | |
| 0120202601 | 4544753139632 | SW12200-J08 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング ホルスター付 3mケーブル | ○ | | ○ |
| 0120203301 | 4544753136129 | SW12200-J09 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 3mケーブル | | ○ | |
| 0120202401 | 4544753139618 | SW12200-J01 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm 深部用 3mケーブル | | ○ | |
| 0120203401 | 4544753136136 | SW12200-J11 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル | | ○ | ○ |
| 0120202701 | 4544753139564 | SW12200-B12 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm 深部用 ホルスター付 3mケーブル | | ○ | ○ |
| 0120203501 | 4544753136143 | SW12200-J10 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 3mケーブル | ○ | ○ | |
| 0120202501 | 4544753139625 | SW12200-J02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm コーティング 深部用 3mケーブル | ○ | ○ | |
| 0120203601 | 4544753136150 | SW12200-J07 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル | ○ | ○ | ○ |
| 0120202801 | 4544753139571 | SW12200-B13 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm コーティング 深部用 ホルスター付 3mケーブル | ○ | ○ | ○ |

アクティブ電極

単回使用製品

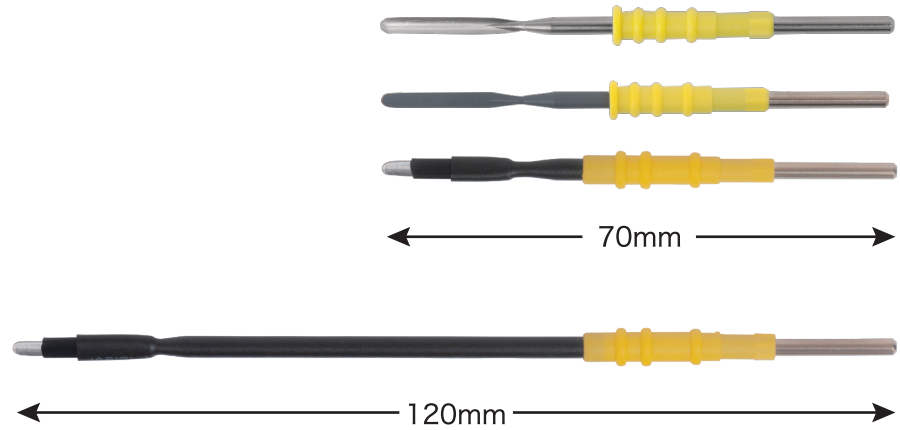

■コーティングや深部用被覆の有無のバリエーションから最適なものをご選択いただけます。

■単品のアクティブ電極では、全長120mmの長尺タイプもご用意しております。
より深い術部での手技に有用です。

| 商品コード | JANコード | 規格/型式 | コーティング | 深部用 | 長尺 |
|------------|---------------|---|--------|-----|----|
| 0120308501 | 4544753139540 | SW130701256S メス先電極 平 70mm | | | |
| 0120308201 | 4544753139519 | SW130701150S メス先電極 平 70mm コーティング | ○ | | |
| 0120308701 | 4544753136167 | SW130701257S メス先電極 平 4mm/70mm 深部用2層 | | ○ | |
| 0120308401 | 4544753139533 | SW130701255S メス先電極 平 5mm/70mm 深部用 | | ○ | |
| 0120308801 | 4544753136174 | SW130701152S メス先電極 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 | ○ | ○ | |
| 0120308301 | 4544753139526 | SW130701151S メス先電極 平 5mm/70mm コーティング 深部用 | ○ | ○ | |
| 0120308901 | 4544753136181 | SW131201258S メス先電極 平 4mm/120mm 深部用2層 | | ○ | ○ |
| 0120308601 | 4544753139557 | SW131201248S メス先電極 平 5mm/120mm 深部用 | | ○ | ○ |
| 0120309001 | 4544753136198 | SW131201154S メス先電極 平 4mm/120mm コーティング 深部用2層 | ○ | ○ | ○ |

ホルスター

単回使用製品



■術中の電気メス用モノポーラペンシルの収納に便利なホルスターです。

■ドレープをスロットに通すことで簡単に固定できます。

A blue and yellow stylus pen is shown diagonally from the bottom left to the top right. The pen has a blue body with a yellow section near the tip and a black tip. The background is a gradient of teal and white.

SOLID & UNIQUE

仕様

| 商品コード | JANコード | 販売名 | 規格/型式 | 包装 (数量) | 認証番号 | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------------|-------|--|
| 0120202201 | 4544753139595 | アキュレートペンシル | SW12200 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm 3mケーブル | 25本/箱 | 302ADBZX00104000 | | |
| 0120202301 | 4544753139601 | | SW12200-B02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120203201 | 4544753136112 | | SW12200-D02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング 3mケーブル | | | | |
| 0120202601 | 4544753139632 | | SW12200-J08 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 70mm コーティング ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120203301 | 4544753136129 | | SW12200-J09 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 3mケーブル | | | | |
| 0120203401 | 4544753136136 | | SW12200-J11 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120202401 | 4544753139618 | | SW12200-J01 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm 深部用 3mケーブル | | | | |
| 0120202701 | 4544753139564 | | SW12200-B12 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm 深部用 ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120203501 | 4544753136143 | | SW12200-J10 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 3mケーブル | | | | |
| 0120203601 | 4544753136150 | | SW12200-J07 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120202501 | 4544753139625 | | SW12200-J02 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm コーティング 深部用 3mケーブル | | | | |
| 0120202801 | 4544753139571 | | SW12200-B13 ボタンスイッチ付アクティブハンドル 平 5mm/70mm コーティング 深部用 ホルスター付 3mケーブル | | | | |
| 0120308501 | 4544753139540 | | SW130701256S メス先電極 平 70mm | | | 50本/箱 | |
| 0120308201 | 4544753139519 | | SW130701150S メス先電極 平 70mm コーティング | | | | |
| 0120308701 | 4544753136167 | | SW130701257S メス先電極 平 4mm/70mm 深部用2層 | | | | |
| 0120308401 | 4544753139533 | SW130701255S メス先電極 平 5mm/70mm 深部用 | | | | | |
| 0120308801 | 4544753136174 | SW130701152S メス先電極 平 4mm/70mm コーティング 深部用2層 | | | | | |
| 0120308301 | 4544753139526 | SW130701151S メス先電極 平 5mm/70mm コーティング 深部用 | | | | | |
| 0120308901 | 4544753136181 | SW131201258S メス先電極 平 4mm/120mm 深部用2層 | | | | | |
| 0120308601 | 4544753139557 | SW131201248S メス先電極 平 5mm/120mm 深部用 | | | | | |
| 0120309001 | 4544753136198 | SW131201154S メス先電極 平 4mm/120mm コーティング 深部用2層 | | | | | |
| 0120900001 | 4544753139403 | SW1000104A ホルスター | 50個/箱 | | | | |

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254

注意 実際のお取り扱いの際には電子添文をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2023/7月/2000 ●不許複製 ●F-3 ●B-113 ●BO-0451-03

製造業者



SHINING WORLD HEALTH CARE CO., LTD.

お問い合わせ

