



BOSS開創器 —THE LOBSTER™—

18-4302C/18-4302EC/18-4301C/18-4301EC/18-4300B/18-4300EC

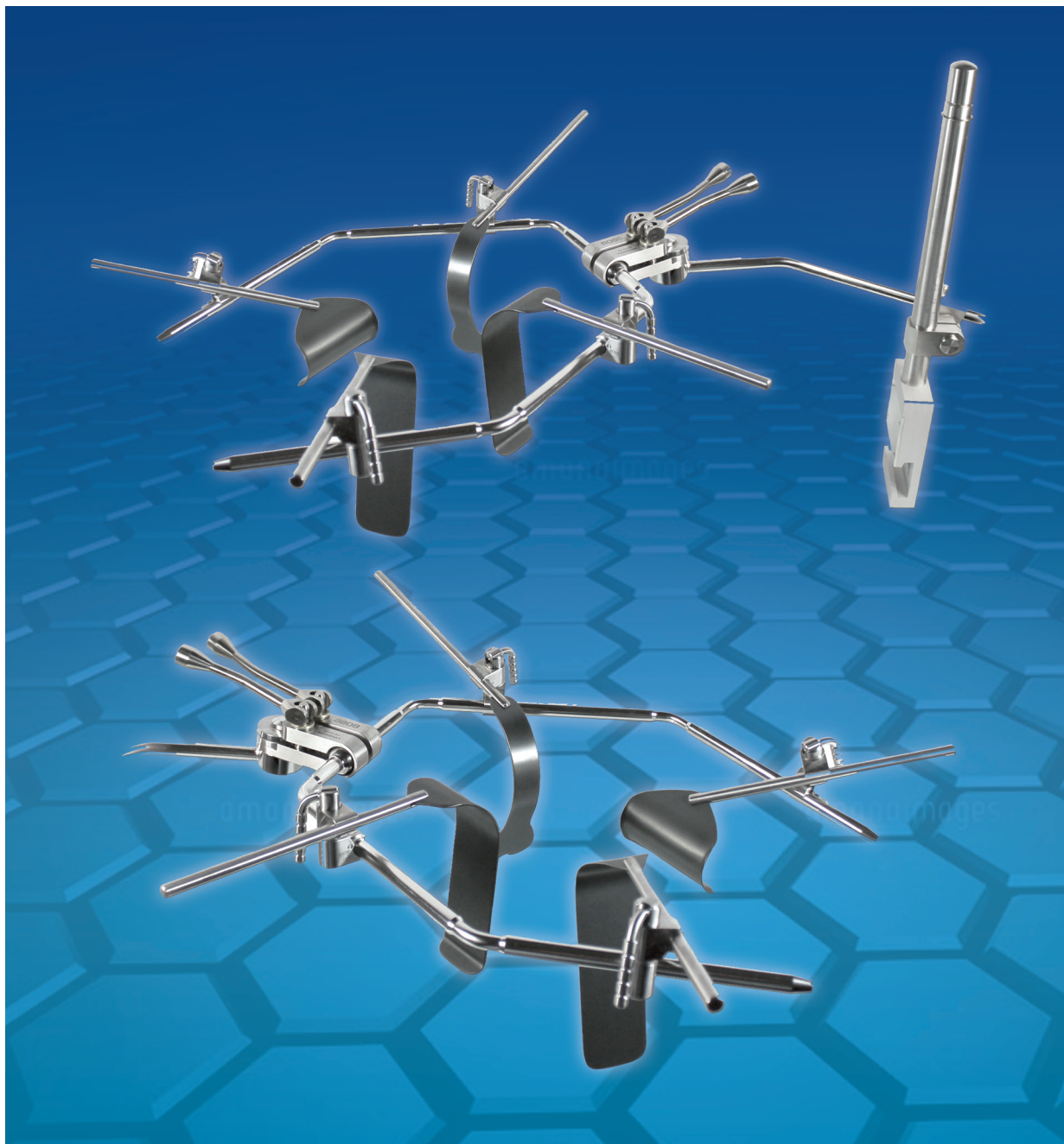

BOSS ロブスター 5つの特徴

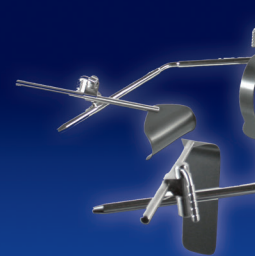

① ワンタッチクランプによる迅速な脱着

クランプはレバーをゆるめ、フレームに押しに行くだけで、簡単に装着可能です。手間のかかる作業はありません。

装着後はレバー操作のみでレトラクターの位置、角度、深さを簡単に調節できるので、あらゆる術野に対応可能です。


外す際もクランプをひねれば簡単に取り外すことができます。



② レトラクターは最大8個まで設置可、あらゆる術式に対応


ほぼフレーム全周の、どの位置からでも、クランプ装着ができ、レトラクターを設置することができます。

最大8ヶ所に設置することができます。レトラクターは9種類、サイズ別で39種。あらゆる術式に対応可能です。

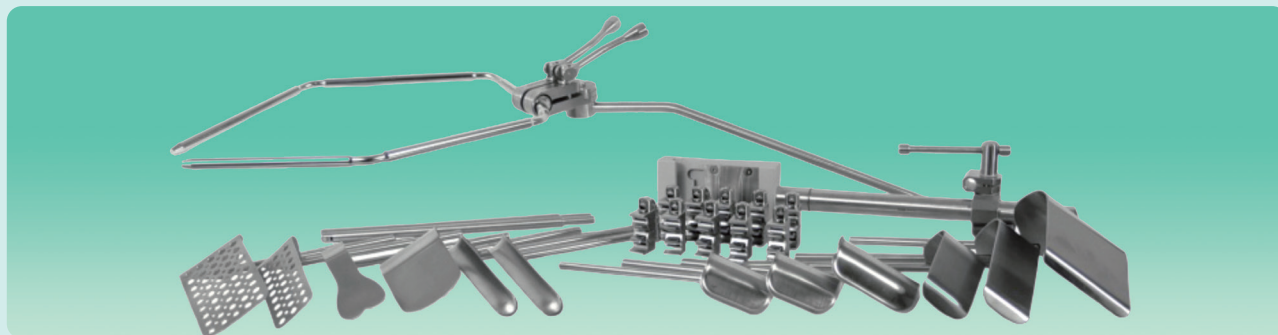


③ 左右アームは個別調整可 状況にあったポジション設定

2本のフレームは個別に角度、向きを調整することが可能です。2本が個別に調整できることで、より必要に応じたポジションにレトラクターを設置することができます。

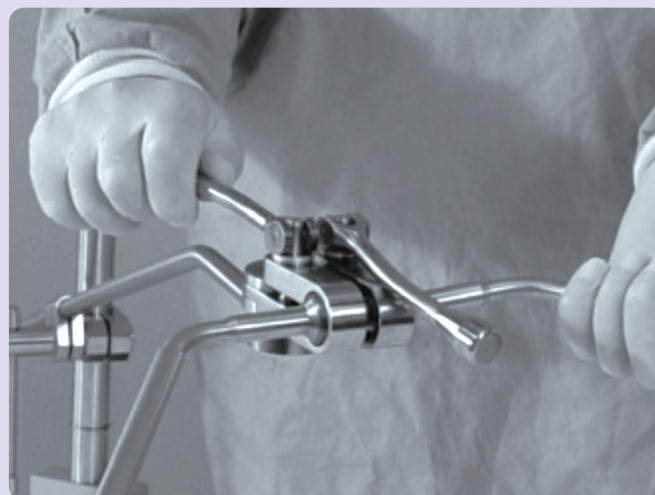


④ 手術の省力化を叶える自己保持型レトラクター

豊富な種類のレトラクターをあらゆる角度、深さにて設置できることから、本器のみで、臓器の圧排、牽引、視野確保が可能となり、術者作業の省力化に有用です。

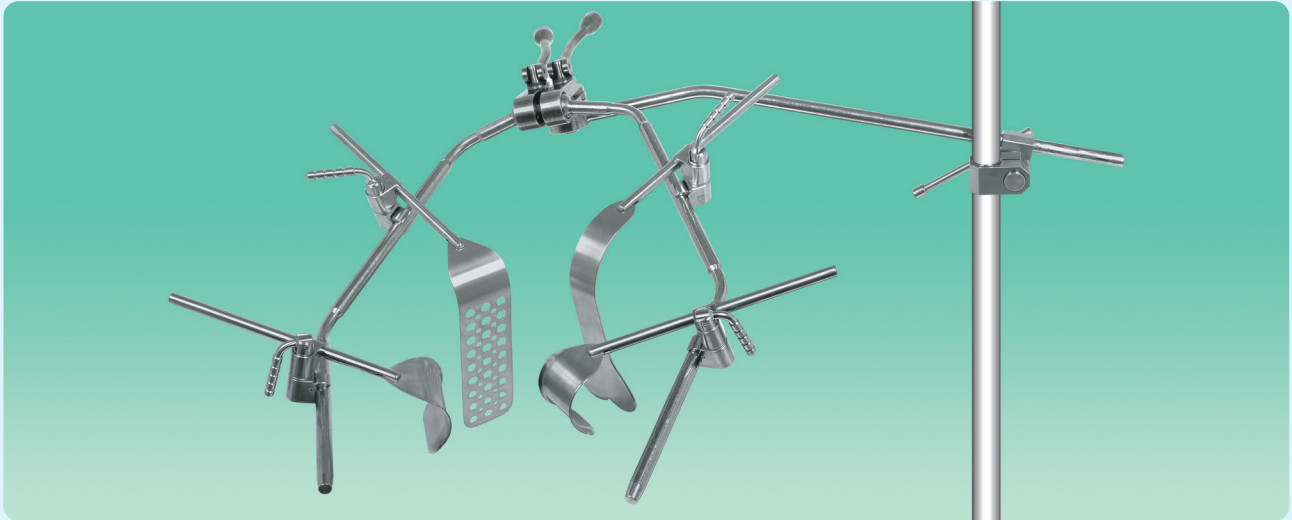

⑤ 清潔域からの簡単設置、術者のみで設置可能


本器を使用する際の設置は、術野から、清潔操作にて、簡単に行うことができるので、外回りスタッフの手を煩わせません。また、準備から手術に迅速に移行することが可能です。

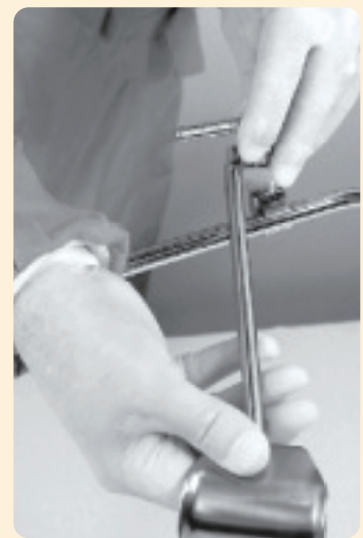

(0465860100)

(0465860200)

ロブスター 血管用セット(18-4302C)/ロブスター 血管用拡張セット(18-4302EC)

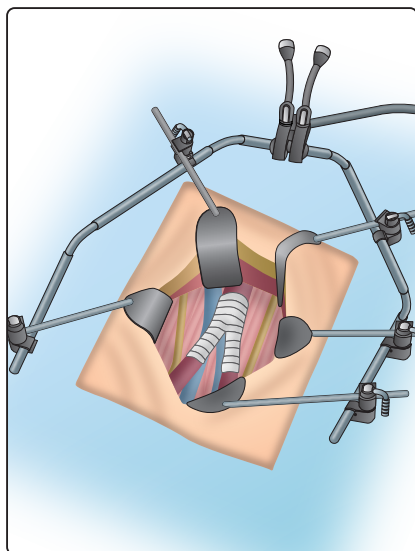


記号	商品コード	規格/型式	18-4302C(個)	18-4302EC(個)
A	0465860800	18-4306C テーブルポスト	1	1
B	0465861600	18-4315 フレーム	1	1
C	0465860700	18-4305 レトラクタークランプ	8	10
E	0465862000	18-4324 メーヨ スイベルレトラクター 7×5cm	2	2
-	0465862300	18-4326 メーヨ スイベルレトラクター 8.9×5cm	1	1
F	0465866100	18-4382 フェンス スイベル 10×15cm	1	1
-	0465863300	18-4338 ディーパー スイベルレトラクター 3.8×15cm	-	-
G	0465862800	18-4332 ディーパー スイベル 7×11.4cm	1	1
H	0465867300	18-4404 スプランクニク スイベル 5×11.5cm	1	1
I	0465867500	18-4406 スプランクニク スイベル 5×15cm	1	1
J	0465864900	18-4364 マリアブル スイベル 5×16.5cm	1	1
K	0465865100	18-4368 マリアブル スイベル 7.6×16.5cm	1	1
L	0465863700	18-4344 ハリングトンスウィートハート 5×12.5cm	1	1
-	0465863900	18-4346 ハリングトンスウィートハート 7.5×17.5cm	-	-
M	0465866700	18-4394 リーナル スイベル 2.5×15cm	2	2
O	0465865900	18-4375 マーシャルマリアブルブラダー 7.5×15cm	-	-
P	0465861200	18-4310 エクステンションアーム	-	1
-	0465860600	18-4300C 滅菌ケース	1	1

(0465860500)

(0465861100)

ロブスター 泌尿器科用セット(18-4301C)/ロブスター 泌尿器科用拡張セット(18-4301EC)

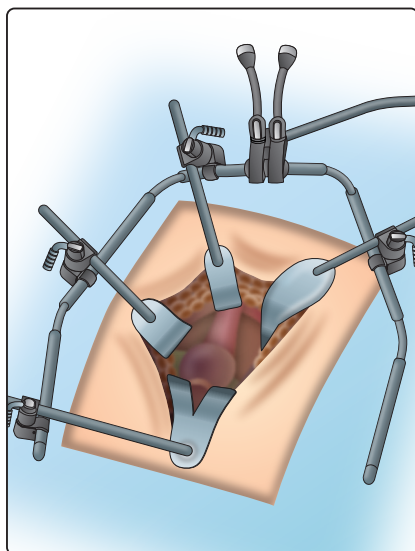


記号	商品コード	規格/型式	18-4301C(個)	18-4301EC(個)
A	0465860800	18-4306C テーブルポスト	1	1
B	0465861600	18-4315 フレーム	1	1
C	0465860700	18-4305 レトラクタークランプ	6	8
D	0465861900	18-4322 メーヨ スイベルレトラクター 5×5cm	2	2
E	0465862000	18-4324 メーヨ スイベルレトラクター 7×5cm	2	2
F	0465866100	18-4382 フェンス スイベル 10×15cm	1	1
-	0465863300	18-4338 ディーパー スイベルレトラクター 3.8×15cm	1	1
G	0465862800	18-4332 ディーパー スイベル 7×11.4cm	1	1
H	0465867300	18-4404 スプランクニク スイベル 5×11.5cm	1	1
I	0465867500	18-4406 スプランクニク スイベル 5×15cm	-	-
J	0465864900	18-4364 マリアブル スイベル 5×16.5cm	1	1
K	0465865100	18-4368 マリアブル スイベル 7.6×16.5cm	1	1
L	0465863700	18-4344 ハリングトンスウィートハート 5×12.5cm	1	1
-	0465863900	18-4346 ハリングトンスウィートハート 7.5×17.5cm	1	1
M	0465866700	18-4394 リーナル スイベル 2.5×15cm	-	-
O	0465865900	18-4375 マーシャルマリアブルブラダー 7.5×15cm	1	1
P	0465861200	18-4310 エクステンションアーム	-	1
-	0465860600	18-4300C 滅菌ケース	1	1

(0465860300)

(0465860400)


ロブスター 外科用セット(18-4300B)/ロブスター 外科用拡張セット(18-4300EC)

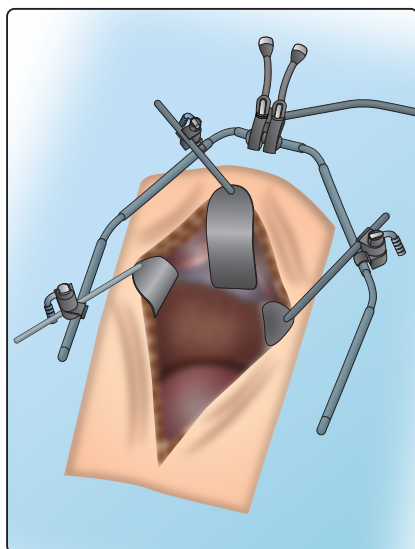

記号	商品コード	規格/型式	18-4300B(個)	18-4300EC(個)
A	0465860800	18-4306C テーブルポスト	1	1
B	0465861600	18-4315 フレーム	1	1
C	0465860700	18-4305 レトラクタークランプ	6	8
D	0465861900	18-4322 メーヨ スイベルレトラクター 5×5cm	-	-
E	0465862000	18-4324 メーヨ スイベルレトラクター 7×5cm	2	2
F	0465866100	18-4382 フェンス スイベル 10×15cm	1	1
-	0465863300	18-4338 ディーパー スイベルレトラクター 3.8×15cm	-	-
G	0465862800	18-4332 ディーパー スイベル 7×11.4cm	1	1
H	0465867300	18-4404 スプランクニク スイベル 5×11.5cm	-	-
I	0465867500	18-4406 スプランクニク スイベル 5×15cm	1	1
J	0465864900	18-4364 マリアブル スイベル 5×16.5cm	1	1
K	0465865100	18-4368 マリアブル スイベル 7.6×16.5cm	1	1
L	0465863700	18-4344 ハリングトンスウィートハート 5×12.5cm	1	1
-	0465863900	18-4346 ハリングトンスウィートハート 7.5×17.5cm	-	-
M	0465866700	18-4394 リーナル スイベル 2.5×15cm	-	-
N	0465864600	18-4356 ケリー スイベル 7.6×6.3cm	1	1
-	0465864700	18-4358 ケリー スイベル 7.5×10cm	1	1
O	0465865900	18-4375 マーシャルマリアブルブラダー 7.5×15cm	-	-
P	0465861200	18-4310 エクステンションアーム	-	1
-	0465860600	18-4300C 滅菌ケース	1	1


レトラクター特長

BOSS
INSTRUMENTS, LTD.
For the Art of Surgery™

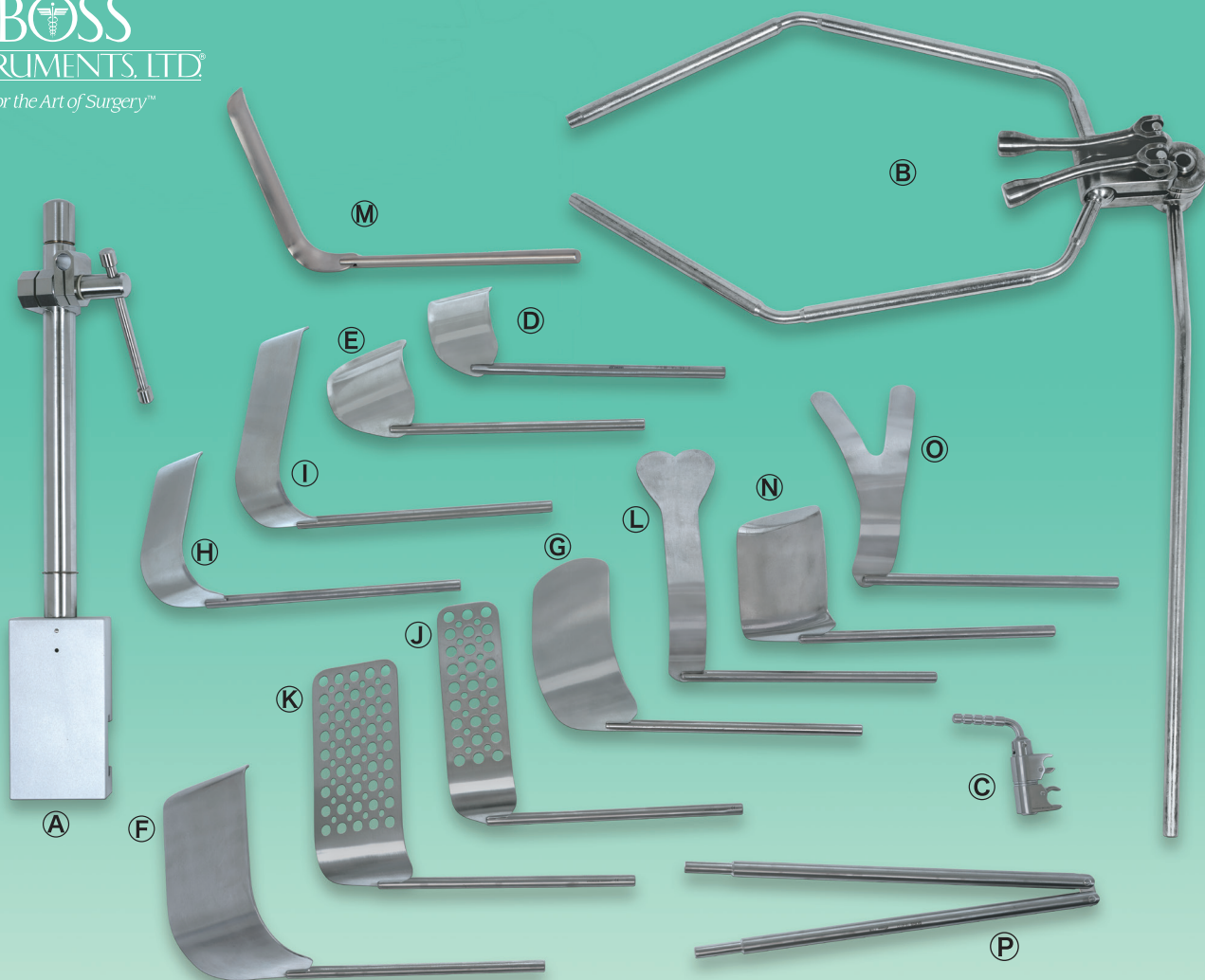

記号	規格/型式	特長
D	18-4322 メーヨ スイベルレトラクター 5×5cm	主に腹壁を牽引することに有用です。
E	18-4324 メーヨ スイベルレトラクター 7×5cm	
F	18-4382 フェンス スイベル 10×15cm	腸の圧排等、面積の大きなレトラクトに有用です。
G	18-4332 ディーパー スイベルレトラクター 7×11.4cm	肝臓の圧排や、広範囲に上腹部臓器を圧排するのに有用です。尚、体格によっては腸の圧排にも使用できます。
H	18-4404 スプランクニック スイベル 5×11.5cm	古くから肝臓鉤とも呼ばれる上腹部多用鉤です。
I	18-4406 スプランクニック スイベル 5×15cm	先端の曲り部分が、癒着組織の視野確保に有用です。
J	18-4364 マリアブル スイベル 5×16.5cm	下部消化管等を押さえる目的で生まれた自在鉤です。
K	18-4368 マリアブル スイベル 7.6×16.5cm	圧排したい組織の状況に合わせて曲げて使用することが出来ます。
O	18-4375 マーシャルマリアブルブラダー 7.5×15cm	主に泌尿器科の手術で前立腺摘出の際に尿道と膀胱の圧排に有用です。自在に曲げられるので、手の平のように曲げて臓器の圧排に使用します。
L	18-4344 ハリントンズウィートハート 5×12.5cm	先がハート形状になっており、癒着部分の視野確保で、押しつけても組織のダメージを極力軽減。癒着組織の視野確保に有用です。
M	18-4394 リーナル スイベル 2.5×15cm	腎動脈の牽引、圧排用に作られた多用途鉤です。
N	18-4356 ケリー スイベル 7.6×6.3cm	メーヨスイベルと同様に主に腹壁を牽引することに有用です。断面が弓形をしている腹壁鉤です。


エクステンションパーツ

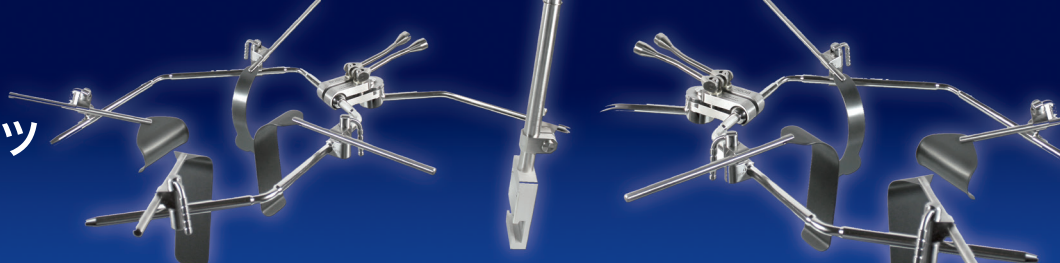

18-4305 レトラクタークランプ

0465860700


すべてのレトラクターをフレームに簡単にアタッチ。流れるような操作でストレスなくロブスターシステムをセットアップ可能です。

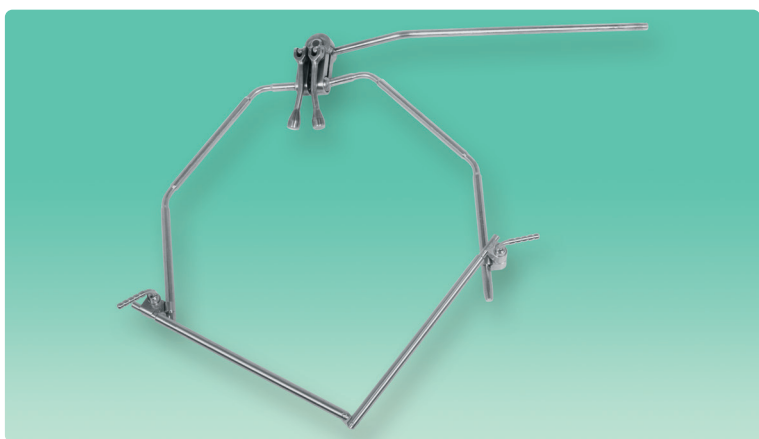


18-4310 エクステンションアーム

046581200

ロブスターフレームの対側方向から多角的に牽引する際に有用です。

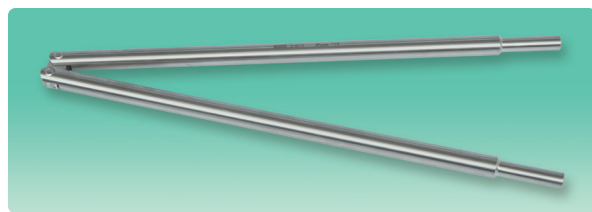

■ 逆面(インサート面)からの写真

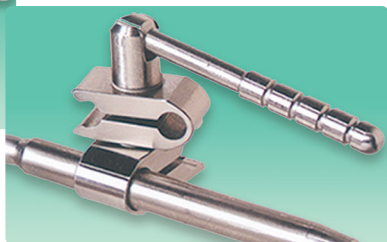


■ レール面からの写真

18-4308 スナップ/スライダークランプ

0465861000

エクステンションアームを装着しながら、レトラクターを同時にセットできるクランプです。同じ部位にセットアップできるので邪魔になりません。

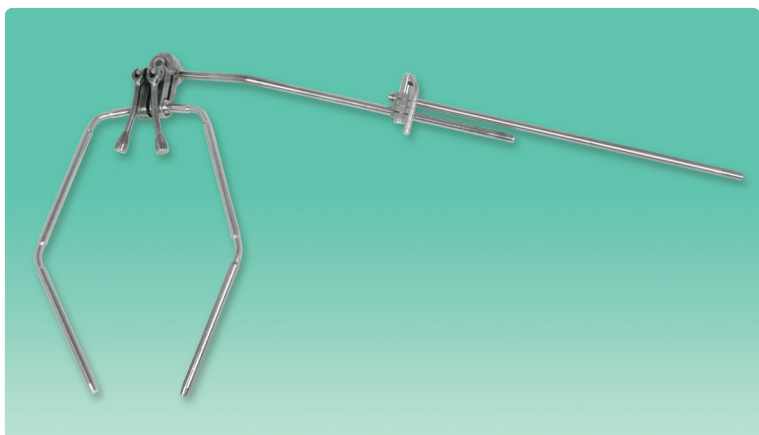

18-4312 延長アーム

0465861400

フレームを下部術野まで延長するためのアームです。婦人科、泌尿器科の下部手術に有用です。

メーヨ スイベル



0465861800	18-4321	2.5cm × 5.0cm
0465861900	18-4322	5.0cm × 5.0cm
0465862000	18-4324	7.0cm × 5.0cm
0465862200	18-4325	7.0cm × 7.5cm
0465862300	18-4326	8.9cm × 5.0cm
0465862600	18-4330	8.9cm × 7.0cm
0465862700	18-4331	7.6cm × 6.3cm

ディーバー スイベル



0465862800	18-4332	7.0cm × 11.4cm
0465863100	18-4334	5.0cm × 12.5cm
0465863300	18-4338	3.8cm × 15.0cm
0465863400	18-4340	7.0cm × 20.0cm

リーナル スイベル




0465866500	18-4392	2.5cm × 11.5cm
0465866700	18-4394	2.5cm × 15.0cm
0465866900	18-4398	2.5cm × 20.0cm

ハリントンスウィートハート スイベル



0465863700	18-4344	5.0cm × 12.5cm
0465863900	18-4346	7.5cm × 17.5cm

マリアブル(穴あき) スイベル

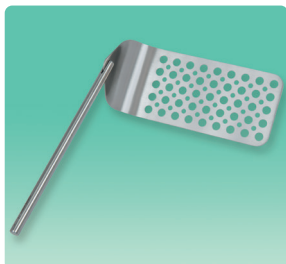

0465864900	18-4364	5.0cm × 16.5cm
0465865100	18-4368	7.6cm × 16.5cm

フェンス スイベル



0465866000	18-4381	10.1cm × 12.7cm
0465866100	18-4382	10.0cm × 15.0cm
0465866300	18-4384	8.9cm × 15.0cm
0465866400	18-4385	10.0cm × 20.0cm

スプラクニク スイベル



0465867200	18-4403	3.2cm × 10.0cm
0465867300	18-4404	5.0cm × 11.5cm
0465867500	18-4406	5.0cm × 15.0cm
0465867700	18-4408	5.0cm × 20.0cm

ケリー スイベル



0465864300	18-4351	5.0cm × 10.0cm
0465864400	18-4352	5.0cm × 12.5cm
0465864500	18-4353	5.0cm × 15.0cm
0465864600	18-4356	7.6cm × 6.3cm
0465864700	18-4358	7.5cm × 10.0cm

マーシャルマリアブルブラダー



0465865900	18-4375	7.5cm × 15.0cm
------------	---------	----------------

18-4300C 滅菌ケース



0465860600	18-4300C	縦25cm × 横54cm × 深さ15.5cm
------------	----------	--------------------------

製造業者

Boss Instruments Ltd. 国名:米国

お問い合わせ



 **泉工医科工業株式会社** www.mera.co.jp

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254

注意 実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/12/500 ●不許複製 ●販売名: ボス開創器 ●医療機器届出番号: 11B1X00016000254 ●S-1 ●クラス: I
●B-75 ●BO-0355-02