


MERA Centrifugal Blood Pump System HCS-SD

非常用簡易ドライバ 型式 HCS-SD



本品は、メラ遠心血液ポンプシステム、メラ人工心肺装置HASⅢ本体が作動不能になった場合、一時的に患者の血流を維持するために用いる非常用の駆動装置になります。

本品背面のモータユニットコネクタに併用医療機器のモータユニットを接続し、起動スイッチをオンにして回転数設定ツマミを回していただくと、任意の回転数を維持することが可能です。

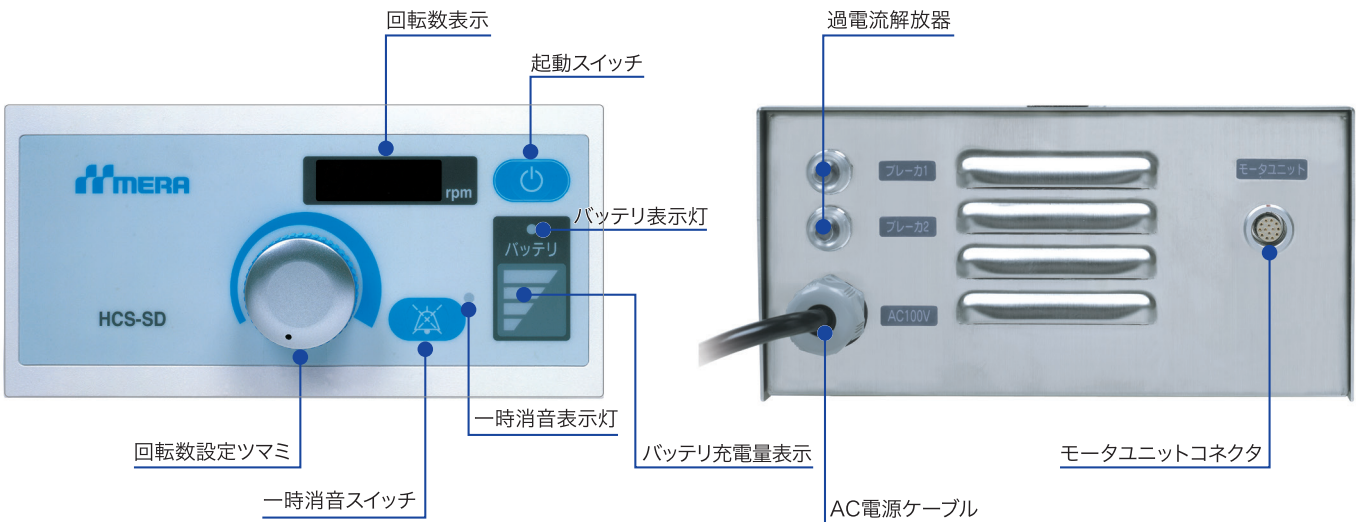

仕様

電氣的定格	1) 定格電圧 AC100V (±10V) 2) 定格周波数 50/60Hz (±1Hz) 3) 電源入力 200VA			
バッテリー	連続運転時間: 20分以上(ニッケル・水素蓄電池) (新品バッテリーにて12時間充電後、メラ遠心ポンプ使用における4,000rpm・4L/min時) バッテリー交換条件: 1年			
外形寸法	211(W)×139(H)×295(D) (本体のみ、突起物は除く)			
質量	5.0kg (非常用簡易ドライバのみ)			
有効期間	耐用年数: 7年 (自己認証による)			
併用医療機器	メラ遠心血液ポンプ装置 (22100BZX00361000)	メラ人工心肺装置HASⅡ (22100BZX00782000)	メラ遠心血液ポンプシステム (22700BZX00013000)	メラ人工心肺装置HASⅢ (23100BZX00003000)

モーターユニットに適応可能な単回使用遠心ポンプ		
メラ遠心ポンプ (22300BZX00048000) 型式: HCF-MP23	メラ遠心ポンプ NSH-R (22400BZX00154000) 型式: HCF-MP23H	メラ遠心ポンプTPC (22500BZX00413000) 型式: HCF-MP23P

商品コード	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
0212606200	4544753086691	非常用簡易ドライバ	HCS-SD	1台/箱	22800BZX00458000