

SOFIT FLEX

ソフィットフレックス(気管切開チューブ 一重管)



SOFIT FLEX




吸引ライン埋込み



気管後壁側吸引

ネックプレートマーカ
(サイズ7, 7.5, 8, 8.5, 9に着色)
(黄) (青) (紫) (緑) (橙)

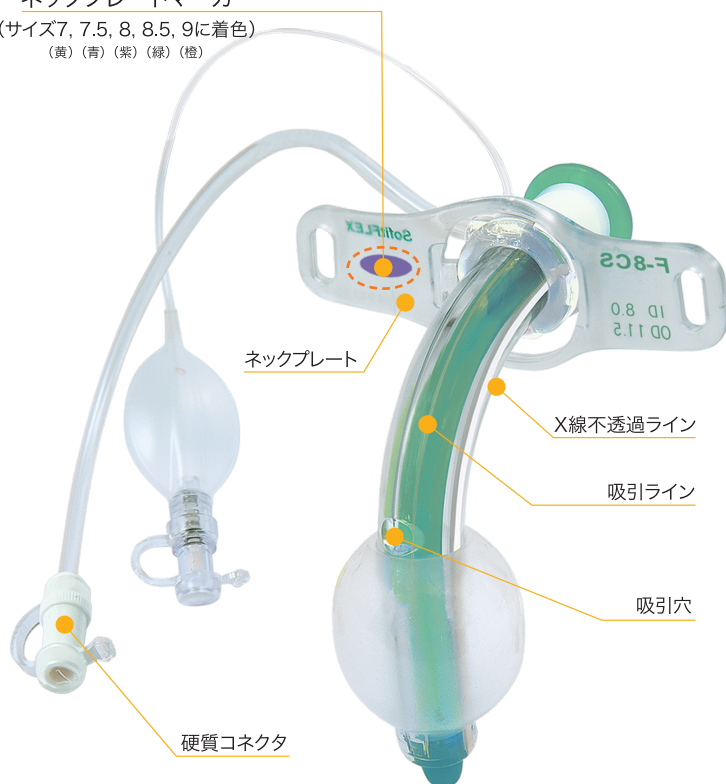

つば付15mmコネクタ



15mmコネクタの拡大図

■吸引付の特長

- 硬質コネクタはチューブとの接続を容易にします。
- カニューレの壁に内蔵させた吸引ラインは、気管切開孔への刺激を低減します。
- 内蔵の吸引ラインは安定した吸引性能を発揮します。
- 吸引ラインの開口部は仰臥位での吸引に適した位置に設けました。(カニューレ湾曲の外側)
- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の側面に配置されています。



F-CS (カフ・吸引付)

- 吸引穴は萎んだカフで閉塞されない設計になっています。
- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の側面に配置されています。



F-CFS (カフ・窓・吸引付)

- F-CSに窓を設けたタイプです。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT(標準付属品)、メラスピーチバルブ(別売、バルブT)を接続することができます。


(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
CS	F-6CS	6.0	9.0	55
	F-7CS	7.0	10.5	65
	F-7.5CS	7.5	11.0	71
	F-8CS	8.0	11.5	76
	F-8.5CS	8.5	12.1	81
	F-9CS	9.0	12.7	87
	F-10CS	10.0	13.9	97

(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
CFS	F-6CFS	6.0	9.0	55
	F-7CFS	7.0	10.5	65
	F-7.5CFS	7.5	11.0	71
	F-8CFS	8.0	11.5	76
	F-8.5CFS	8.5	12.1	81
	F-9CFS	9.0	12.7	87
	F-10CFS	10.0	13.9	97

ソフィットフレックス（一重管）

■全タイプ共通の特長

- キャップT及びメラスピーチバルブ（バルブT）は、カニューレに「窓」が開けられていないタイプに接続ができない「安全設計」（誤接続防止機構）が施されています（フェイルセーフ）。
- 全体が柔らかいネックプレートを採用。可動性と皮膚への低刺激性を兼ね備え、皮膚トラブルの低減になります。
- ネックプレートのエンボス加工は、浸出液によるネックプレートのはり付きやガーゼのずれを低減できます。
- メラコルゲート内カニューレを組み合わせ使用できます。カニューレ内腔の開存性、メンテナンスを向上できます。（フレックス内径7～9の5サイズ）

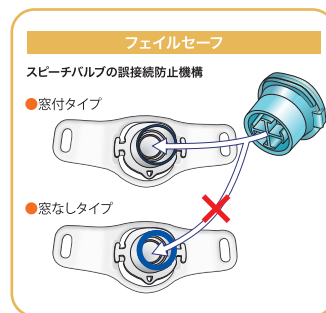

F-C（カフ付）

- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の外側についています。

(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
C	F-6C	6.0	8.3	55
	F-7C	7.0	9.6	65
	F-7.5C	7.5	10.3	71
	F-8C	8.0	11.0	76
	F-8.5C	8.5	11.6	81
	F-9C	9.0	12.3	87
	F-10C	10.0	13.5	97



F-CF（カフ・窓付）※受注生産品

- F-Cに窓を設けたタイプです。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT（標準付属品）、メラスピーチバルブ（別売、バルブT）を接続することができます。

(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
CF	F-6CF※	6.0	8.3	55
	F-7CF※	7.0	9.6	65
	F-7.5CF※	7.5	10.3	71
	F-8CF※	8.0	11.0	76
	F-8.5CF※	8.5	11.6	81
	F-9CF※	9.0	12.3	87
	F-10CF※	10.0	13.5	97



F-F（カフなし・窓付）

- X線不透過ラインはカニューレ湾曲の外側についています。
- 窓は吸引カテーテルの突出を軽減できる6穴タイプです。
- キャップT（標準付属品）、メラスピーチバルブ（別売、バルブT）を接続することができます。

(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
F	F-6F	6.0	8.3	55
	F-7F	7.0	9.6	65
	F-7.5F	7.5	10.3	71
	F-8F	8.0	11.0	76
	F-8.5F	8.5	11.6	81
	F-9F	9.0	12.3	87
	F-10F	10.0	13.5	97



F-NC（カフ・窓なし）

- F-Fの窓なしタイプです。

(mm)				
種類	型式	内径	外径	長さ
NC	F-6NC	6.0	8.3	55
	F-7NC	7.0	9.6	65
	F-7.5NC	7.5	10.3	71
	F-8NC	8.0	11.0	76
	F-8.5NC	8.5	11.6	81
	F-9NC	9.0	12.3	87
	F-10NC	10.0	13.5	97

■関連商品



■メラスピーチバルブ バルブT メラスピーチバルブ O2アダプタ

バルブTは高さを抑えた新設計です。
吸気時に投与酸素を吸入することができます。

- 商品コード:バルブT /0043201401
- 商品コード:O2アダプタ/0043202101
- 認証番号:224ADBZX00101000



■気管切開患者用人工鼻 ソフィットバント SV-S SV-L SV-L02 SV-L02U

SV-Sは高さを低く抑え、新生児から小児向けの専用設計です。

- 商品コード: SV-L /0025606101
- 商品コード: SV-L02 /0025606201
- 商品コード: SV-L02U/0025606201
- 商品コード: SV-S /0025606601
- 認証番号:221AABZX00197000



■メラチューブホルダ(気管切開チューブ用)

新生児から成人まで対応できる3サイズをご用意しました。


- 商品コード:メラチューブホルダ S/0043103401
- 商品コード:メラチューブホルダ M/0043103501
- 商品コード:メラチューブホルダ L/0043103601
- クラス分類:医療用雑品



■ソフィットカフィンフレータ VS60HVP、VS600HV、VS100HV、VS100V

カフ内の空気の圧力管理が行えます。

- 商品コード: VS60HVP(フック付)/0043110700
- 商品コード: VS600HV(フック無)/0043110800
- 商品コード: VS100HV(フック付)/0043110000
- 商品コード: VS100V (フック無)/0043111000
- 届出番号:11B1X00016000242

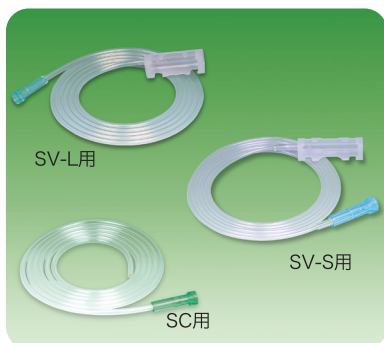

■メラ酸素供給チューブ

ソフィットバント専用の酸素供給アタッチメントです。

- 商品コード:VFチューブLC付きアタッチメント(SV-L) /0025632101
- 商品コード:VFチューブSC付きアタッチメント(SV-S) /0025632501
- 商品コード:VFチューブLC/0025631101
- 認証番号:224ADBZX00097000



■メラコルゲート内カニューレ

コード番号	型 式	色
0043009601	メラコルゲート内カニューレ 5.5 (7 用)	黄
0043009701	メラコルゲート内カニューレ 6 (7.5 用)	青
0043009801	メラコルゲート内カニューレ 6.5 (8 用)	紫
0043009901	メラコルゲート内カニューレ 7 (8.5 用)	緑
0043010001	メラコルゲート内カニューレ 7.5 (9 用)	橙

- 認証番号:227ADBZX00204000

■コード番号一覧

コード番号	型式	JAN コード(13)	認証番号
0043033000	F-6C	4806019605061	222AABZX00087000
0043033100	F-7C	4806019605078	222AABZX00087000
0043033200	F-7.5C	4806019605085	222AABZX00087000
0043033300	F-8C	4806019605092	222AABZX00087000
0043033400	F-8.5C	4806019605108	222AABZX00087000
0043033500	F-9C	4806019605115	222AABZX00087000
0043033600	F-10C	4806019605122	222AABZX00087000
0043033700	F-6CF※	4806019605139	222AABZX00087000
0043033800	F-7CF※	4806019605146	222AABZX00087000
0043033900	F-7.5CF※	4806019605153	222AABZX00087000
0043034000	F-8CF※	4806019605160	222AABZX00087000
0043034100	F-8.5CF※	4806019605177	222AABZX00087000
0043034200	F-9CF※	4806019605184	222AABZX00087000
0043034300	F-10CF※	4806019605191	222AABZX00087000
0043034400	F-6CS	4806019605207	222AABZX00087000
0043034500	F-7CS	4806019605214	222AABZX00087000
0043034600	F-7.5CS	4806019605221	222AABZX00087000
0043034700	F-8CS	4806019605238	222AABZX00087000
0043034800	F-8.5CS	4806019605245	222AABZX00087000
0043034900	F-9CS	4806019605252	222AABZX00087000
0043035000	F-10CS	4806019605269	222AABZX00087000
0043035100	F-6CFS	4806019605276	222AABZX00087000
0043035200	F-7CFS	4806019605283	222AABZX00087000
0043035300	F-7.5CFS	4806019605290	222AABZX00087000
0043035400	F-8CFS	4806019605306	222AABZX00087000
0043035500	F-8.5CFS	4806019605313	222AABZX00087000
0043035600	F-9CFS	4806019605320	222AABZX00087000
0043035700	F-10CFS	4806019605337	222AABZX00087000
0043035800	F-6F	4806019605344	222AABZX00087000
0043035900	F-7F	4806019605351	222AABZX00087000
0043036000	F-7.5F	4806019605368	222AABZX00087000
0043036100	F-8F	4806019605375	222AABZX00087000
0043036200	F-8.5F	4806019605382	222AABZX00087000
0043036300	F-9F	4806019605399	222AABZX00087000
0043036400	F-10F	4806019605405	222AABZX00087000
0043036500	F-6NC	4806019605412	222AABZX00087000
0043036600	F-7NC	4806019605429	222AABZX00087000
0043036700	F-7.5NC	4806019605436	222AABZX00087000
0043036800	F-8NC	4806019605443	222AABZX00087000
0043036900	F-8.5NC	4806019605450	222AABZX00087000
0043037000	F-9NC	4806019605467	222AABZX00087000
0043037100	F-10NC	4806019605474	222AABZX00087000

※受注生産品



■ソフィットフレックスショートタイプFS

カニューレの長さを短くしたショートタイプです。
チューブの長さを短くして、気管切開孔からの
浮き上がりを抑える工夫をしました。
(6、7、7.5、8、8.5、9、10の7サイズ)
カフ・吸引ライン付です。

- 認証番号:222AABZX00087000

製造業者
MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2024/4月/500 ●不許複製 ●A-28 ●F-2 ●BA-0112-09

お問い合わせ

