



Pediatric SOLAS

メラエクセライン回路HP2（小児用ECMO回路）

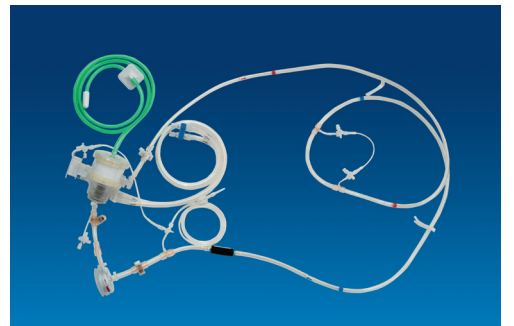

- 本製品は、圧カトランスデューサと酸素飽和度セルを組み込んだ小児用ECMO回路です。
- 圧カトランスデューサを3個使用することで脱血圧および人工肺前後の回路内圧を測定することができます。

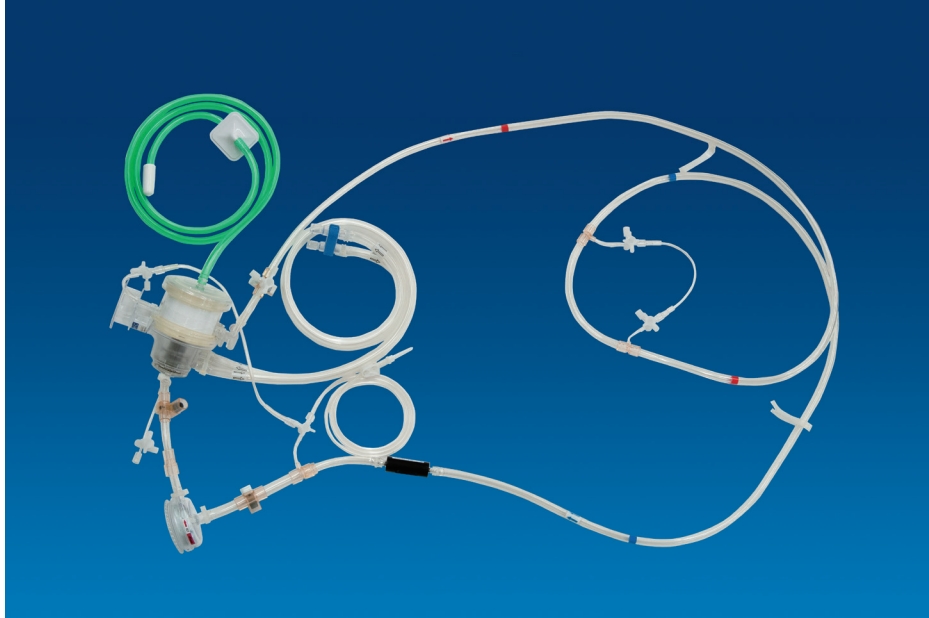

商品コード	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
03200824H0	4544753147125	メラエクセライン回路HP2	#ST SOLAS-P ヘバ	1組/箱	22300BZX00251000

仕 様		
回路	送脱血チューブ内径	1/4inch
	送脱血接続コネクタ	ストレートコネクタ
	コーティング	NSH コーティング
人工肺	型式	HPO-06H-C-C
	膜素材	シリコーン膜(支持体:ポリプロピレン膜)
	有効膜面積	0.6 m ²
	最大血流量	1.6L/min
	熱交換器	ステンレス製
	冷温水出入口ポート	12.7mm(1/2inch)
	コーティング	なし
遠心ポンプ	型式	HCF-MP23H
	最大回転数	5000rpm
	コーティング	NSH コーティング
酸素飽和度セル	型式	HSAT-1C-1/4
	測定項目	酸素飽和度: 30%~100% ヘマトクリット: 10%~50%
圧カトランスデューサ	型式	HPT-1/4
	測定範囲	-30 ~ 300mmHg(測定精度保証できる範囲)
充填量		約 200mL

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>
 ■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読み
 になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ●2025/6月500 ●不許複製 ●D-199 ●GR-1 ●BH-0536-01

お問い合わせ

