


# メラ安全弁 HSV-350

## MERA SAFETY VALVE

- 開心術中にベント回路及びサクション回路に過度の陽陰圧がかかる事を防ぐとともに、ポンプ側からの逆流を防止する安全弁です。

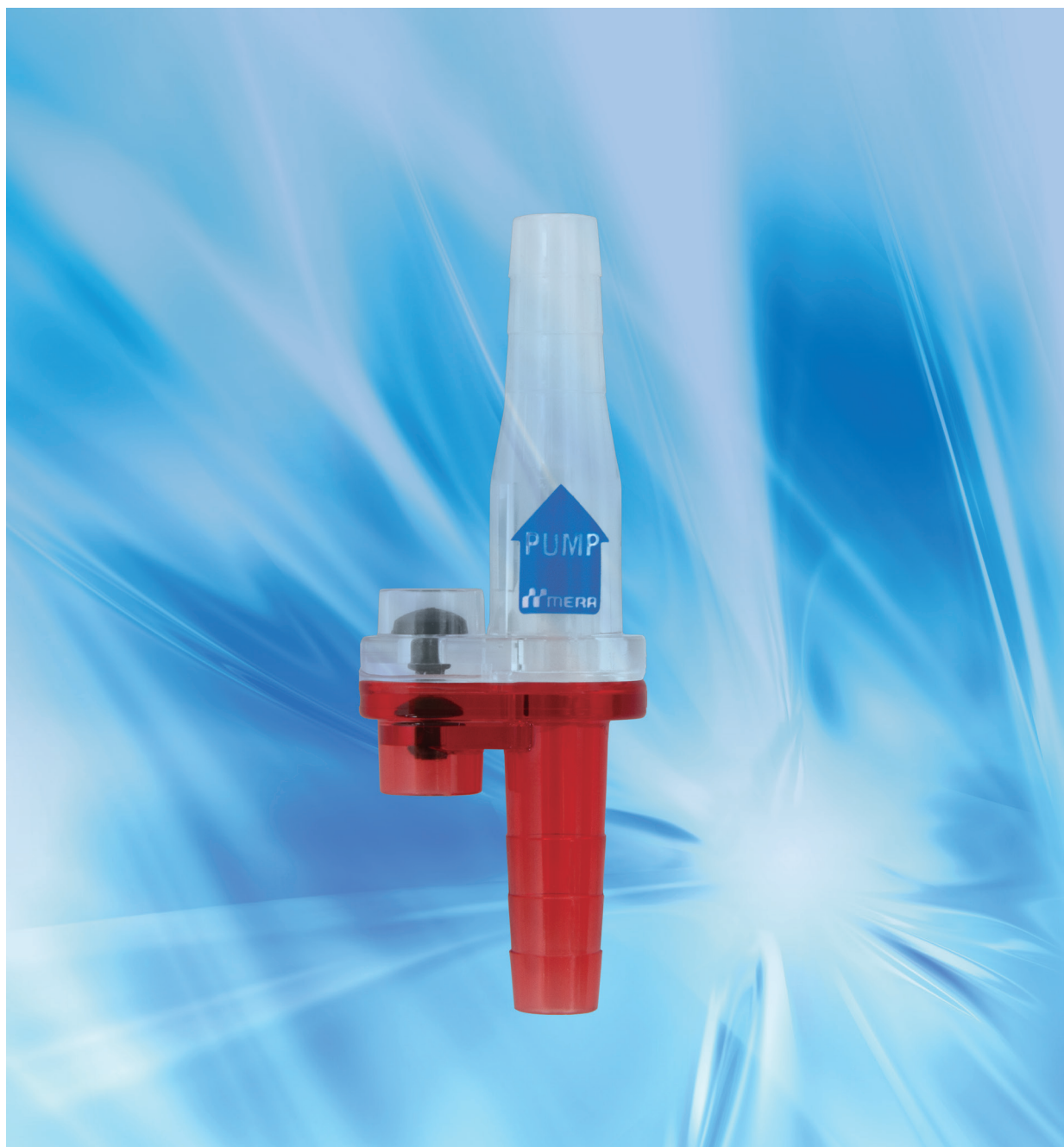

## メラ安全弁 HSV-350


### ■特 長

- 左心室および回路内の過度な陽陰圧を開放します。
- ポンプ側から左心室への気体や液体の流入を防ぎます。
- ハウジングが透明なため内部の確認が容易に行えます。

### ■仕 様

- ハウジング材質：ポリカーボネイト
- バルブ材質：シリコンゴム
- 血液入口ポート：1/4"
- 血液出口ポート：1/4"

### ◆標準的な取り付け位置

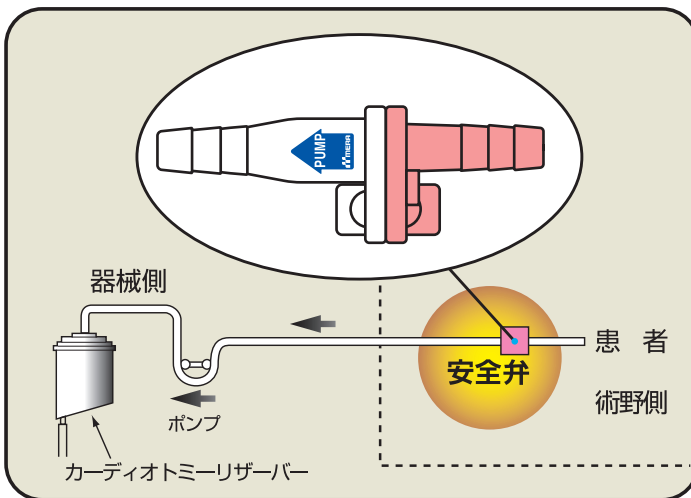

本品は回路(1/4インチ)の、患者とポンプの間の適切な位置に取り付けて下さい。

### ◆開放弁作動圧

☑陽圧開放弁作動圧

49.3kPa±5.3kPa(≒370mmHg±40mmHg)

☑陰圧開放弁作動圧

-23.3kPa±3.3kPa(≒-175mmHg±25mmHg)

製造販売業者

**MEIRA 泉工医科工業株式会社**

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先：本社商品企画：TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点：札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

**注意**

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2021/3月/2000 ●不許複製 ●S-1 ●認証番号：20900BZZ00277000 ●D-38 ●BH-0450-01

●一般的名称：左心室ライン吸引コントロール用バルブ ●販売名：メラ安全弁 [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)