

# Soari

壁掛吸引器 Soari / ディスポ吸引システム Soari



壁掛吸引器

ソアリ

# Soari

## 感染対策<sup>※1</sup>

を支える

## クローズドシステム<sup>※2</sup>

吸引から廃棄までを、ひとつの流れに。

- ✓ 吸引バッグは横から脱着でき、使用後も簡単に交換できます。
- ✓ 吸引チューブは正面接続で、接続確認や取り回しがしやすくなっています。
- ✓ 大きな窓により、吸引バッグの状態を確認しやすい設計です。

横から交換しやすい、  
壁掛吸引器

3年間  
自然故障保証<sup>※3</sup>



※1 感染性廃棄物は、内容物の飛散・流出等を防ぐため、容器を確実に密閉することが求められています。(環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」参照)

※2 本製品の「クローズドシステム」とは、吸引された体液等をディスポ吸引バッグ内に回収し、外部に開放しにくい状態で密閉して廃棄できる構造を示します。

※3 正常使用による自然故障が対象です。消耗品・付属品・誤使用等は対象外です。詳細は保証書をご確認ください。

# ディスポ吸引システム Soari

## 処理・廃棄まで考えた、ディスポ吸引バッグ

キャップ・凝固剤・逆止弁・吸水性フィルタを一体化し、  
吸引後の処理や廃棄のしやすさに配慮しています。



キャップ  
逆止弁  
吸水性フィルタ  
凝固剤

### 吸引バッグの取り出しが簡単



プシュー

開閉ボタンを押すと、残圧が抜け、吸引バッグ  
を取り出しやすくなります。

### 手洗いの手間を軽減



キャニスターはウォッシャーディスインフェクター  
で洗浄・消毒ができ、清潔管理を効率化します。



強弱ツマミ

ON/OFF レバー

ホース掛け

ホースクリップ

吸引口

スライドベースハンガー  
(スライド式・ピン式両用)


開閉ボタン

吸引配管  
プロテクタ


一般的名称(JMDNコード)	真空吸引器(36778000)	吸引器用キャニスタ(34858000)
販売名	壁掛吸引器 Soari	ディスポ吸引システム Soari
医療機器クラス分類		クラスI
特定保守管理医療機器	該当	-
主な仕様	吸引圧力調整の目盛: OFF/10/20/30/40/50/60/MAX ※最大調整圧力:配管圧による	最大容量の目盛:MAX(約1000mL) 凝固剤入り ※ディスポーザブル(単回使用)
外形寸法(mm)	91(W)×161(D)×321(H)	
重量	約1.2Kg	

# 設置環境に合わせて選べる、 2つのタイプ

壁吸引配管まわりのスペースや障害物に応じて、  
ショートタイプとロングタイプを選べます。

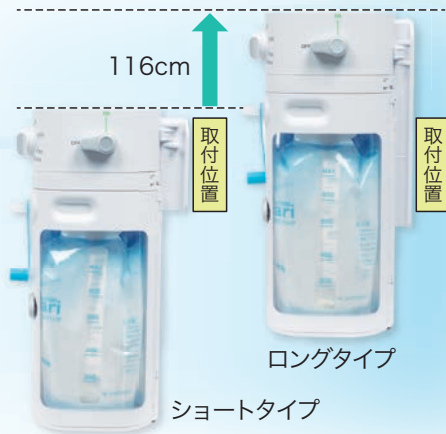

## 消耗部品

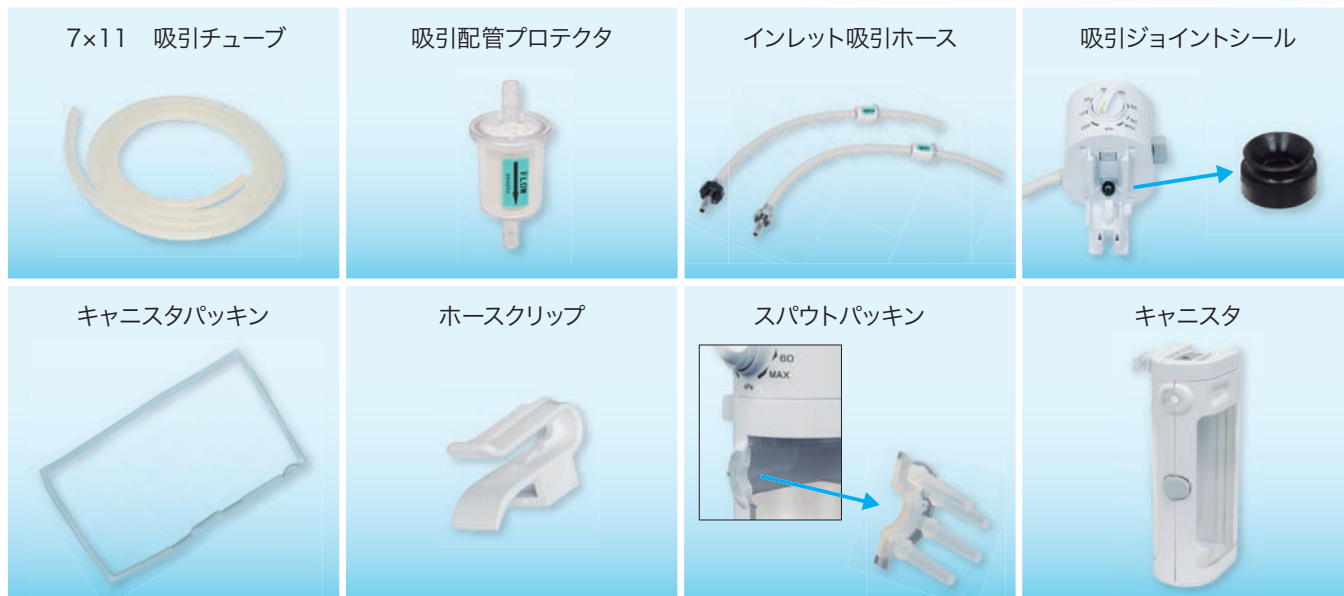

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	包装単位	許可番号
0151100000	4560209426422	壁掛吸引器 Soari	P型 ショート H6032-SCSH	1台/箱	11B1X00012000027
0151100100	4560209426439		*S型 ショート H6033-SCSH		
0151100200	4560209426446		*P型 ロング H6028-SC		
0151100300	4560209426453		*S型 ロング H6029-SC		
0151101600	4560209426460	ディスポ吸引システム Soari	ディスポ吸引バッグSoari 凝固剤入り 50枚入 D7034-DSB	50枚/箱	11B1X00012000028
0151102100	4560209426477	ディスポ吸引システム Soari	キャニスタ H6036-SC	1台/箱	11B1X00012000028

※受注生産品

コード番号	JANコード	製品名	包装単位	
0151101701	4560209439439	7x11 吸引チューブ(未滅菌) 10本入ID7xOD11x2m E7582-SC	10本/袋	医療機器非該当品
0151101801	4560209439385	吸引配管プロテクタ E7577-SC	10個/袋	
0151101900	4560209439415	P型 インレット吸引ホース(吸引配管プロテクタ付き) E7580-SC	1個/袋	
0151102000	4560209439422	S型 インレット吸引ホース(吸引配管プロテクタ付き) E7581-SC	1個/袋	
0151102201	4560209439361	吸引ジョイントシール E7575-SC	5個/袋	
0151102300	4560209439378	キャニスタパッキン E7576-SC	1個/袋	
0151102400	4560209439392	ホースクリップ E7578-SC	1個/袋	
0151102501	4560209439408	スパウトパッキン E7579-SC	5個/袋	

製造販売業者

**SCNKO Medical** 株式会社Sanko Medical 埼玉県さいたま市西区中釘652番地

販売業者

**MERA** 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

**注意**

ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになつてからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。  
●2026/4月/3000 ●不許複製 ●B-149 ●GR-1 ●BO-0568-01

お問い合わせ

