

Kochab

メラ吸入麻酔システム



「こんな麻酔器が欲しかった」を
形にしました！

C **できるだけ
小さくしてほしい**

E **簡単に
移動
させたい**



S **シンプルで
使いやすい**

S **最低限の安全装置は
備わっていてほしい**

コカブ

Kochabは、麻酔器としての基本的な機能は盛り込みつつ、
シンプル、コンパクトさを追求しました。

その中でも、使いやすさを考慮したデザインとなっています。

専用の架台を搭載することでより使いやすくなります。

麻酔用人工呼吸器(メラ麻酔用ベンチレータ Minoris)の有無を選択できます。




●本体+Kochab-D(引出し付架台)

Minorisを搭載しない場合、オプションのKochab-Dをご選択ください。



●本体+Kochab-S(ベンチレータ搭載用架台)

Minorisを搭載する場合、オプションのKochab-Sをご選択ください。

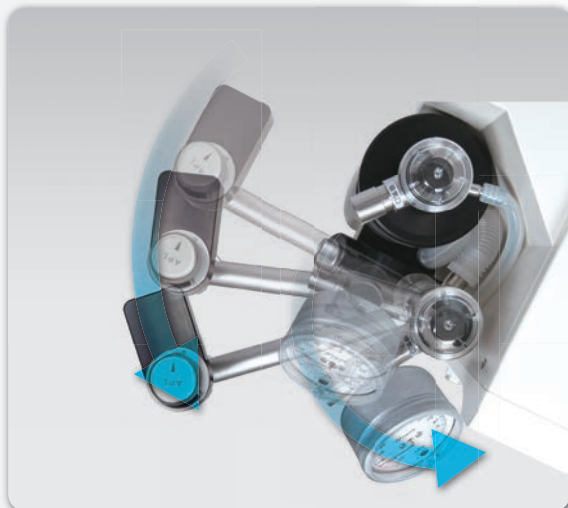

バッグアーム、気道内圧計が可動します



用手とベンチレータの回路がワンタッチに切換えできます

スペック

販売名	メラ吸入麻酔システム Kochab	
寸法	本体：485(W)×370(D)×400(H)mm 本体+Kochab-D：485(W)×580(D)×1195(H)mm 本体+Kochab-S：485(W)×580(D)×1195(H)mm	
質量	本体：27kg 本体+Kochab-D：58kg 本体+Kochab-S：52kg※ Kochab-P：3kg	
定格供給圧	0.35～0.50 MPa (350～500kPa)	
配管圧力計	表示範囲：0～1 MPa (0～1000kPa)	
流量計	表示範囲：O ₂ ・N ₂ O・AIR：0～10.0 L/min	
O ₂ フラッシュ流量	定格供給圧で35～75 L/min	
安全装置	O ₂ 供給圧安全装置	O ₂ 供給圧0.18～0.25MPa (180～250kPa) でアラーム発生かつアラーム発生以下の圧力にてN ₂ Oを遮断
	流量計安全装置	O ₂ とN ₂ O混合ガスにおいてO ₂ 濃度25%以上を確保
気化器取付台数	1台 (Selectatec [®] 式)	
アブゾーバ	キャニスタ容量	900mL
	呼吸回路切換	呼吸回路切換弁による用手・ベンチレータ回路の切換え
	気道内圧計	表示範囲：-20～100hPa
耐用期間	10年	

※メラ麻酔用ベンチレータMinorisの質量15kgは含まれていません。

●Selectatec[®]は、Datex-Ohmeda社の登録商標です。

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
0010002900	4544753134927	メラ吸入麻酔システム Kochab	Kochab	1台	30400BZX00057000
0010104500	4544753134934	メラ吸入麻酔システム Kochab	Kochab-S	1台	30400BZX00057000
0010104600	4544753134941	メラ吸入麻酔システム Kochab	Kochab-D	1台	30400BZX00057000
0010104700	4544753134958	メラ吸入麻酔システム Kochab	Kochab-P	1台	30400BZX00057000
0012000400	4544753134965	メラ麻酔用ベンチレータ Minoris	Minoris	1台	30400BZX00058000

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0011100800	4544753160469	V60 麻酔薬気化器	V60 SEV	1個/箱	302ALBZX00008000

コード番号	JANコード(13)	規格/型式	包装(数量)
0011200500	4544753160247	Quick-Filアダプタ (セボフルラン用)	1個/箱

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0032000300	4582235339200	マイサインO ₂	警報機能付ハンドヘルド酸素濃度計	1セット	13B1X00143000305

製造販売業者：株式会社アイビジョン

オプション品



Kochab-P (ボール)



メラ麻酔用ベンチレータ
Minoris



V60 麻酔薬気化器
(セボフルラン用)

関連商品



ヤバシライム(CO₂吸収剤)



マイサインO₂(酸素濃度計)



コンプレッサ(JUN-AIR 87R-4PD)

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

<https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先：泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 実際のお取り扱いの際には、電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●2026/1月/1000 ●不許複製 ●A-125 ●GR-2 ●BA-0485-04

お問い合わせ

