

S-Cure

閉鎖式吸引カテーテル エスキュア



付属品



①蛇管



②曜日ステッカー



③ディスコネクトウェッジ

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装	カラーコード	認証番号
0043104601	4544753160568	S-Cure (エスキュア)	H212600 挿管用60cm12Fr	10本/箱	白	307ADBZX00084000
0043104701	4544753160575		H214600 挿管用60cm14Fr	10本/箱	緑	
0043104801	4544753160582		H212300 気切用30cm12Fr	10本/箱	白	
0043104901	4544753160599		H214300 気切用30cm14Fr	10本/箱	緑	

関連製品



コード番号	JANコード(13)	製品名	包装
0043104501	4544753160513	閉鎖式吸引カテーテル用洗浄水 T25000	40個/箱

※医療機器非該当品

製造業者
Ningbo Huakun Medical Equipment Co., Ltd.

製造販売業者
MERA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>
■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。
■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2026/10月/1000 ●不許複製 ●A-149 ●GR-7 ●BA-0569-02



S-Cure^{エスキュア}

— 72時間 使用可能な 閉鎖式吸引カテーテル —

閉鎖式吸引カテーテル エスキュア


Smart Safety Simple

洗練されたデザイン

患者の呼吸を維持

シンプルな操作性

片手で操作可能！吸引コントロールバルブ

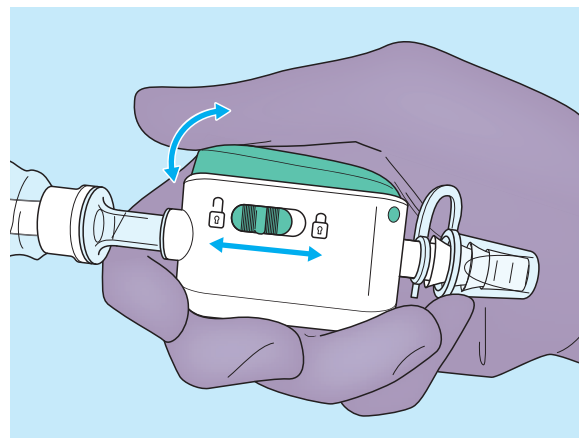

- ✓ 片手でON/OFF切替可能なボタンロック
- ✓ 片手で握りやすく押しやすい吸引ボタン
- ✓ サイズごとのカラーリングで識別しやすい



機能的なデザイン

カテーテル先端が青く着色されており識別しやすく、着色部は透明部に比べ柔らかくなっています

※DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)フリー


Y字型アダプタ

患者側接続口は操作に合わせて回転するため気管内(気管切開)チューブへの負担を軽減します

吸引カテーテル カテーテル保護スリーブ

分泌物の観察がしやすく、
スタッフを感染から守ります

洗浄液注入用ポート

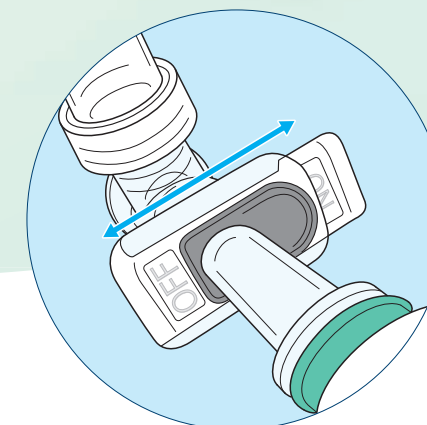

スライドバルブ

吸引カテーテルの誤挿入、洗浄液の
気道への移行を防ぎます