

はぐりっぷの使い方

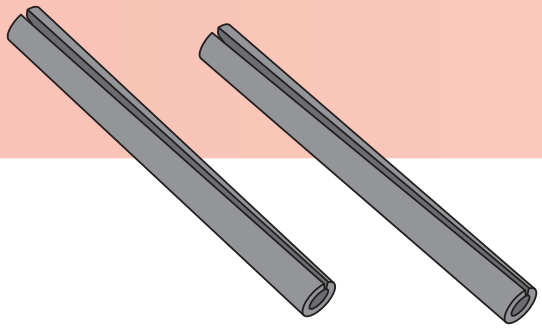


ご使用方法

1

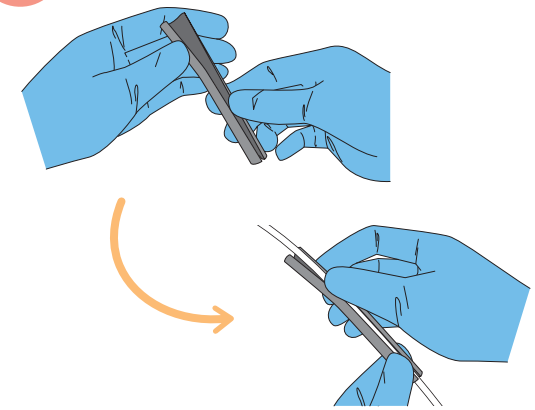


はぐりっぷのスリットを開き、鼻腔カニューラのラリアット（耳掛け部）に取り付けます。

2

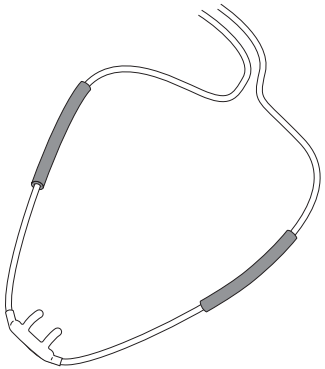

もう一方にも、同様に取り付けます。

3

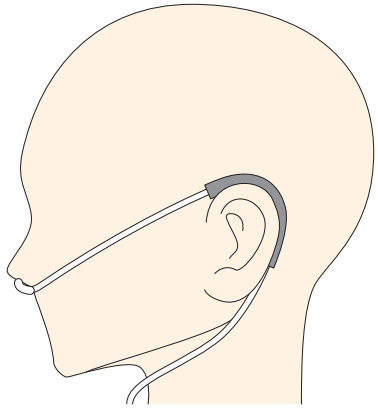

鼻腔カニューラを装着後、はぐりっぷを耳の後ろにフィットする位置までスライドさせ調整してください。

注意

本製品は非常に柔らかい素材でできています。
保管する際は、変形を防ぐため、本製品の上に物を置かないでください。

販売元
MERA 泉工医科工業株式会社
■お問い合わせ先：泉工医科工業株式会社 商品企画本部　TEL 03-4283-1005
https://www.mera.co.jp/
お問い合わせ